

EPC120

Epikut

A nova definição do épico



S.I.N.
Implant System

Epikut

NOVA DEFINIÇÃO DO ÉPICO


Recriamos o conceito do épico com o EPIKUT.

Com um design cortante, compressivo e rosca dupla de apoio invertido, essa linha proporciona mais praticidade clínica, previsibilidade e alta estabilidade primária para aquele que procuram resultados superiores.



› Macrogeometria híbrida, corpo cilíndrico e ápice cônico

Com exclusiva macrogeometria e design de rosca cortantes, o EPIKUT é a melhor escolha para casos de carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração, podendo também ser utilizado para todas as demais situações clínicas, sempre seguindo os passos clínicos sugeridos em seu sistema de fresagem.

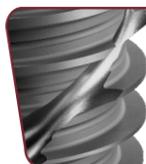

› Roscas duplas de apoio invertido

Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.

› Ultrarrosqueável

Perfil de rosca dupla e cortantes garantem maior velocidade de inserção do implante.



› Ápice

Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.



› Microrrosca cervical exclusiva

Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.



› Precisão de adaptação

Com componentes protéticos exclusivos e alta resistência aos esforços.


› Fabricado em titânio grau IV Cold Worked

Metal levíssimo, muito resistente à corrosão, desgaste e a fratura.



› Mais opções de componentes protéticos para Cone Morse

Angulação Interna do Cone Morse disponível em 11,5°.

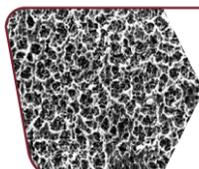


› Tratamento em toda superfície


Duplo ataque ácido em toda a superfície para o Cone Morse. Nos implantes com a conexão HE o duplo ataque ácido vai até a região cervical.



Medidas técnicas EPIKUT CONE MORSE

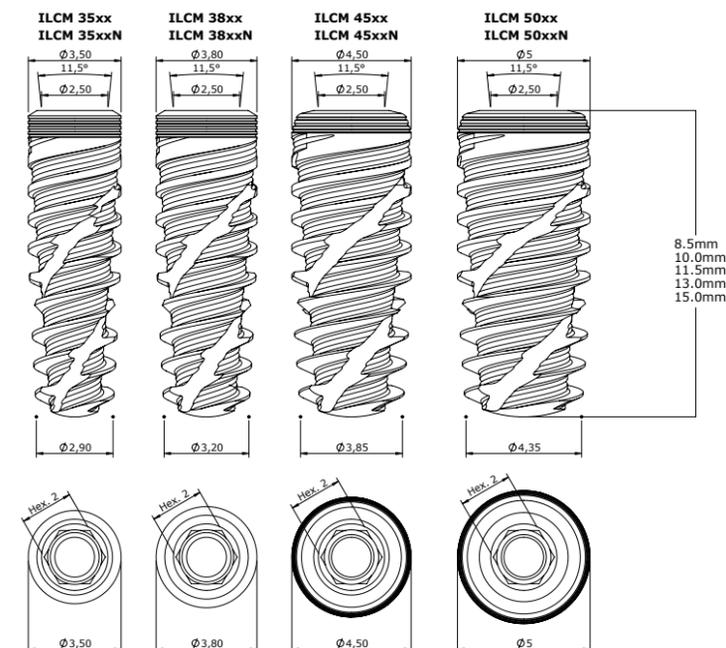

Medidas técnicas EPIKUT HEXÁGONO EXTERNO

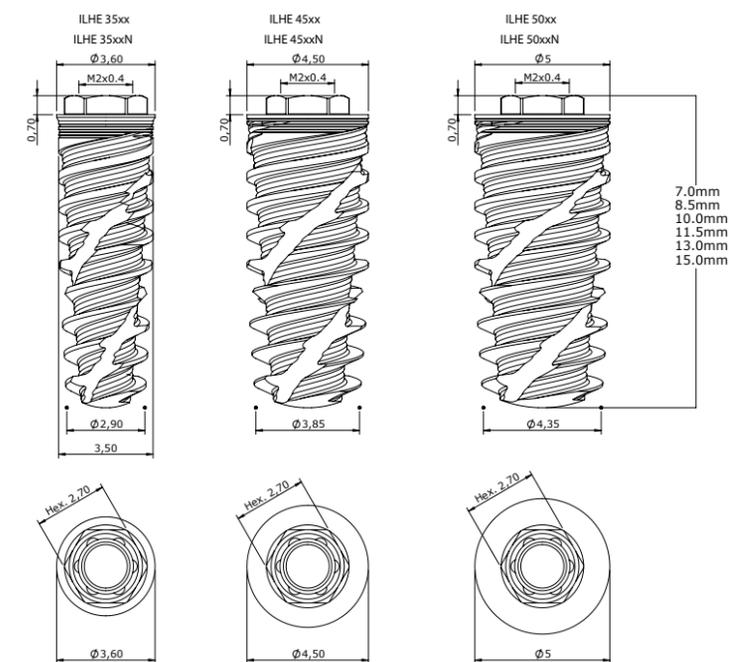

INDICAÇÕES DE USO CLÍNICO:

- › 3,5 mm - Incisivos centrais e incisivos laterais
- › 3,8 mm - Caninos e pré-molares
- › 4,5 mm - Pré-molares e molares
- › 5,0 mm - Molares

Epikut PLUS

A COMBINAÇÃO INSUPERÁVEL DE DESIGN E SUPERFÍCIE QUE TORNAM UM IMPLANTE ÉPICO

O EPIKUT PLUS foi idealizado para você que deseja ressignificar o conceito de implantes dentários. Com um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, aliado a melhor superfície para acelerar a osseointegração, a HAnano, o EPIKUT PLUS é a combinação perfeita para quem busca resultados superiores e com alta previsibilidade.




› Indicado para todos os tipos ósseos

A exclusiva macrogeometria que apresenta design de roscas cortantes progressivas fazem do EPIKUT o estado da arte para casos de carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração. Extramamente versátil, o EPIKUT possibilita também sua utilização nas demais situações clínicas desde que seguido o protocolo clínico de fresagem indicado.



› Cicatrização óssea acelerada

A alta hidrofília, que é gerada por uma camada ultrafina e homogênea de hidroxiapatita, amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.

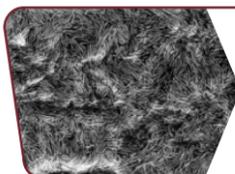

› Exclusiva superfície HAnano

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a nanosuperfície acelera a osseointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.



› Um implante diversas possibilidades

Conexões CM e HE facilitando seu dia-a-dia clínico.



› Praticidade clínica

Um único kit cirúrgico para a instalação da linha completa Epikut e Epikut Plus.



HA^{nano} Surface

**CONHEÇA O PADRÃO OURO
DE OSSEOINTEGRAÇÃO**

+ FINO

Camada Nanométrica de cristais de hidroxiapatita.

+ RÁPIDO

Melhor crescimento ósseo precoce e força e ancoragem do implante.

+ FORTE

Superfície hidrofílica que acelera as funções dos osteoblastos, construindo assim mais osso em menos tempo.

Microscopia Eletrônica de Varredura demonstrando célula osteoblástica sobre superfície HAnano®. Cortesia: Cavalcante JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ.

Descubra mais sobre a superfície HAnano® em nosso QRCode.



KIT SAFE DRILL EPIKUT

TORNANDO SUAS CIRURGIAS MAIS PRÁTICAS E PRECISAS

Desempenho e eficiência:
exclusivos limitadores em poliacetal
com perfeito encaixe e alta resistência,
o que garante maior durabilidade do kit.

Previne lesões
de estruturas nobres
como nervos, seio maxilar
e cavidade nasal.

O Kit Safe Drill Epikut
é compatível somente com o
Kit Cirúrgico Epikut.

Limitadores de perfuração
óssea disponíveis para cada
diâmetro de fresas.

Bandeja removível
para facilitar a limpeza.

Fácil de usar: sistema de
codificação por cores, o que
facilita no uso clínico.

Para que a instalação do Cone Morse ocorra conforme recomendação (infraóssea)
é necessária a utilização de um limitador com 1,5 mm superior à profundidade desejada.

CÓDIGO: KESD 02

KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDADE E SIMPLICIDADE
PARA SUAS CIRURGIAS

Fresa lança com helicoidal
otimizando passos cirúrgicos.

Sequência de fresagem exclusiva
para cada densidade óssea
aumentando a versatilidade clínica.

Sequência linear
e intuitiva.

Fresas com revestimento DLC:

Menor aquecimento ósseo;
Incremento na durabilidade;
Alto poder de corte;
Ângulo mais afiado.

Indicador de direção
com marcação
milimétrica preciso
para cada diâmetro.

Único Kit
para plataforma
CM e HE.

Design de bandejas
mais leve e compacta.

Torquímetro de Haste:
Aferição mais precisa
do torque.

CÓDIGO: KCSE 01



Conheça o Implantat, o habitat educacional da S.I.N. Implant System.

 implantat.com.br

0800 770 8290
www.sinimplantsystem.com

Visite nossas redes sociais:

 fb.com/sinimplantsystem

 @sinimplantsystem

 [/sinimplante](https://in/sinimplante)

 S.I.N. Implant System

 sin_implant