




Epikut

A nova definição do épico

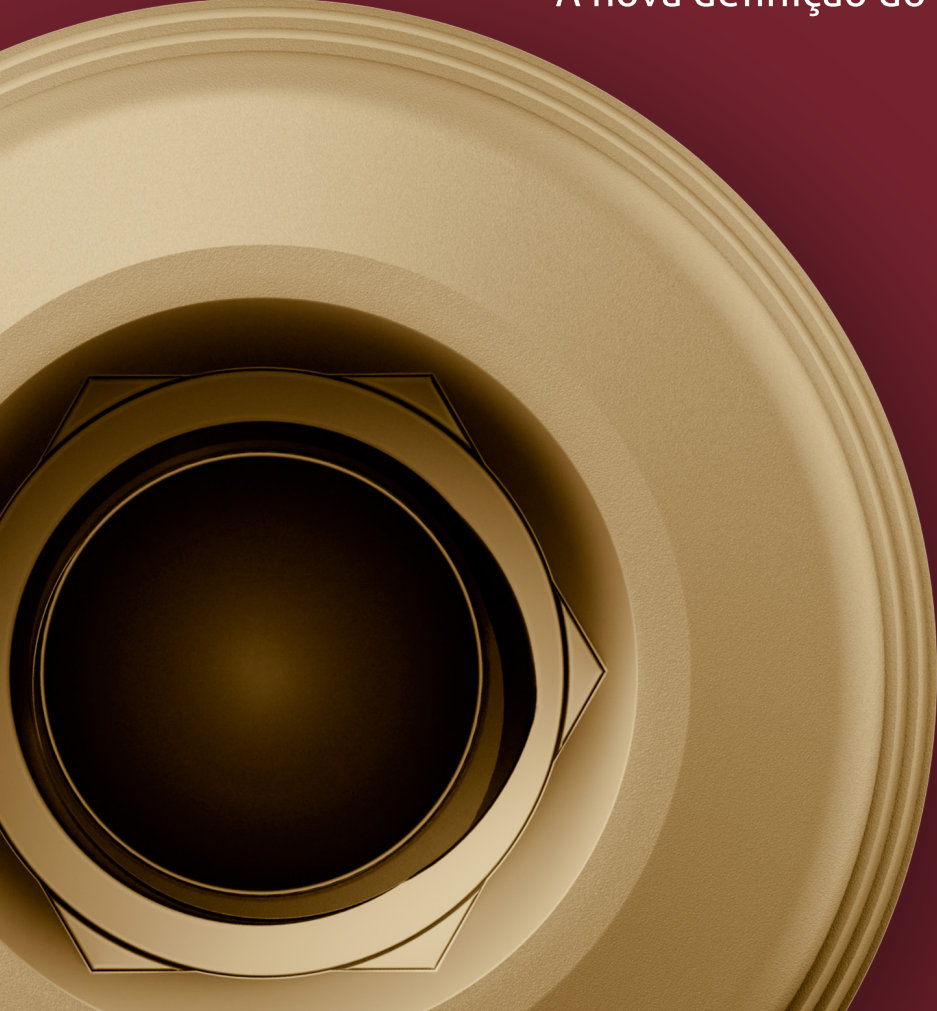

Epikut^S

O PODER DE SER ÉPICO

Idealizado para potencializar a prática clínica, o Epikut S foi desenvolvido para unir a tecnologia e características da macrogeometria híbrida exclusiva, design de roscas cortantes já conhecidos na linha Epikut e agora com conexão Cone Morse 16°. Além disso, estas linhas de implantes dentários proporcionam previsibilidade, alta performance, desempenho elevado e resultados superiores. Características para quem deseja ser épico no dia a dia!



› Roscas duplas de apoio invertido

Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.



› Mais opções em portfólio

Conexão Cone Morse 16° para facilitar o dia a dia clínico.




› Microrroscas cervicais exclusivas

Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.



› Ápice

Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.

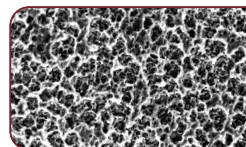

› Cicatrização óssea acelerada

A alta hidrofília, que é gerada por uma camada ultrafina e homogênea de hidroxiapatita, amplia a atividade das proteínas envolvidas no processo de osseointegração.



Epikut

NOVA DEFINIÇÃO DO ÉPICO


Recriamos o conceito do épico com o EPIKUT.

Com um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, esta linha proporciona mais praticidade clínica, previsibilidade e alta estabilidade primária para quem procura resultados superiores.



› Exclusiva superfície HANano Plus

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a nanosuperfície acelera a osseointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.

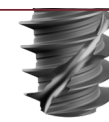

› Ápice

Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.



› Microrroscas cervicais exclusivas

Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.



› Um implante e diversas possibilidades

Conexão Cone Morse 11,5° que facilita o seu dia a dia clínico.

› Duplo ataque ácido


Em toda a superfície para o Cone Morse.




› Roscas duplas de apoio invertido

Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.

CONE MORSE 16°

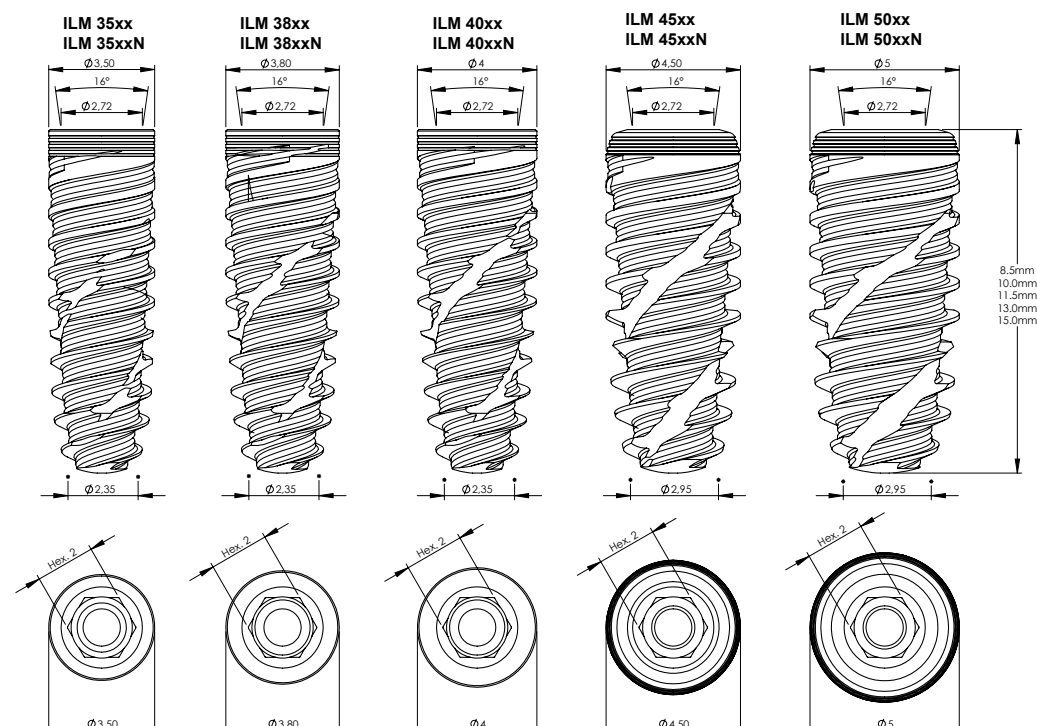

CONE MORSE 11,5°

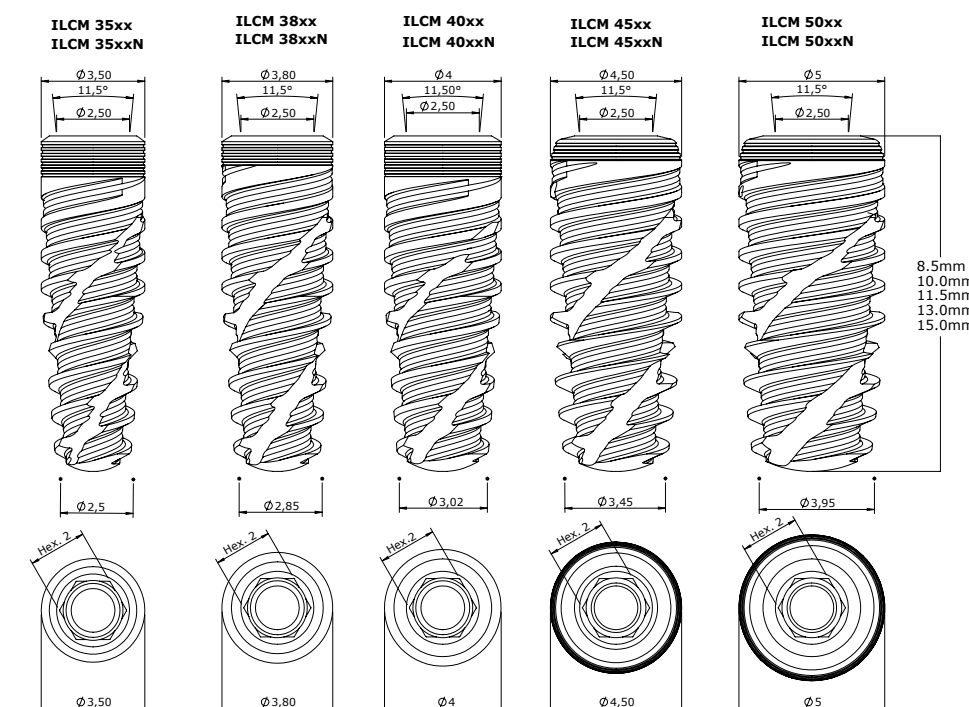



Epikut

HEXÁGONO EXTERNO

O Epikut HE possui um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, aliado a melhor superfície para acelerar a osseointegração, a HAnano, o EPIKUT HE PLUS é a combinação perfeita para quem busca resultados superiores e com alta previsibilidade.




› **Roscas duplas de apoio invertido**
Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.


› **Mais opções em portfólio**
Possibilita a técnica de Plataforma Switching.



› **Conexão hexalobular**
Chave não trava e suporta maior torque, não deformando a conexão

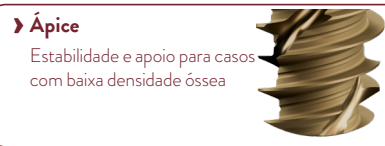



› **Ápice**
Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea

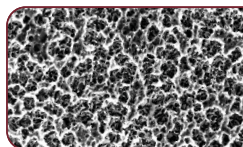

› **Exclusiva superfície HAnano Plus**
Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a nanosuperfície acelera a osseointegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.



HEXÁGONO EXTERNO

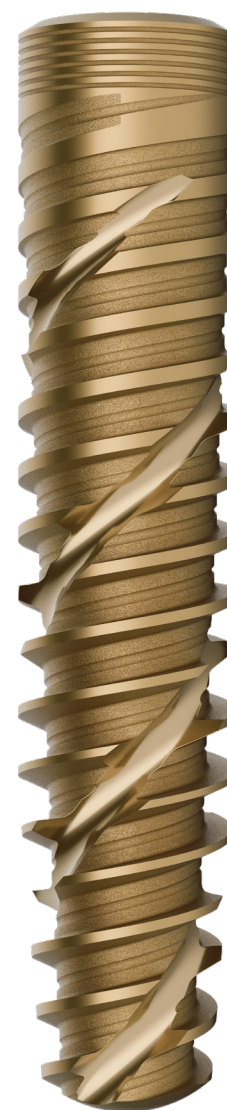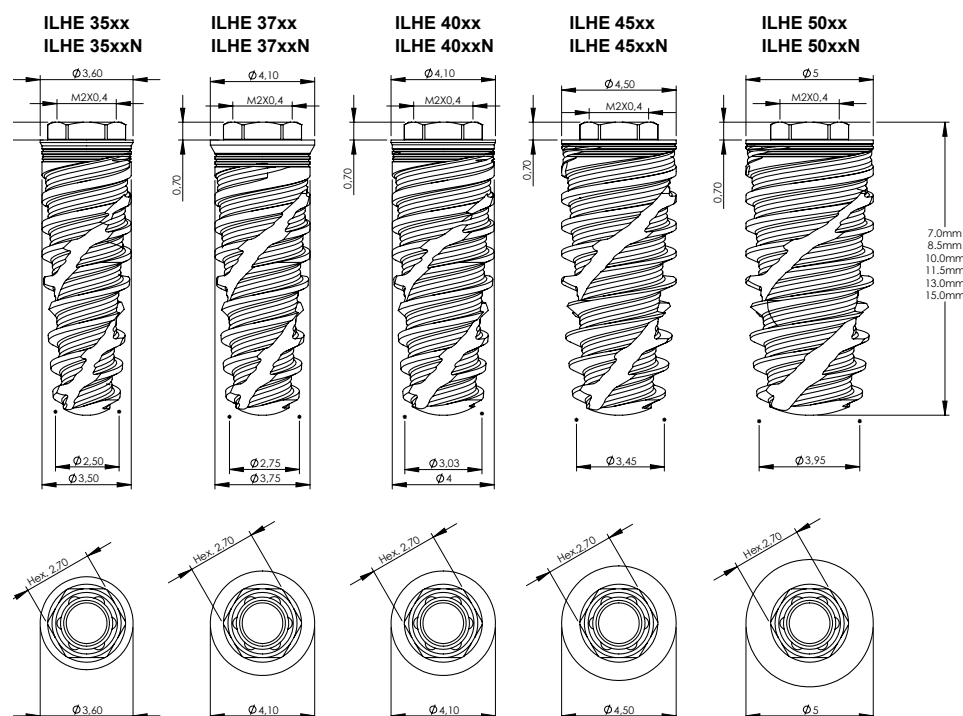

Epikut


LONG

UM IMPLANTE ÉPICO COM TAMANHO IDEAL

Além de seu design cortante, compressivo e de suas roscas duplas de apoio invertido, a linha Epikut Long oferece mais opções de tamanhos para facilitar seu dia-a-dia clínico.




› **Um implante com muitas possibilidades**
A linha Epikut Long oferece quatro comprimentos diferentes (18, 20, 22 e 24 mm), ideal para casos de reabilitação maxilar completa.

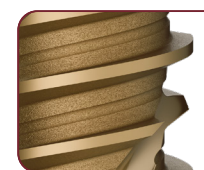

› **Agilidade e previsibilidade**
Permite a reabilitação de pacientes edêntulos de forma mais simples, rápida e previsível, oferecendo a possibilidade de evitar enxertos ou elevações de seios nasais.

› **Precisão de adaptação**
Com abutments únicos e altamente resistentes à tensão.

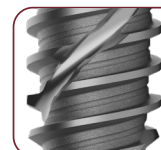


› Alta previsibilidade para a carga imediata
› Ótima ancoragem em maxilas atroficas
› Resolução do caso em um único procedimento cirúrgico




› **Opções para a sua preferência:**
Os implantes long podem ser encontrados na linha Epikut, com conexão Cone Morse 11,5° e na linha Epikut S, com conexão Cone Morse 16°.



CONE MORSE LONG 11,5°

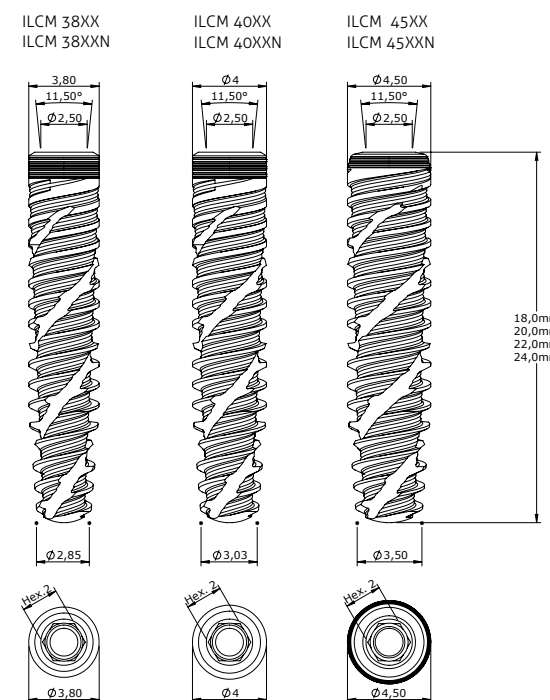

CONE MORSE LONG 16°

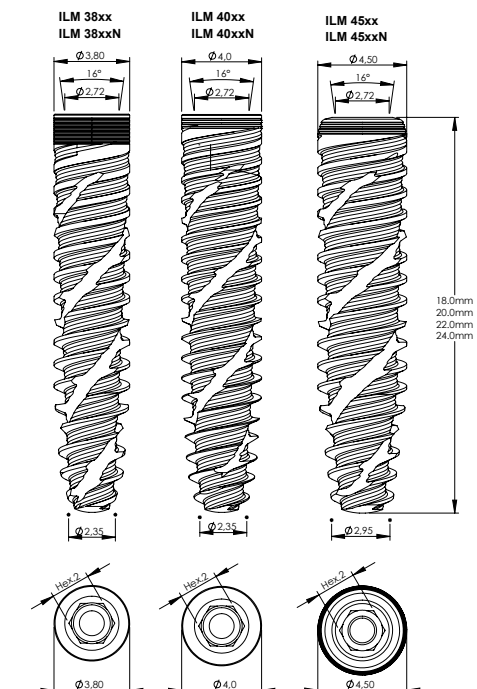


KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDADE E SIMPLICIDADE
PARA SUAS CIRURGIAS

Sonda 2 em 1, com
marcações para implantes
standard e implantes
longos em um só
instrumento.

Sequência de fresagem
intuitiva, com indicação
para osso Soft (linha
pontilhada) e osso Hard
(linha contínua), além de
diferenciação por cores
para facilitar ainda mais
o dia a dia clínico.

Fresa Countersink:
Utilizada para o
alargamento do diâmetro
na região cervical do
implante facilitando a
instalação em osso duro.

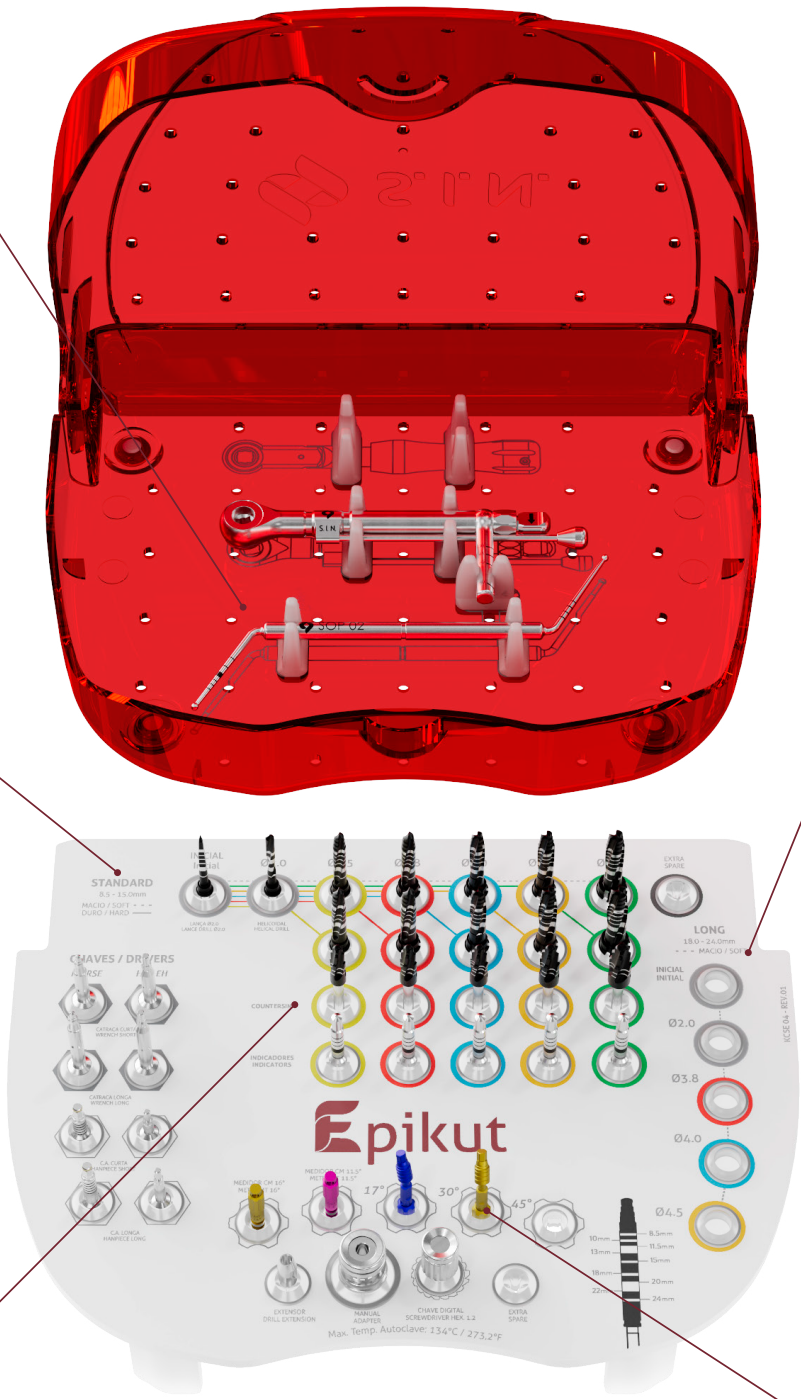

Flexibilidade de compra:
fresas longas disponíveis
para venda separadamente,
sem necessidade de trocar
o kit.

Mais precisão e
previsibilidade cirúrgica
com indicadores de direção
angulados de 17° e 30°,
com opção de 45° vendido
separadamente.

KIT SAFE DRILL EPIKUT

TORNANDO SUAS CIRURGIAS MAIS PRÁTICAS E PRECISAS

*O Kit Safe Drill Epikut não é compatível com o Kit Cirúrgico Epikut Long.

Desempenho e eficiência:
exclusivos limitadores em poliacetal
com perfeito encaixe e alta resistência,
o que garante maior durabilidade do kit.

Previne lesões
de estruturas nobres
como nervos, seio maxilar
e cavidade nasal.


Fácil de usar: sistema de codificação
por cores, o que facilita no uso clínico.



Limitadores de perfuração óssea
disponíveis para cada diâmetro de fresas.

O Kit Safe Drill Epikut
é compatível somente com o
Kit Cirúrgico Epikut.

Bandeja removível
para facilitar a limpeza.

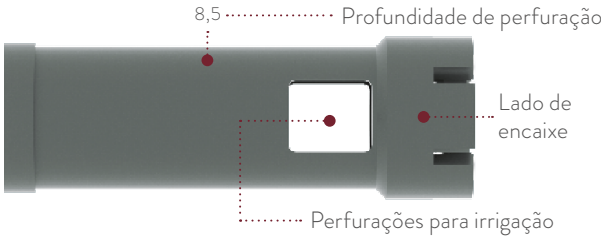

Para que a instalação do Cone Morse ocorra conforme recomendação (infraóssea) é necessária a utilização de um limitador com 1,5 mm superior à profundidade desejada.

CÓDIGO PRODUTO: KESD 02
CÓDIGO DA CAIXA ORGANIZADORA: COESD 02

CÓDIGO KIT CIRÚRGICO: KCSE 04
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COSE 04



0800 770 8290(BR)

www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinbrasiloficial](https://www.instagram.com/sinbrasiloficial)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[@singlobal](https://www.youtube.com/singlobal)