

EPESC121

# Epikut

The new definition of epic



**S.I.N.**  
Implant System

# Epikut

## LA NUEVA DEFINICIÓN DE LO ÉPICO


Recreamos el concepto de lo épico con EPIKUT.

Con un diseño de corte, compresión y tornillos dobles de apoyo invertido, esta línea proporciona más practicidad clínica, previsibilidad y alta estabilidad primaria para quienes buscan resultados superiores.



### › Macrogeometría híbrida, cuerpo cilíndrico y ápice cónico

Con macrogeometría exclusiva y diseño de tornillos cortantes, EPIKUT es la mejor opción para casos de carga inmediata, hueso de baja densidad y alvéolo después de la extracción, que también se puede utilizar para todas las demás situaciones clínicas, siempre siguiendo los pasos clínicos sugeridos en su sistema de fresado.

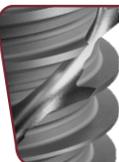

### › Tornillos dobles de apoyo invertido

Garantizan una mayor estabilidad primaria y par de torsión.

### › Ultra-atornillable

El perfil de tornillos dobles y cortantes garantiza mayor velocidad de inserción del implante.



### › Ápice

Estabilidad y soporte para casos con baja densidad ósea.



### › Micro-tornillos cervicales exclusivos

Mayor área de contacto con el hueso y mejora la disipación de las fuerzas oclusales.



### › Precisión de adaptación

Con componentes protésicos exclusivos y alta resistencia a los esfuerzos.


### › Fabricado en titanio grado IV Cold Worked

Metal muy ligero, muy resistente a la corrosión, al desgaste y a la rotura.



### › Más opciones de componentes protésicos para el Cono Morse

Angulación Interna del Cono Morse disponible en 11.5°.

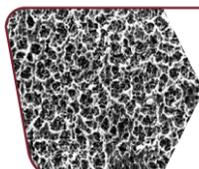


### › Tratamiento en todas las superficies


Doble ataque de ácido por toda la superficie para el Cono Morse. En implantes con conexión HE, el ataque doble de ácido se dirige hasta la región cervical.



## Medidas técnicas EPIKUT CONO MORSE

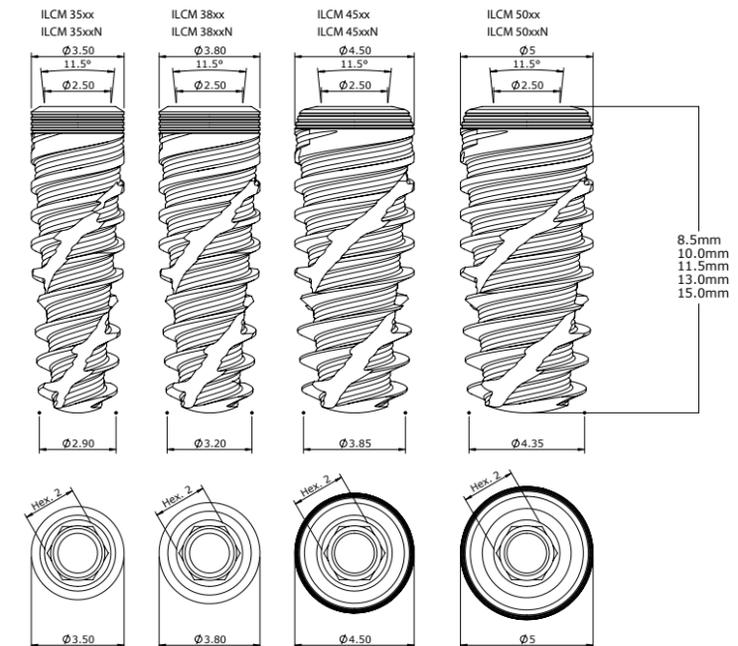

## Medidas técnicas EPIKUT HEXÁGONO EXTERNO

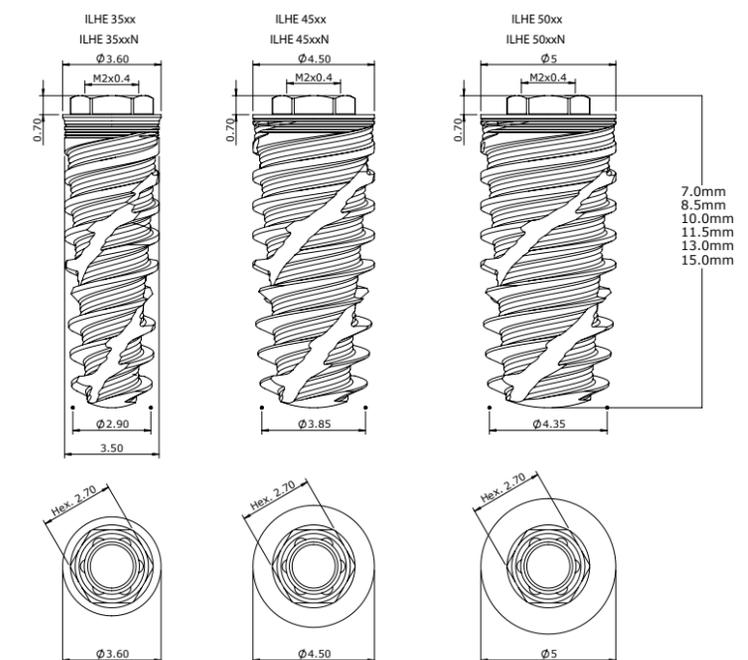

## INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3.5 mm - Incisivos centrales e incisivos laterales
- › 3.8 mm - Caninos y premolares
- › 4.5 mm - Premolares y molares
- › 5.0 mm - Molares

# Epikut PLUS

## LA COMBINACIÓN INSUPERABLE DE DISEÑO Y SUPERFICIE QUE LO HACEN UN IMPLANTE ÉPICO.

Se concibió la idea de EPIKUT PLUS para usted que desea dar un nuevo significado al concepto de implantes dentales. Con un diseño cortante, compresivo y tornillos dobles de apoyo invertido, junto con la mejor superficie Plus HAnano para acelerar la osteointegración, el EPIKUT PLUS es la combinación perfecta para quién busca resultados superiores y con alta previsibilidad.




### › Indicado para todos los tipos de huesos

La exclusiva macrogeometría que presenta un diseño de tornillos cortantes progresivos hacen que EPIKUT PLUS sea el estado del arte para casos de carga inmediata, hueso de baja densidad y alvéolo después de la extracción. Extremadamente versátil, EPIKUT también permite su uso en otras situaciones clínicas siempre que se siga el protocolo de fresado clínico indicado.



### › Cicatrización acelerada del hueso

La alta hidrofilia, que es generada por una capa ultrafina y homogénea de hidroxiapatita, aumenta la actividad de las proteínas implicadas en el proceso de osteointegración.

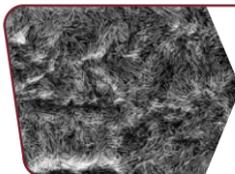

### › Superficie Plus exclusiva

Desarrollada en las principales universidades de Suecia, la nano-superficie acelera la osteointegración y promueve una calidad ósea superior, comprobada por más de 50 estudios preclínicos.



### › Un implante y varias posibilidades

Conexiones CM y HE facilitando su día a día clínico.



### › Practicidad clínica

Un solo kit quirúrgico para instalar la línea completa EPIKUT.



**PLUS**  
**HA** nano Surface

**CONOZCA EL ESTÁNDAR DE ORO  
DE OSTEOINTEGRACIÓN**

## + FINO

Capa nanométrica de cristales de hidroxiapatita.

## + RÁPIDO

Mejor crecimiento óseo temprano y fuerza y anclaje del implante.

## + FUERTE

Superficie hidrofílica que acelera las funciones de los osteoblastos, construyendo así más hueso en menos tiempo.

Microscopia Electrónica de Barrido que muestra una célula osteoblástica sobre la superficie HAnano\*. Cortesía: Cavalcanti JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ

Descubre más sobre la superficie Plus HAnano en nuestro QrCode.



# KIT SAFE DRILL EPIKUT

TRANSFORMANDO SUS CIRUGÍAS MÁS PRÁCTICAS Y CON PRECISIÓN

Rendimiento y eficiencia: limitadores en poliacetal exclusivos con perfecto ajuste y alta resistencia, lo que garantiza una mayor durabilidad del kit.

Previene lesiones de estructuras nobles como nervios, seno, maxilar y cavidad nasal.

El Kit Safe Drill Epikut solo es compatible con el Kit Quirúrgico Epikut.

Limitadores de perforación ósea disponibles para cada diámetro de las fresas.

Bandeja extraíble para facilitar la limpieza.

Fácil de usar: sistema de codificación por colores, que facilita el uso clínico.

Para que la instalación del Cono Morse ocurra como se recomienda (infra-ósea) es necesario utilizar un limitador de 1.5 mm mayor que la profundidad deseada.

CÓDIGO: KESD 02

# KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y SIMPLICIDAD PARA SUS CIRUGÍAS.

Fresa lanza con helicoidal que optimiza los pasos quirúrgicos.

Secuencia de fresado único para cada densidad ósea que aumenta la versatilidad clínica.

Secuencia lineal e intuitiva.

Fresas con recubrimiento DLC: Menor calentamiento de los huesos; Aumento en la durabilidad; Alto poder de corte; Ángulo más agudo.

Indicador de dirección con señalización milimétrica precisa para cada diámetro.

Único Kit para plataforma CM y HE.

Diseño de bandejas más leve y compacta.

Torquímetro de varilla: Medición más precisa del par de torsión.



CÓDIGO: KCSE 01



Descubra Implantat, el hábitat educativo de S.I.N. Implant System.

 [implantat.global](https://www.implantat.global)

+55 (11) 2169 3000  
[www.sinimplantsystem.com](https://www.sinimplantsystem.com)

---

Visite nuestras Redes Sociales:

  @sinimplantglobal  S.I.N. Implant System