

BEYOND Full Arch



OUSE IR ALÉM BEYOND Full Arch

Ir além do possível é oferecer aos seus pacientes protocolos totais que reabilitam funções essenciais do dia a dia, como comer e sorrir, enquanto elevam a autoestima e transformam vidas, mesmo em casos severos de atrofia óssea.

Ouse ir além, explore a arte do Beyond Full Arch!

Benefícios de usar a técnica BEYOND Full Arch



ESTÉTICA MELHORADA:

Sorriso natural e harmonia facial restaurada.



MAIOR CONFORTO:

Ajuste preciso e sem desconforto das próteses removíveis.



PREVENÇÃO DE PERDA ÓSSEA:

Mantém a saúde óssea e estrutura facial.



TRATAMENTO PERSONALIZADO:

Soluções adaptadas a cada paciente.



RECUPERAÇÃO RÁPIDA:

Menos tempo de tratamento, curto tempo de recuperação e resultados duradouros.

NOSSAS SOLUÇÕES

Ousar. Ir além. Foi isso que pensamos ao criar a melhor e mais completa solução para reabilitar seus pacientes com atrofias maxilares graves com o protocolo **Beyond Full Arch**, que pode combinar o uso de técnicas pterigoides, transnasais, transsinusais e zigomáticos para reabilitar 100% dos seus casos.





Epikut^S

Plus HAnano Surface: Mais osso e mais rápido

A superfície Plus HAnano combina várias características que são conhecidas por promover a qualidade óssea durante a cicatrização, acelerar a osseointegração e promover crescimento ósseo para qualquer tipo de implante.

Conexão S: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Todos tipos de ossos, principalmente para carga imediata, osso de baixa densidade e alvéolo pós-extração.

Alturas: 8,5 / 10 / 11,5 / 13 / 15 MM

Diâmetros: 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,5 / 5,0 MM



Epikut^S PTG PLUS

Nossa abordagem inovadora apresenta um ápice estreito de 2,35 mm, permitindo uma preparação mínima (apenas duas fresas) na sutura pterigomaxilar, uma área com osso cortical espesso. As rosca de suporte invertidas garantem um alto torque nesta região, proporcionando uma estabilidade aprimorada mesmo em ossos de baixa densidade na região tuberosa, além de um colar polido de 4mm para acomodação tecidual.

Conexão S: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Reabilitação total de maxilas atroficas, onde a ancoragem no osso pterigoide é necessária para evitar procedimentos adicionais de enxerto.

Alturas: 18 / 20 / 22 / 24 MM

Diâmetros: 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,5 MM



Epikut^s LONG

Além de seu design cortante, compressivo e de suas roscas duplas de apoio invertido, a linha Epikut S Long oferece mais opções de tamanhos para facilitar seu dia-a-dia clínico. Indicado para reabilitações de arcos totais com medidas que facilitam a ancoragem em regiões ósseas mais densas, como pilar canino e paredes da cavidade nasal.

Conexão: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Instalação cirúrgica intraoral na maxila, de preferência em ossos tipo III e IV (ossos de baixa densidade), para casos de edentulismo total, carga imediata e tardia.

Alturas: 18 / 20 / 22 / 24 MM

Diâmetros: 3,8 / 4,0 / 4,5 MM

Zygomatic^z PLUS

O implante Zygomatic oferece uma solução imediata ao paciente, como alternativa aos procedimentos de enxerto ósseo. Ele proporciona estabilidade, previsibilidade e precisão no tratamento, atendendo às expectativas dos profissionais por meio de seu design versátil e opções adaptadas a características anatômicas e relações de tecidos.

Conexão S: Cone Morse 16°

Indicação Clínica

Instalação de implantes no osso zigomático para ancoragem extra alveolar em reabilitações de arco total de maxilas atroficas.

Alturas: 30 / 32,5 / 35 / 37,5 / 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 / 52,5 / 55 / 57,5 / 60 / 62,5 MM

Diâmetros: 4,0 MM



Conheça nossa linha de Mini Abutments ideais para atingir os melhores resultados.

Os mini abutments S.I.N. são fabricados em liga de titânio grau V com anodização dourada e oferecem precisão e segurança para seus procedimentos. Seus protetores, fixados manualmente, permanecem no mesmo lugar até a finalização da prótese provisória ou definitiva.



17°

Alturas:
2,0, 3,0 e 4,0 mm



30°

Alturas:
2,0, 3,0 e 4,0 mm



45°
STANDARD

Alturas:
1,5 e 2,5 mm



45°
SLIM

Alturas:
2,0 e 3,0 mm




60°

Alturas:
1,5 e 2,5 mm



52°

Alturas:
1,5 e 2,5 mm

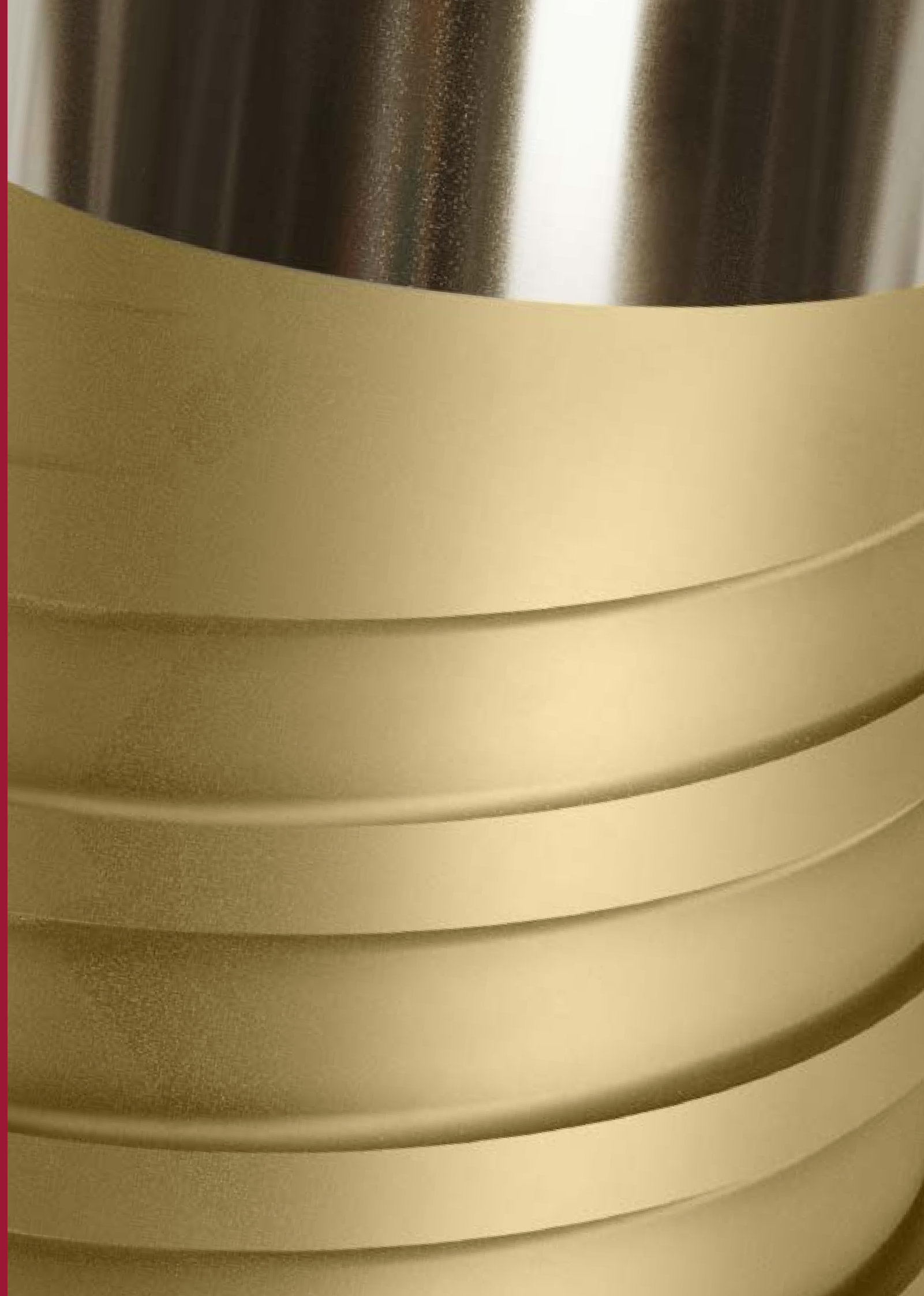



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.



0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinimplantsystem](https://www.instagram.com/sinimplantsystem)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)