

Zygomatic² PLUS



0800 770 8290(BR)
www.sinimplantsystem.com.br

Visite nossas Redes Sociais:



/sinimplantsystem



@sinbrasiloficial



/sinimplantsystem



@singlobal





Zygomax²

PLUS

- **ROSCAS AGRESSIVAS E COMPRESSIVAS**

Desempenho único e travamento mais rápido do implante.

- **CONEXÃO CONE MORSE 16°**

Alta resistência mecânica e maior embricamento e adaptação dos componentes protéticos com a angulação de 16°

- **EXTREMIDADE APICAL LISA**

Melhor adaptação e proteção de tecidos moles e resultados superiores para casos graves de reabsorção maxilar.

- **FABRICADO EM TITÂNIO GRAU IV COLD WORKED**

Metal muito leve e muito resistente à corrosão, ao desgaste e à fratura,

- **EXCLUSIVA SUPERFÍCIE HANANO PLUS**

Altamente hidrofílica, a Superfície Plus favorece o processo de osteogênese, estimula o crescimento e cicatrização precoce do tecido ósseo e aumenta a força e a ancoragem do implante.

Com os tratamentos de superfície de Duplo Ataque Ácido (DAA).

IDEAL PARA CARGA IMEDIATA



Resultados imediatos e tempo de tratamento mais curto

O implante Zygomatic oferece uma solução imediata ao paciente, como alternativa aos procedimentos de enxerto ósseo. Ele proporciona estabilidade, previsibilidade e precisão no tratamento, atendendo às expectativas dos profissionais por meio de seu design versátil e opções adaptadas a características anatômicas e relações de tecidos.



COMPONENTES PROTÉTICOS

O Mini Abutment com angulações de 17, 30, 45, 52 e 60 graus e alturas de 2,0 mm a 4,0 mm feito de liga de titânio e cor dourada anodizada. Seu torque de instalação é de 20N.cm.

Os protetores são parafusados sobre o mini pilar com torque manual padrão e devem permanecer na posição até a confecção da prótese provisória ou definitiva.

CÓDIGOS DOS IMPLANTES ZYGOMATIC			
CÓDIGO	DIÂMETRO DA ROSCA (mm)	DIÂMETRO DA PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
ILMZ 4030N	Ø4,0	Ø4,0	30,0
ILMZ 4032N	Ø4,0	Ø4,0	32,5
ILMZ 4035N	Ø4,0	Ø4,0	35,0
ILMZ 4037N	Ø4,0	Ø4,0	37,5
ILMZ 4040N	Ø4,0	Ø4,0	40,0
ILMZ 4042N	Ø4,0	Ø4,0	42,5
ILMZ 4045N	Ø4,0	Ø4,0	45,0
ILMZ 4047N	Ø4,0	Ø4,0	47,5
ILMZ 4050N	Ø4,0	Ø4,0	50,0
ILMZ 4052N	Ø4,0	Ø4,0	52,5
ILMZ 4055N	Ø4,0	Ø4,0	55,0
ILMZ 4057N	Ø4,0	Ø4,0	57,5
ILMZ 4060N	Ø4,0	Ø4,0	60,0
ILMZ 4062N	Ø4,0	Ø4,0	62,5



Conquiste resultados superiores com o alto desempenho através de um protocolo cirúrgico projetado para superar os desafios dos procedimentos clínicos.



Redução do aquecimento ósseo;
Aumento da durabilidade;
Alta potência de corte;
Ângulo mais afiado.

Para realizar o preparo do leito com mínima possibilidade de rompimento da membrana sinusal.



Código	Referência
FRLZ 27M	Fresa Lança A - Média
FHZ 2030M	Fresa Helicoidal B - Média
FHZ 2932M	Fresa Helicoidal C - Média
FHZ 3234M	Fresa Helicoidal D - Média

Indicadores de direção (52° e 60°) estão disponíveis para aquisição separada.

Código	Referência
IDA 52	Indicador de Direção Angulado de 52°
IDA 60	Indicador de Direção Angulado de 60°

20 N.cm20 N.cm20 N cm20 N.cm



20 N.cm




CÓDIGO	
PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Para MA reto- Adequado para soldagem a las
PTM 4800-2	Para MA angulado




CÓDIGO	
CPM 4800-3	Para MA reto
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto - Para MA reto
CPM 4800-2	Para MA angulado
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto - Para MA angulado

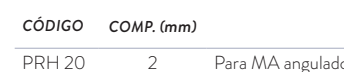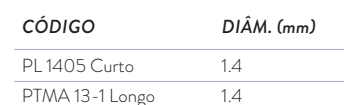

1

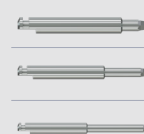


Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm	Curta (CTH 1220)
Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm	Média (CTH 1224)
Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm	Longa (CTH 1230)

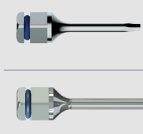


Chave Catraca Hex. 1.2mm
Curta (CDHC 20)

Chave Catraca Hex. 1.2mm
Média (CDHC 24)

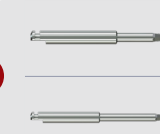

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm
Est. Curta (CTHA 1220)

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm
Est. Média (CTHA 1224)

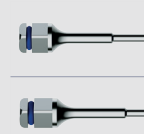

Chave Catraca Hex.1.2mm Est.
Curta (CHTMA 20)

Chave Catraca Hex.1.2mm Média
(CHTMA 24)