

MEDIT *i*700 wireless



 **Solutions** 

 **S. I. N.**





Magia Facilitada com um Simples Toque

Tenha o poder de levar sua prática para o próximo nível!

Além da tecnologia comprovada do i700

Ainda o mesmo i700 **super rápido, leve e preciso**. Mas agora **sem fio**.



Sem Mais Fios

Livre de fios, a digitalização é confortável em qualquer ângulo. Escaneie áreas proximais com facilidade, sem restrições de movimento.



Rápido, Preciso, Conectado

Velocidade de digitalização de até 70 FPS*. Você pode experimentar o desempenho incrivelmente suave e rápido de digitalização do modelo mais vendido da Medit. Desfrute da velocidade do i700 sem fio, de forma impecável.



Superpotente, mas leve

Equilíbrio de peso excepcional, mesmo com a bateria anexada, para maior conforto.



Hardware poderoso com software versátil.

Otimizado para conveniência. Não apenas nos aspectos de hardware, mas também de software. i700 sem fio, recheado com a mais recente tecnologia MEDIT.

*Quadros por segundo: número de quadros de dados de digitalização por segundo.

- Precisão de arco completo: $10,9 \mu\text{m} \pm 0,98$
- Até 70 FPS

Ponteira reversível

Não é necessário girar o pulso para digitalizações da maxila.


Ponteira pequena


(Vendido separadamente)

Para fácil aplicação na região posterior em pacientes com cavidade oral pequena.

Área de digitalização mais ampla

Janela de digitalização ampliada captura grandes áreas de uma vez, mantendo o tamanho compacto da ponteira do scanner.

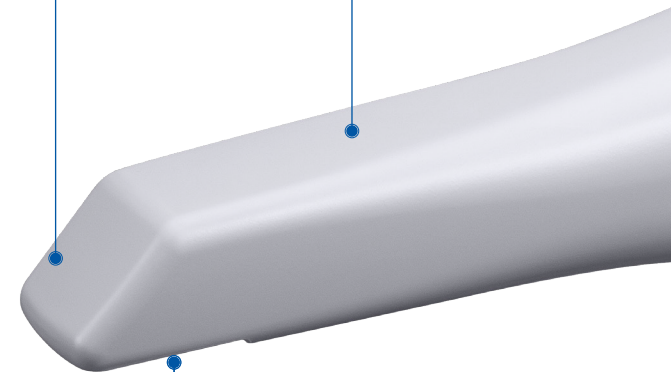

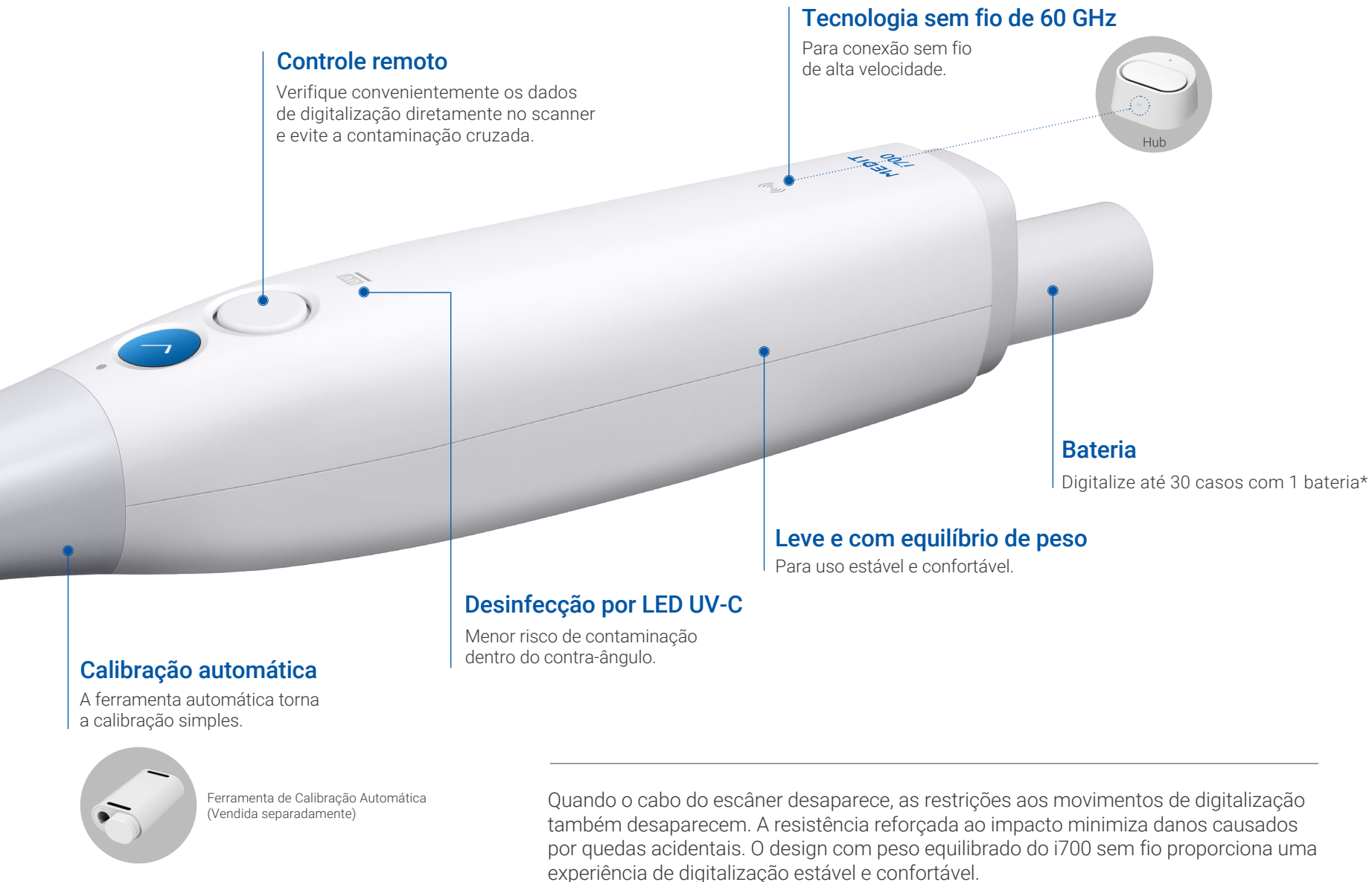


Controle remoto

Verifique convenientemente os dados de digitalização diretamente no scanner e evite a contaminação cruzada.

Tecnologia sem fio de 60 GHz

Para conexão sem fio de alta velocidade.

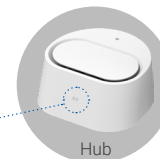

Bateria

Digitalize até 30 casos com 1 bateria*

Leve e com equilíbrio de peso

Para uso estável e confortável.

Desinfecção por LED UV-C

Menor risco de contaminação dentro do contra-ângulo.

Calibração automática

A ferramenta automática torna a calibração simples.



Ferramenta de Calibração Automática
(Vendida separadamente)


Quando o cabo do escâner desaparece, as restrições aos movimentos de digitalização também desaparecem. A resistência reforçada ao impacto minimiza danos causados por quedas acidentais. O design com peso equilibrado do i700 sem fio proporciona uma experiência de digitalização estável e confortável.

*O desempenho pode variar de acordo com as condições de uso.




**A Melhor
Vida Útil
de Bateria
de Todos
os Tempos**

1 hora de digitalização contínua, **até 8 horas** em modo de espera.

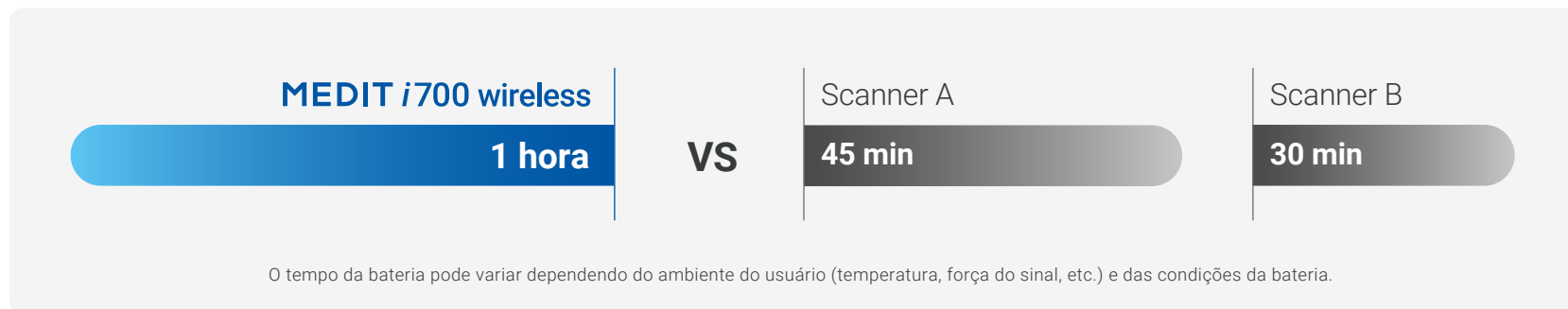

Escaneamento o dia todo com **uma única bateria**.
Escaneie o dia todo sem se preocupar em carregar.

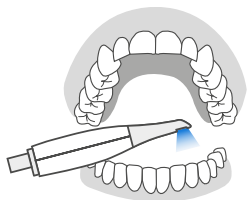


Maxilar + Mandibular + Oclusão

Tempo total de escaneamento de **2 minutos***




Escaneie até **30 casos** com 1 bateria.

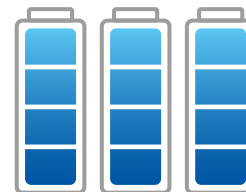

Até **90 casos** utilizando 3 baterias inclusas.



A função de gerenciamento inteligente de energia muda automaticamente o dispositivo para o modo de suspensão quando não está em uso, com até 8 horas em standby. Leva apenas segundos para ativar o dispositivo para escaneamento.

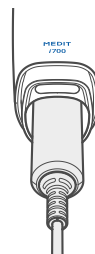

Conexão de energia com fio:

Após utilizar todas as 3 baterias inclusas, basta conectar o cabo de energia e continuar usando o dispositivo.

*O desempenho pode variar de acordo com as condições de uso.

Escaneamento Mágico, Mais Fácil do Que Nunca




Experimente a incrível odontologia digital com o **Medit Scan para Clínicas.**

Nossa tecnologia de software de ponta torna o escaneamento mais conveniente para você.


Para assistência no escaneamento

Guia de Escaneamento Inteligente

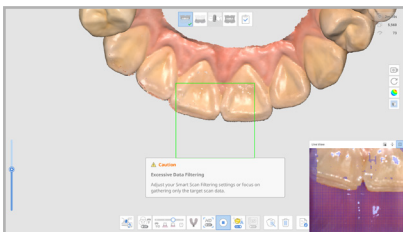


A orientação aprimorada ao usuário fornece ajuda para anomalias detectadas durante o escaneamento.

Filtragem Inteligente de Escaneamento

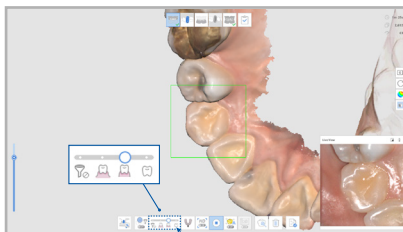


O desempenho aprimorado da filtragem com IA facilita o processo de escaneamento ao filtrar tecidos moles, como lábios, bochechas e língua.

Filtragem Inteligente de Cor

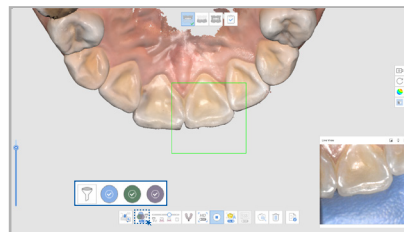

Filtra automaticamente as cores registradas, como a cor das luvas médicas, durante o escaneamento.


Costura Inteligente

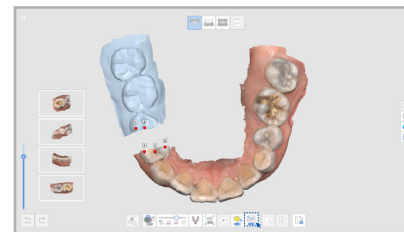

Escaneie com sua própria estratégia de escaneamento. Os dados de escaneamento fragmentados são alinhados com a área comum detectada automaticamente.


Para dados de escaneamento mais precisos e exatos

Guia de Cor Inteligente

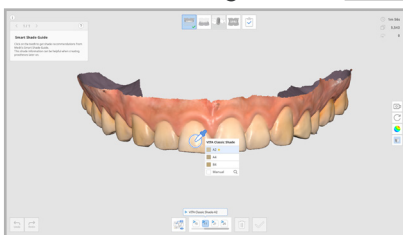


Distinção automática e sugestão da melhor cor correspondente a partir dos dados de escaneamento.

Correspondência de Corpo com A.I. de Escaneamento

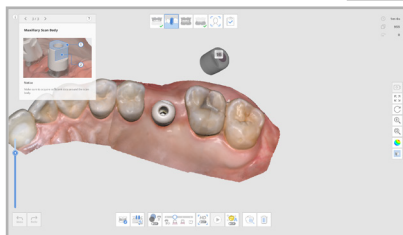


Garante dados de corpo de escaneamento precisos em áreas de difícil escaneamento, como a região posterior.

Correspondência de Pilares com A.I.

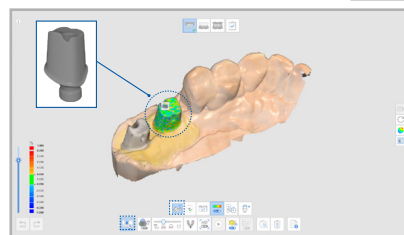

Garante dados precisos de margem em situações de difícil escaneamento.

Modo HD

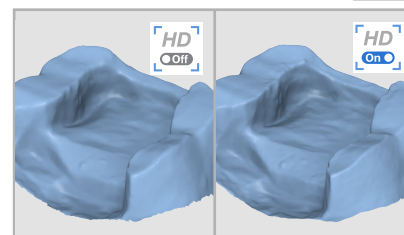

Obtenha uma imagem de escaneamento mais nítida na área da margem com o Modo HD aprimorado.

Medit Link

Inicie o **gerenciamento de dados da sua clínica** com o **Medit Link**.



Você pode criar e gerenciar dados de escaneamento correspondentes às informações do paciente no programa de prontuário eletrônico e vinculá-los a soluções de tratamento de vários fluxos de trabalho. Os diversos aplicativos da Medit Link App Box ajudam a fornecer uma consulta de alto padrão que é mais fácil de entender para os pacientes.

O armazenamento em nuvem do Medit Link criptografa e armazena os dados para proteção confiável contra ataques de vírus e ransomware. Também permite o compartilhamento de dados e a comunicação em tempo real entre dentistas, pacientes e técnicos de laboratório a qualquer momento e em qualquer lugar, em um PC, tablet ou qualquer dispositivo móvel com conexão à internet.

Odontologia Digital com **Medit Link** e **Medit Apps**

———— Digitalize seu tratamento com o Medit Link ————



Use seus dados de escaneamento para muito mais

Os dados de escaneamento criados com o Medit i700 sem fio podem ser vinculados ao fluxo de trabalho de vários fornecedores de soluções por meio do Medit Link. Os dados também podem ser usados com qualquer software que consiga abrir formatos 3D padrão, como STL, PLY e OBJ. E a ampla utilização do nosso sistema aberto está se expandindo à medida que falamos.

O que você pode fazer no Medit Link:

Alinhadores claros | Coroas e pontes | Restaurações suportadas por implantes | Dentaduras totais e parciais | Ortodontia | Guias cirúrgicos para implantes
Dispositivos para apneia do sono | Modelos dentários | Impressão 3D...



Medit Apps

O Medit Apps introduz rapidamente fluxos de trabalho digitais usando dados de escaneamento e ajuda a utilizá-los em uma variedade de casos. Você pode analisar dados, criar restaurações e modelos, e se comunicar com seus pacientes da maneira mais simples. Com o Medit Apps, muito mais pode ser feito diretamente na cadeira, como projetar splints, temporários, pontes e muito mais! E, a propósito, você não precisa ter um scanner Medit ou pagar uma taxa anual alta para fazer parte do Ecossistema Medit. Sinta-se livre para aproveitar a odontologia digital com o Medit Apps.

→ [Veja a próxima página para o Ecossistema Medit](#)

Medit Apps



Design de Sorriso



Simulação Ortodôntica



Analisador de Oclusão



Ajuste de Coroa



Design



Construtor de Modelos



Temporários



Conversor DCM






Assistente de Calibração

Gerenciamento de Consultório & Imagem



CAD Dentário & Design de Sorriso

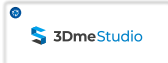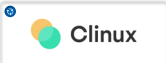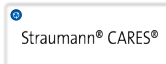

Apneia do Sono




OrthoApnea


MEDIT Link
Ecosystema Medit

 Integração


Impressoras 3D

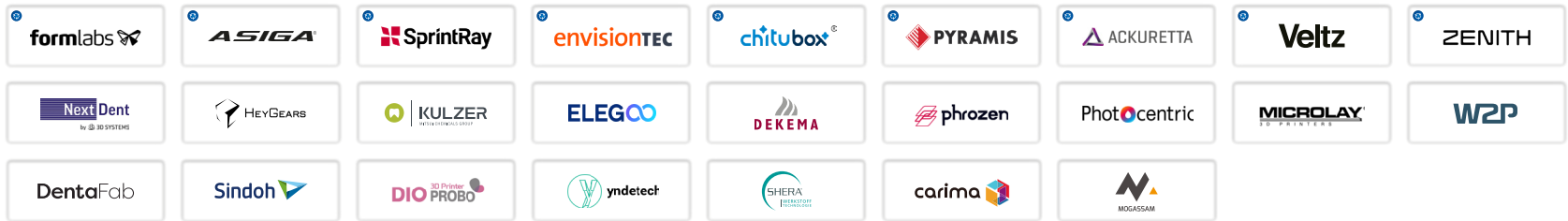

Alinhadores Transparentes

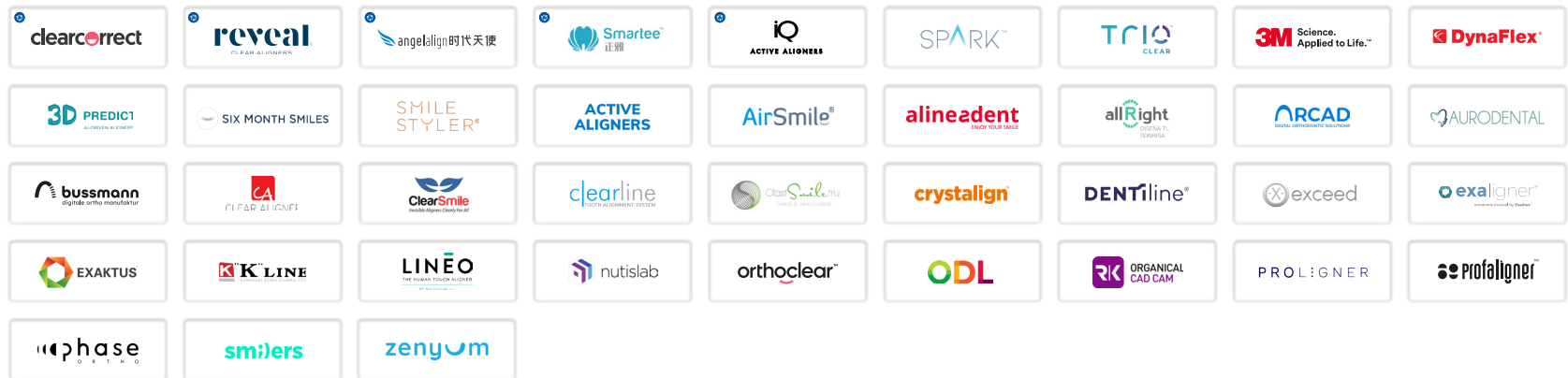

Outros

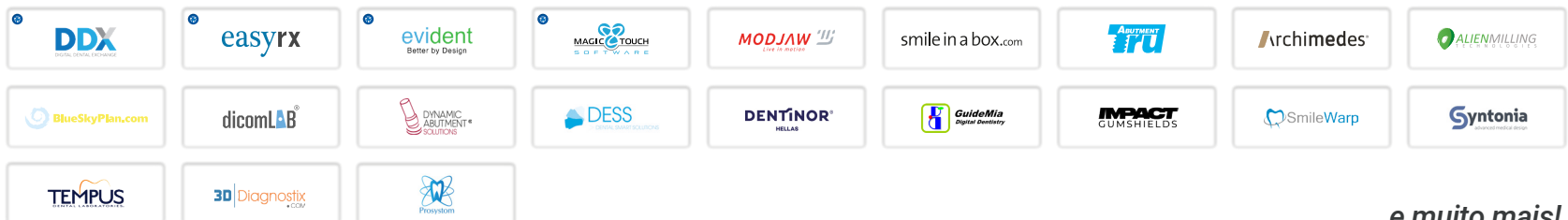

...e muito mais!

Especificações

Categoria		Medit i700 wireless
Tecnologia de Escaneamento	Estrutura de Escaneamento	Até 70 FPS
	Tecnologia de Imagem	Tecnologia de vídeo 3D em movimento Captura de streaming em 3D full color
	Fonte de LED	LED
	Tecnologia Anti-Embaçamento	Anti-embaçamento adaptativo
Precisão	Arco Completo	10,9µm ± 0,98
Peça de Mão	Dimensões	313 x 44 x 47,4 mm
	Peso Total	328 g (Inclui bateria e ponteira)
Ponteira	Tamanho da janela de escaneamento	22,5 x 17,1 mm
	Área de Escaneamento	15 x 13 mm
	Autoclavável	Autoclave 150 vezes 121°C 30 min (Tipo Gravitacional) 134°C 4 min (Tipo Pré-Vácuo) 135°C 10 min (Tipo Gravitacional)
	Ponteira Reversível	Sim
Modo Especial	Modo de Controle Remoto	Sim
	Desinfecção UV-C	Sim
Conectividade		Sem fio USB 3.1 Gen1 (Hub Sem Fio)



Por favor, escaneie o código QR para os [requisitos de sistema](#) atualizados >>

Sobre nós

A Medit é especializada em soluções de medição 3D e CAD/CAM para clínicas e laboratórios dentários, incluindo scanners intraorais, baseados em sua própria tecnologia de ponta patenteada. Também desenvolvemos soluções de plataforma para odontologia digital, apoiando fluxos de trabalho colaborativos. Além disso, a linha Solutionix oferece scanners 3D e software para o mercado industrial. Nosso objetivo é fornecer tecnologia inovadora e produtos da mais alta qualidade para garantir o crescimento mútuo de todos os parceiros.

Nossa Comunidade Medit



Grupo de
Usuários



Medit
Academy



Central
de Ajuda

Feedback contínuo, sugestões de novos fluxos de trabalho de tratamento e discussões ativas. De debates acalorados a conversas divertidas, a comunidade Medit está sempre animada com nossos clientes apaixonados.

Colegas de todo o mundo apoiam e ajudam uns aos outros ativamente, e dão as boas-vindas sinceras aos novos colegas na odontologia digital.

Escaneie o código QR para participar!

A Medit e sua comunidade de colegas apoiam e desejam boa sorte em sua nova jornada na odontologia digital.





S.I.N. IMPLANT SYSTEM LTDA
CNPJ: 04.298.106/0001-74
Rua Soldado Ocimar Guimarães da Silva, 421
V. Rio Branco - 03348-060 - São Paulo/SP - Brasil



Telefone | 0800 770 8290
Whatsapp | 11 95083-8179
E-mail | sac@sinimplantsystem.com

SER
D
I
G
I
T
A
L
I
S
M
E