




Epikut

A nova definição do épico

 S.I.N.

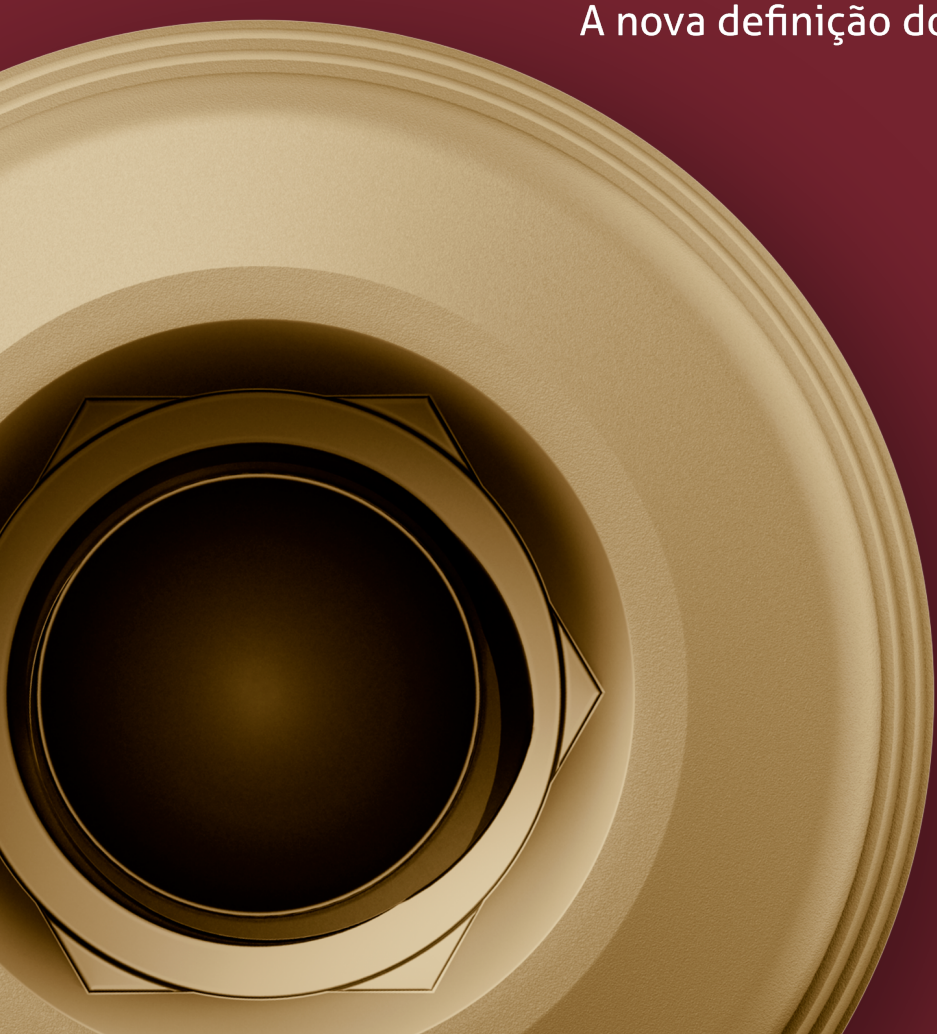


Epikut

NOVA DEFINIÇÃO DO ÉPICO

Recriámos o conceito do épico com o EPIKUT.

Com um design cortante, compressivo e roscas duplas de apoio invertido, esta linha proporciona mais praticidade clínica, previsibilidade e alta estabilidade primária para quem procura resultados superiores.

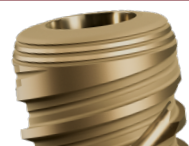

› Exclusiva superfície HAnano Plus

Desenvolvida nas principais universidades da Suécia, a nanosuperfície acelera a OSTEOintegração e promove uma qualidade óssea superior, comprovada por mais de 50 estudos pré-clínicos.



› Ápice

Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.




› Microrroscas cervicais exclusivas

Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.



› Um implante e diversas possibilidades

Conexão Cone/Morse 11,5° e Hexágono Externo que facilitam o seu dia a dia clínico.

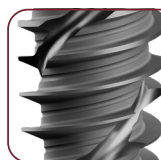

› Roscas duplas de apoio invertido

Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.

› Duplo ataque ácido

Em toda a superfície para o Cone Morse e até à região cervical nos implantes HE.



Epikut^S

O PODER DE SER ÉPICO

Idealizado para potencializar a prática clínica, o Epikut S foi desenvolvido para unir a tecnologia e características da macrogeometria híbrida exclusiva, design de roscas cortantes já conhecidos na linha Epikut e agora com conexão Cone Morse 16°. Além disso, estas linhas de implantes dentários proporcionam previsibilidade, alta performance, desempenho elevado e resultados superiores. Características para quem deseja ser épico no dia a dia!



› Roscas duplas de apoio invertido

Garantem uma maior estabilidade primária e torque de inserção.

› Mais opções em portfólio

Conexão Cone Morse 16° para facilitar o dia a dia clínico




› Microrroscas cervicais exclusivas

Maior área de contato ósseo e melhora a dissipação das forças oclusais.



› Ápice


Estabilidade e apoio para casos com baixa densidade óssea.

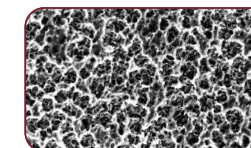


› Cicatrização óssea acelerada

A alta hidrofília, que é gerada por uma camada ultrafina e homogênea de hidroxiapatita, amplia a actividade das proteínas envolvidas no processo de OSTEOintegração.


CONE MORSE 11,5°

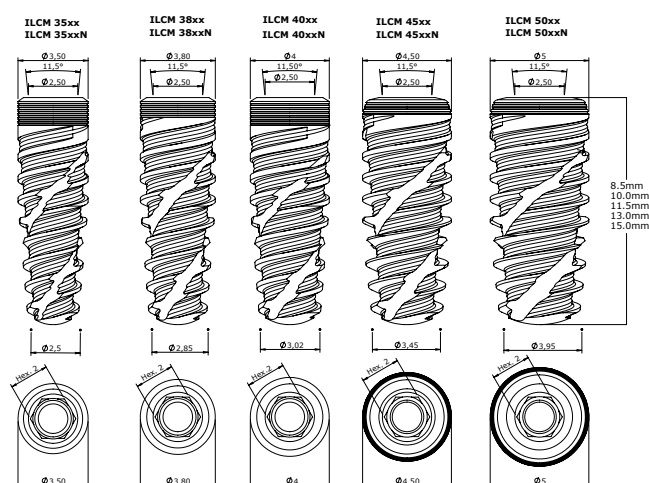

HEXÁGONO EXTERNO

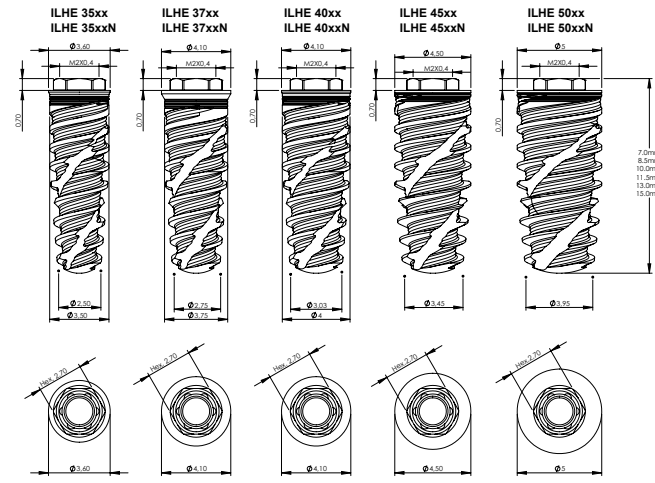

CONE MORSE 16°

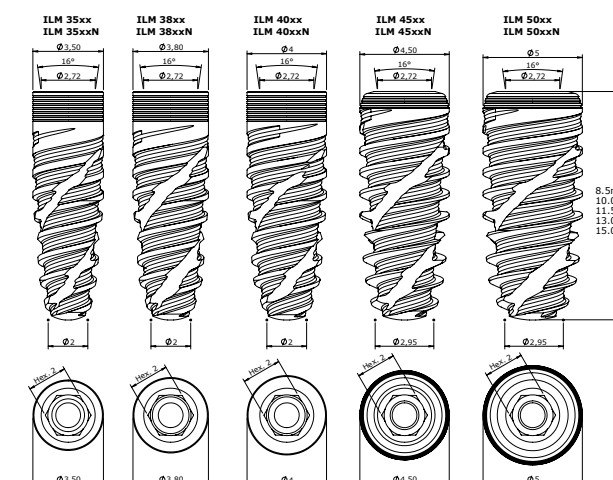

KIT CIRÚRGICO EPIKUT

MÁXIMA FUNCIONALIDADE E SIMPLICIDADE
PARA SUAS CIRURGIAS

Fresa lança com helicoidal otimizando passos cirúrgicos.

Sequência linear e intuitiva.

Fresas com revestimento DLC:
Menor aquecimento ósseo;
Maior na durabilidade;
Alto poder de corte;
Ângulo mais afiado.

Sequência de fresagem exclusiva para cada densidade óssea, o que aumenta a versatilidade clínica.

Indicador de direção com marcação milimétrica preciso para cada diâmetro.

Único Kit para plataforma CM e HE.

Design de bandeja mais leve e compacta.

Torquímetro de Haste:
Aferição mais precisa do torque.

KIT SAFE DRILL EPIKUT

TORNANDO SUAS CIRURGIAS MAIS PRÁTICAS E PRECISAS

*O Kit Safe Drill Epikut não é compatível com o Kit Cirúrgico Epikut Long.

Desempenho e eficiência:
exclusivos limitadores em poliacetal com perfeito encaixe e alta resistência, o que garante maior durabilidade do kit.


Limitadores de perfuração óssea disponíveis para cada diâmetro de fresas.

O Kit Safe Drill Epikut é compatível somente com o Kit Cirúrgico Epikut.

Previne lesões de estruturas nobres como nervos, seio maxilar e cavidade nasal.

Fácil de usar: sistema de codificação por cores, o que facilita no uso clínico.

Bandeja removível para facilitar a limpeza.

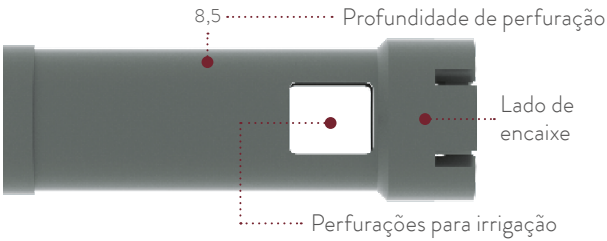

Para que a instalação do Cone Morse ocorra conforme recomendação (infraóssea) é necessária a utilização de um limitador com 1,5 mm superior à profundidade desejada.

CÓDIGO DO PRODUTO: KCSE 02
CÓDIGO CAIXA ORGANIZADORA: COSE 02

CÓDIGO PRODUTO: KESD 02
CÓDIGO DA CAIXA ORGANIZADORA: COESD 02



Conheça o Implantat, o streaming educacional da S.I.N.



implantat.com.br

+351 214 120 336 (PT)
www.sinimplantsystem.pt

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sinimplantsystem](https://www.instagram.com/sinimplantsystem)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)