



Strong sw



S.I.N.
Implant System

Strong SW

SOLUÇÕES QUE LHE TRAZEM UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES

O Strong SW apresenta um conjunto inseparável de experiências para quem busca resultados de excelência.

Com uma excepcional praticidade clínica, o Strong SW tem uma linha completa de implantes.



▶ Ápice:

Apoio e estabilidade para casos de baixa densidade óssea.



▶ **Microrroscas cervicais exclusivas:**
Aumentam a área de contacto ósseo e melhoram a dissipação das forças oclusais.



▶ Precisão de adaptação:

Com componentes protéticos exclusivos e alta resistência.


▶ Fabricado em Titânio Grau 4 Comercialmente Puro (Ticp):

Metal muito leve, muito resistente à corrosão, desgaste e à fratura.



▶ Macrogeometria híbrida, corpo cilíndrico e ápice cônico:

União entre implantes cônicos e cilíndricos, indicado para todas as densidades ósseas. Contacto completo entre implante e osso.

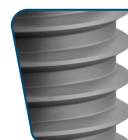


▶ Rosca Trapezoidal:

Profundidade e geometria das roscas oferecem alta estabilidade primária e maior velocidade de inserção.

▶ Ultrarroscaveável:

Perfil de roscas mais cortantes que facilitam a instalação do implante.

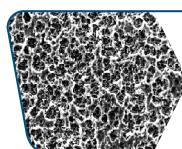



▶ Tratamento em toda superfície:

Duplo ataque ácido em toda superfície para o Cone Morse, e até à região cervical no HE e HI.




▶ Mais opções de componentes protéticos para Cone Morse:

Angulação interna do Cone Morse disponível em 16° e 11,5° (exceto Strong SW Plus).

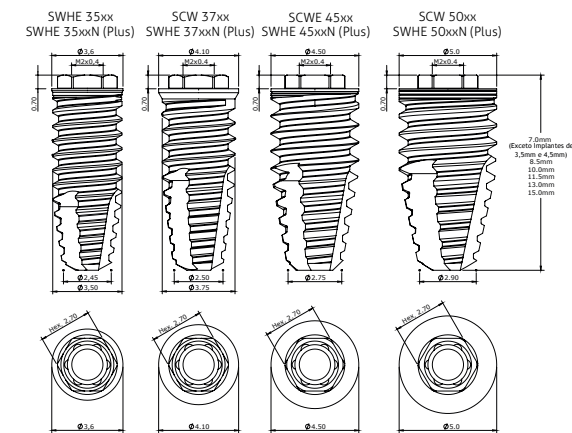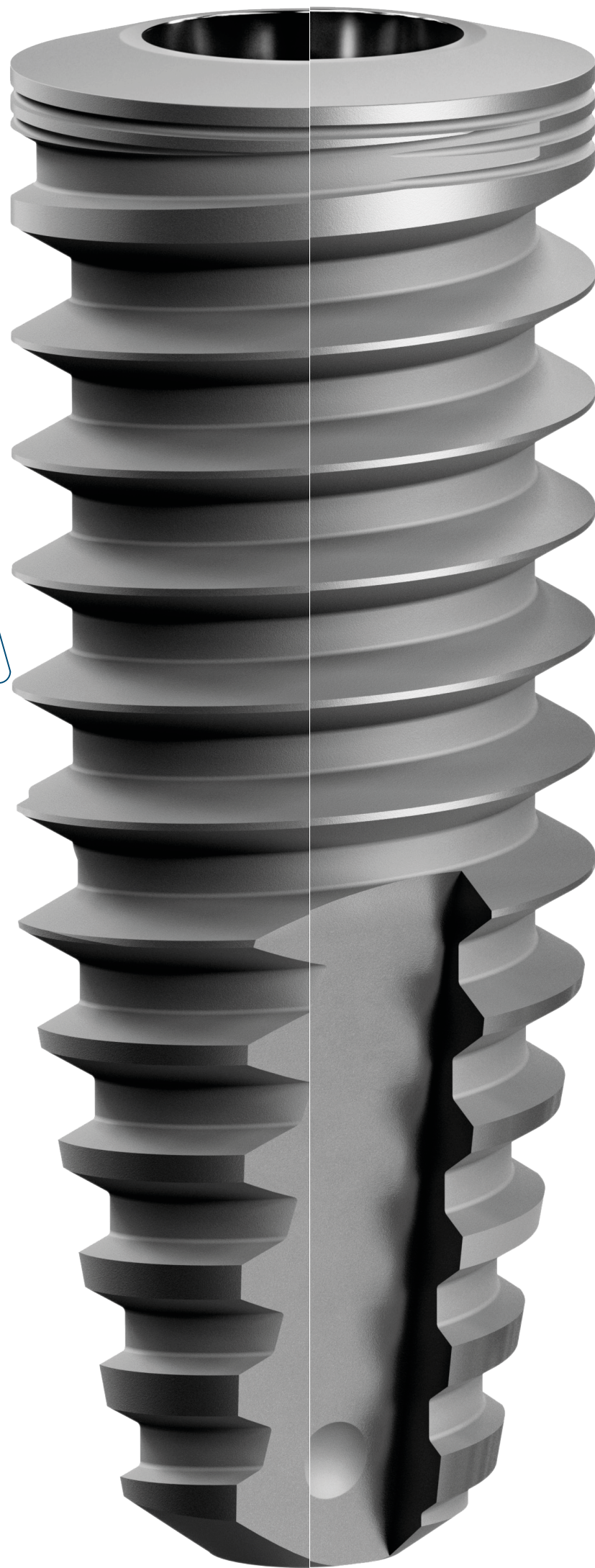


HEXÁGONO EXTERNO


- ▶ Torque interno / Sem montador.
- ▶ Conexão Hexalobular,
- ▶ Chave não trava,
- ▶ Suporta maior torque,
- ▶ Não deforma a conexão.

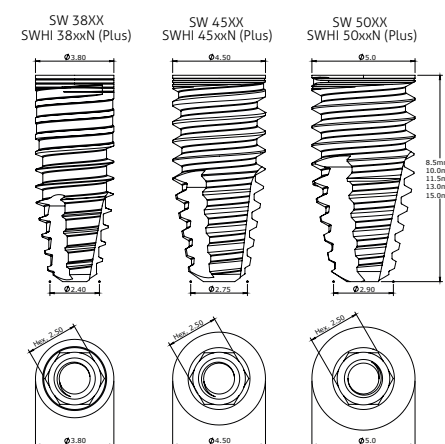

HEXÁGONO INTERNO

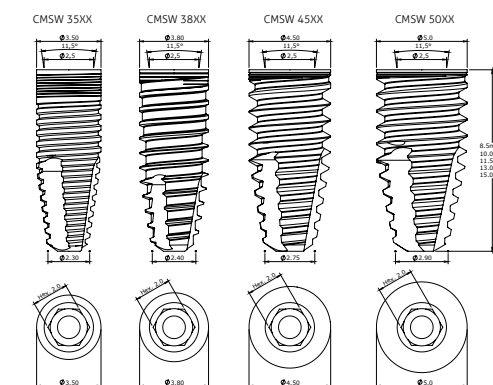

CONE MORSE 11,5°

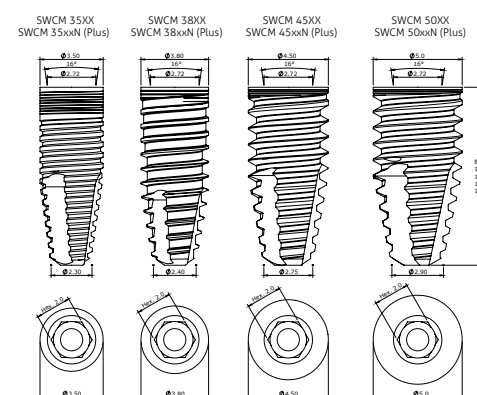

CONE MORSE 16°


Strong SW PLUS

- › Possibilita a instalação em qualquer tipo de osso, mesmo após a exodontia.
- › Reabilitação com carga imediata ou tardia.
- › Reabilitações unitárias e/ou múltiplas.
- › Instalação com um único kit e mesma sequência de fresagem.
- › 3 opções de conexão protética.




HEXÁGONO EXTERNO


- › Torque interno / Sem montador.
- › Conexão Hexalobular,
- › Chave não trava,
- › Suporta maior torque,
- › Não deforma a conexão.

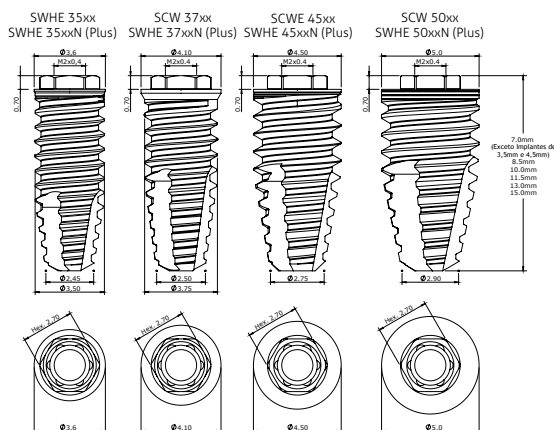

HEXÁGONO INTERNO

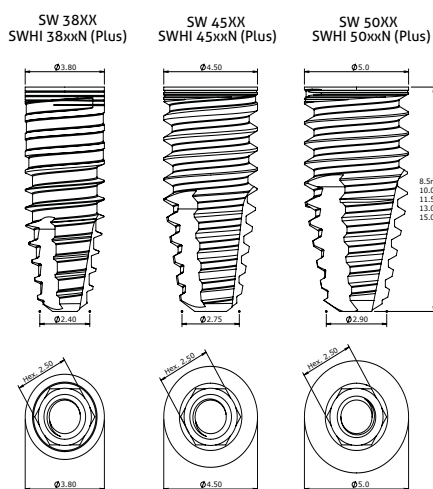

CONE MORSE 16°

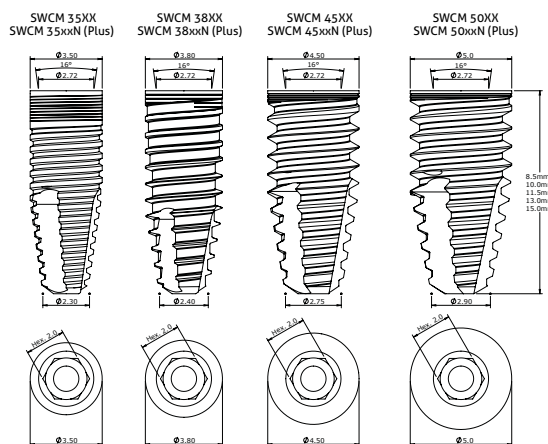

A VERSATILIDADE DO STRONG SW AGORA COM SUPERFÍCIE PLUS

HA^{nano} Surface

CONHEÇA O GOLD STANDARD DE OSTEointegração, DESENVOLVIDA NAS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DA SUÉCIA.

+Fino

Camada nanométrica de cristais de hidroxiapatita.

+Forte

Melhor crescimento ósseo precoce e força de ancoragem do implante.


+Rápido

Superfície hidrofílica que acelera as funções dos osteoblastos, construindo assim mais osso em menos tempo.

Saiba mais sobre a superfície HAnano® no nosso QRCode.



Microscopia Eletrônica de Varredura demonstrando célula osteoblástica sobre superfície HAnano. Cortesia: Cavalcante JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ.

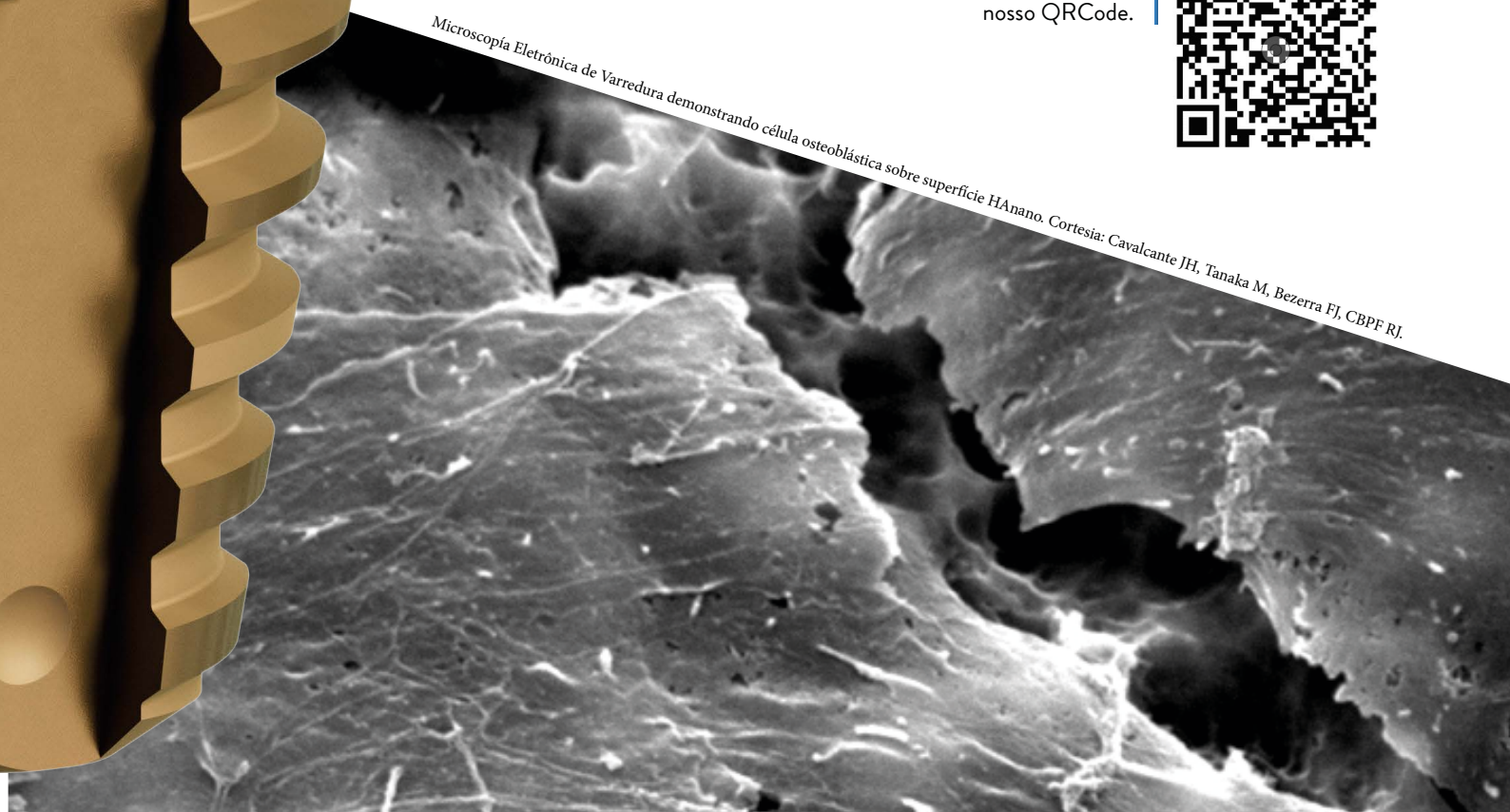

KIT SAFE DRILL STRONG SW

PRECISÃO, SEGURANÇA E MENOR TEMPO DE CIRURGIA

Fácil de usar: sistema de codificação por cores, o que facilita no uso clínico.

O Kit Safe Drill é compatível apenas com o Kit Cirúrgico Strong SW.



Precisão e segurança: perfuração segura até a profundidade desejada, eliminando o controle visual e pausas para a verificação da osteotomia.

Desempenho e eficiência: exclusivos limitadores em poliacetal com perfeito encaixe e alta resistência, o que garante maior durabilidade do kit.

CÓDIGO: KWS02

Veja o vídeo demonstrativo de como utilizar o Kit Safe Drill.



Para que a instalação do Cone Morse ocorra conforme recomendação (infraóssea) é necessária a utilização de um limitador com 1,5 mm superior à profundidade desejada.

KIT CIRÚRGICO STRONG SW

UM ÚNICO KIT, DIVERSAS POSSIBILIDADES

Apenas 7 fresas:

- Protocolo de fresagem simplificado e eficiente.
- Sequência de codificação por cores.


Alto padrão de acabamento e precisão dos instrumentais.

Fresas com DLC (Diamond Like Carbon): maior poder de corte e menor temperatura.

Fresas com indicação de profundidade.

Acompanha chave manual.

Torquímetro de haste (com medidor de torque).

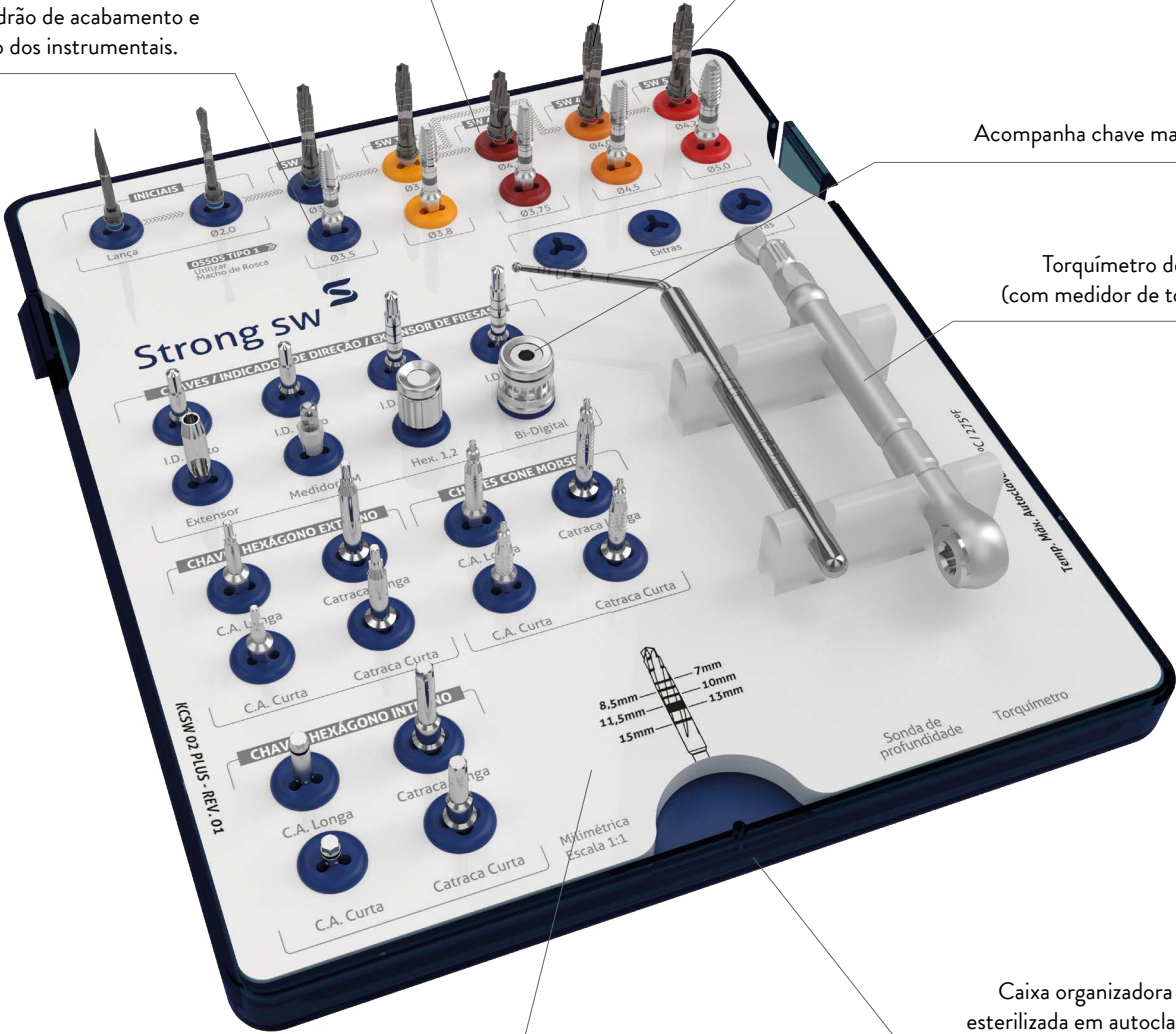

Um único kit para toda linha Strong SW. Possibilidade de instalação de implantes CM, HE e HI com o mesmo kit.

Caixa organizadora que pode ser esterilizada em autoclaves menores. Design de bandejas mais leve e compacto.

CÓDIGO: KCSW 02

A INSTALAÇÃO DOS IMPLANTES DA LINHA STRONG SW DEVE SER FEITA EXCLUSIVAMENTE COM O KIT CIRÚRGICO STRONG SW.



Conheça o Implantat, o habitat educacional da S.I.N. Implant System

 implantat.com.br

0800 770 8290 (BR) | +351 214 120 336 (PT)

www.sinimplantsystem.com

Visite as nossas Redes Sociais

 fb.com/sinimplantsystem

 [@sinimplantsystem](https://www.instagram.com/@sinimplantsystem)

 [/sinimplante](https://www.linkedin.com/company/sinimplante)

 [S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)

 [sin_implant](https://twitter.com/sin_implant)