

Zygomatic² PLUS



+351 21 412-0336 (PT)

www.sinimplantsystem.com.pt

Visite nossas Redes Sociais:



[/sinimplantsystem](https://www.facebook.com/sinimplantsystem)



[@sin.portugal](https://www.instagram.com/sin.portugal)



[/sinimplantsystem](https://www.linkedin.com/company/sinimplantsystem)



[@singlobal](https://www.youtube.com/channel/UCsinglobal)



Zygomatic²

PLUS

- **ROSCAS AGRESSIVAS E COMPRESSIVAS**

Desempenho único e travamento mais rápido do implante.

- **CONEXÃO CONE MORSE 16°**

Design otimizado para alcançar alta estabilidade primária em ossos de tipo I, II, III e IV, além de alta resistência mecânica.

- **EXTREMIDADE APICAL LISA**

Melhor adaptação e proteção de tecidos moles e resultados superiores para casos de reabsorção maxilar severa.

- **FABRICADO EM TITÂNIO GRAU IV COLD WORKED**

Metal muito leve e muito resistente à corrosão, ao desgaste e à fratura, com os tratamentos de superfície de Duplo Ataque Ácido (DAA).

- **EXCLUSIVA SUPERFÍCIE HANANO PLUS**

Altamente hidrofílica, a Superfície Plus favorece o processo de osteogênese, estimula o crescimento e cicatrização precoce do tecido ósseo e aumenta a força e a ancoragem do implante.



IDEAL PARA CARGA IMEDIATA



Resultados imediatos e tempo de tratamento mais curto

O implante Zygomatic oferece uma solução imediata ao doente, como alternativa aos procedimentos de enxerto ósseo. Proporciona estabilidade, previsibilidade e precisão no tratamento, atendendo às expectativas dos profissionais devido ao seu design versátil e opções adaptadas às características anatômicas e relações de tecidos.



COMPONENTES PROTÉTICOS

O Mini Abutment Cônico com angulações de 17°, 30°, 45° e alturas de 2,0 mm a 3,0 mm feito de liga de titânio e cor dourada anodizada. Torque de travamento de 20Ncm.

Os protetores são aparafusados sobre o mini pilar com torque manual padrão e devem permanecer na posição até à confecção da prótese provisória ou definitiva.


CÓDIGOS DOS IMPLANTES ZYGOMATIC			
CÓDIGO	DIÂMETRO DA ROSCA (mm)	DIÂMETRO DA PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
ILMZ 4030N	Ø4,0	Ø4,0	30
ILMZ 4032N	Ø4,0	Ø4,0	32,5
ILMZ 4035N	Ø4,0	Ø4,0	35
ILMZ 4037N	Ø4,0	Ø4,0	37,5
ILMZ 4040N	Ø4,0	Ø4,0	40
ILMZ 4042N	Ø4,0	Ø4,0	42,5
ILMZ 4045N	Ø4,0	Ø4,0	45
ILMZ 4047N	Ø4,0	Ø4,0	47,5
ILMZ 4050N	Ø4,0	Ø4,0	50
ILMZ 4052N	Ø4,0	Ø4,0	52,5
ILMZ 4055N	Ø4,0	Ø4,0	55
ILMZ 4057N	Ø4,0	Ø4,0	57,5
ILMZ 4060N	Ø4,0	Ø4,0	60



KIT CIRÚRGICO ZYGOMATIC

Conquiste resultados superiores com alto desempenho através de um protocolo cirúrgico projetado para superar os desafios dos procedimentos clínicos.

Sonda de profundidade para facilitar a perfuração correta do local do implante.

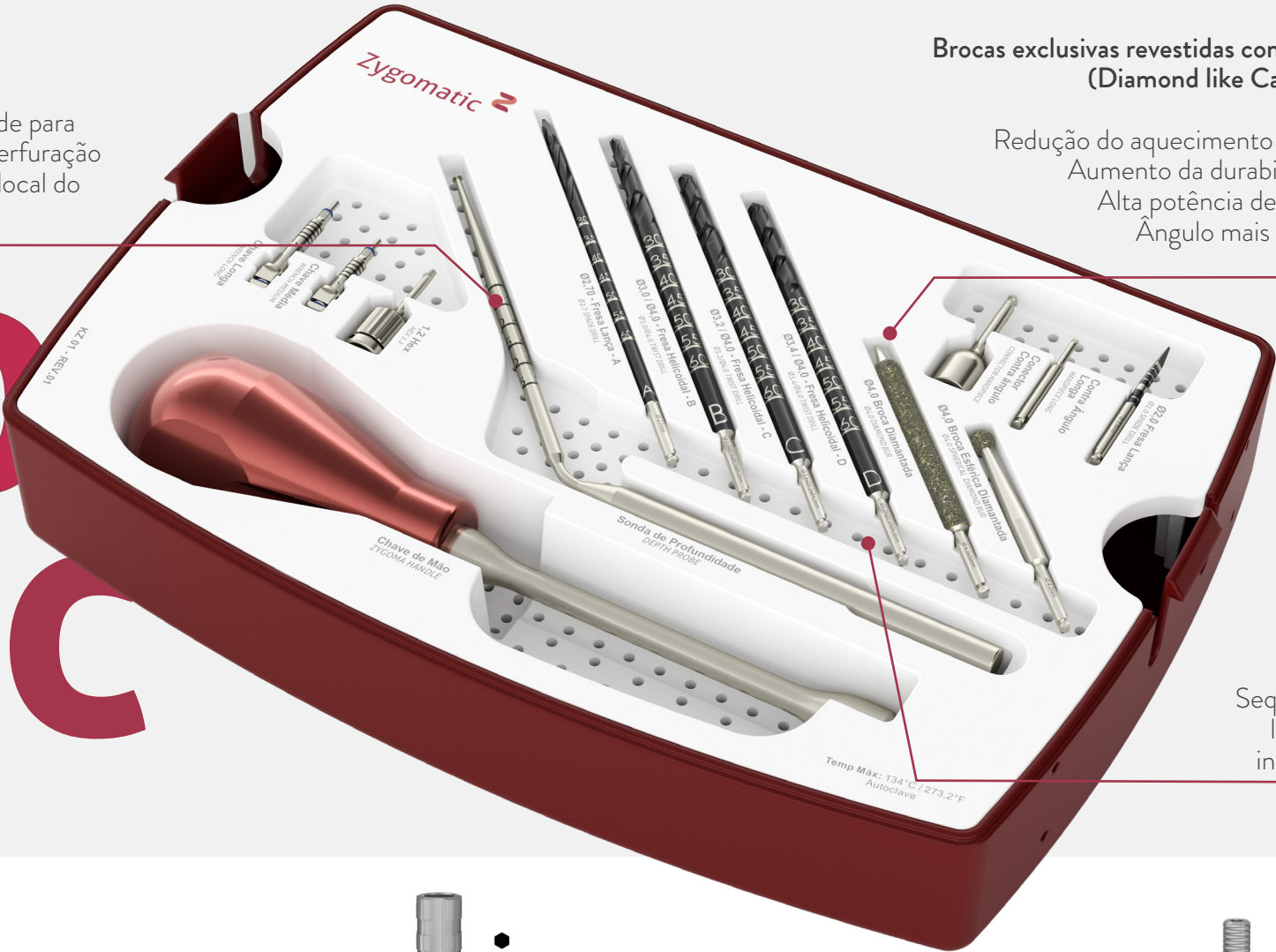

Brocas exclusivas revestidas com DLC (Diamond like Carbon):

- Redução do aquecimento ósseo;
- Aumento da durabilidade;
- Alta potência de corte;
- Ângulo mais afiado.

Sequência linear e intuitiva.

2

MINI ABUTMENT ANGULADO
20 N.cm

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	ÂNG.
MAAM 4802I	4.8	2	17°
MAAM 4803I	4.8	3	17°
MAAM 4804I	4.8	4	17°

2

MINI ABUTMENT ANGULADO
20 N.cm

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	ÂNG.
MAAM 4832I	4.8	2	30°
MAAM 4833I	4.8	3	30°
MAAM 4834I	4.8	4	30°

2

MINI ABUTMENT ANGULADO
20 N.cm

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. (mm)	ÂNG.
MAAM 4842I	4.8	2,0	45° SLIM
MAAM 4843I	4.8	3,0	45° SLIM

1

PROTECTOR DE ABUTMENT
CÓDIGO
PMA 4855
5,0 mm

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA ABERTA
CÓDIGO
TMAM 4800

1

TRANSFERENTE DE MOLDEIRA FECHADA
CÓDIGO
TMFM 4800

1

ANÁLOGO
CÓDIGO
ANMA 4800

1

CILINDRO PROVISÓRIO DE TITÂNIO
10 N.cm

CÓDIGO	
PTM 4800-3	Para MA reto
PTMS 4800-3	Para MA reto - Adequado para soldagem a laser
PTM 4800-2	Para MA angulado

1

CILINDRO CALCINÁVEL E CR-CO
10 N.cm

CÓDIGO	
CPM 4800-3	Para MA reto
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto - Para MA reto
CPM 4800-2	Para MA angulado
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto - Para MA angulado

1

PROTECTOR DE POLIMENTO
CÓDIGO
PPM 01

1

PARAFUSO DE LABORATÓRIO
10 N.cm

CÓDIGO	DIÂM. (mm)
PL 1405 Curto	1.4
PTMA 13-1 Longo	1.4

1

PARAFUSO DE RETENÇÃO
10 N.cm

CÓDIGO	COMP. (mm)	
PRH 20	2	Para MA angulado
PRH 30	3	Para MA reto

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Curta (CTH 1220)

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Média (CTH 1224)

1

Chave Contra Ângulo Hex. 1.2mm Longa (CTH 1230)

2

Chave Catraca Hex. 1.2mm Curta (CDHC 20)

2

Chave Catraca Hex. 1.2mm Média (CDHC 24)

2

Chave Contra Ângulo P/ Abut. Média (CTA 1224)

2

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 20)

2

Chave Catraca P/ Abut. Média (CDAC 24)