

Strong SW & SW *PLUS*

IMPLANTAT



EDUCATION POWERED BY S.I.N.

Descubra **IMPLANTAT**, el habitat educativo de S.I.N.
Una plataforma de enseñanza online creada para que
más profesionales aceleren su carrera y éxito profesional.

¡Acceda
IMPLANTAT.GLOBAL
o apunte la cámara de su
teléfono al QR code y
comience ahora su jornada
de conocimiento!



S.I.N.



Evidencias Científicas

- › Investigación y desarrollo de productos con prestigiosos institutos y universidades como:

Aarhus University - Dinamarca

Chalmers University - Suecia

KU Lueven - Bélgica

Malmö University - Suecia

UNESP - Brasil

USP - Brasil

UFU - Brasil

SLmandic - Brasil

Excelencia en la producción

- › Equipos de alta calidad y tecnología de punta en la producción.
- › Producción anual de más de 5 millones de ítems.



Conozca nuestra fábrica de sonrisas.

Escanee el código QR con la cámara de su teléfono móvil y haga un recorrido de 360° por S.I.N.



S.I.N.

Presencia Global

- › Una de las mayores compañías de implantes en el mercado mundial.
- › Ampla presencia internacional.

Calidad Asegurada y Certificaciones

- › Riguroso control de procesos, desde la llegada de la materia prima hasta la entrega del producto final, comprobado mediante certificaciones nacionales e internacionales.

ISO
9001

ISO
13485

CE



FDA

ISO
14001

ISO
45001




Strong SW



DESCARGUE LA APP DE S.I.N. Y
VEA EN REALIDAD AUMENTADA

Apunte la cámara del celular hacia la imagen

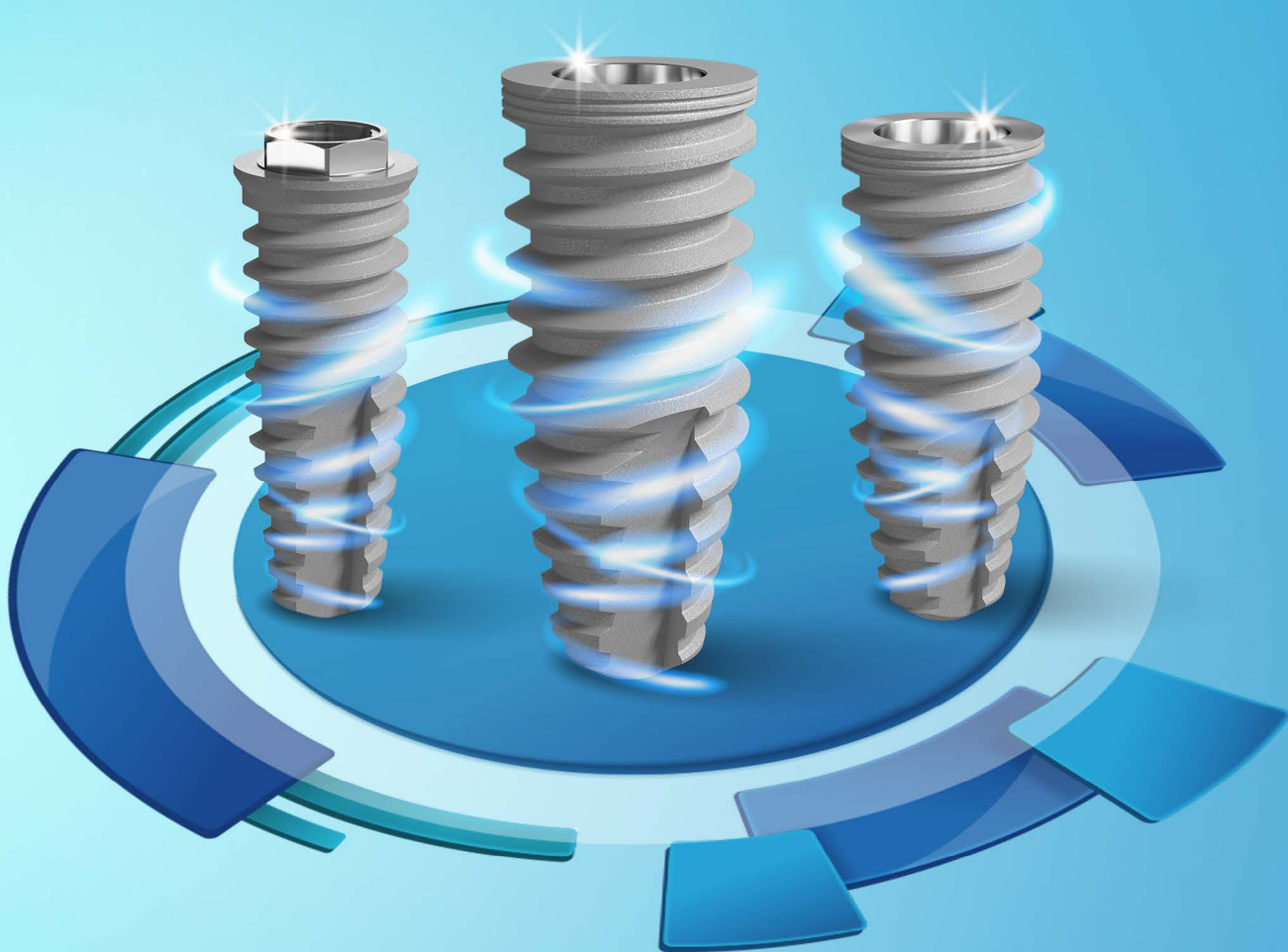


Strong SW


PLUS

La versatilidad de la línea Strong SW que ya conoce con la superficie HAnano® y la osteointegración acelerada.

Desarrollada en las principales universidades de Suecia, esta nano-superficie acelera considerablemente la osteointegración de calidad.

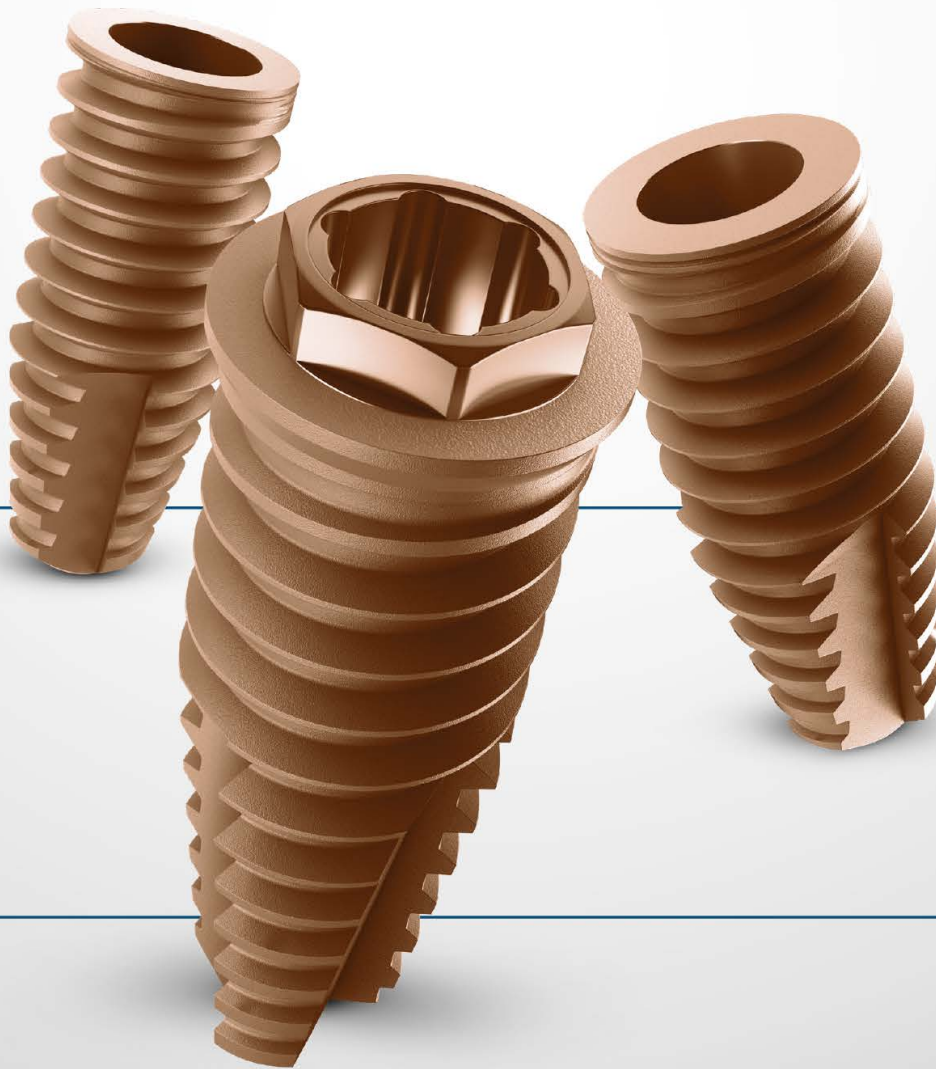


NANOTECNOLOGÍA A FAVOR DE LA VERSATILIDAD

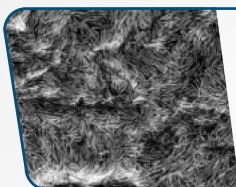

› Exclusiva superficie HAnano®

Desarrollada en Suecia, la superficie HAnano® ha sido evaluada por más de 50 estudios preclínicos y clínicos, que demuestran una osteointegración mucho más rápida, además de promover una calidad ósea superior.

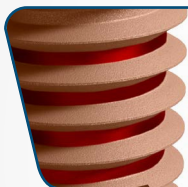

› Más hueso, más rápido.

Aumento de la hidrofilia generada por una capa finísima de hidroxiapatita, amplía la actividad de las proteínas que participan en el proceso de osteointegración.



› Un implante, varias posibilidades.

Las ventajas de la mejor nano-superficie del mundo en todas las conexiones (HE, HI y CM).



› Indicado para todo tipo de huesos.

La macrogeometría híbrida Strong SW Plus permite que el implante se instale en todas las densidades óseas, incluso después de la extracción.



› Practicidad clínica.

Un solo kit quirúrgico para la instalación de la línea completa Strong SW y Strong SW Plus.



› Éxito probado a través de una sólida investigación científica.

Con más de una década en el mercado, la línea Strong SW tiene aproximadamente más de 2.2 millones de implantes vendidos y aproximadamente 60 artículos científicos publicados en todo el mundo. Todo esto demuestra la calidad y superioridad de Strong SW.

HA^{nano} Surface

+ DELGADO + RÁPIDO + FUERTE

CONOZCA EL ESTÁNDAR DE ORO DE LA OSTEOINTEGRACIÓN

La hidroxiapatita (HA), principal mineral presente en la estructura ósea natural, forma un recubrimiento homogéneo y estable que actúa como catalizador de cicatrización que, en comparación con las superficies convencionales, acelera la Osteointegración.

A partir de 2005, la superficie Plus HANano® fue desarrollada por investigadores de las principales universidades de Gotemburgo (Suecia). Científicos de varios países probaron y aprobaron su eficacia. Los resultados se publicaron en decenas de artículos de revistas científicas de reconocimiento mundial.

El recubrimiento Plus HANano® está formado por nanocristales de hidroxiapatita, de tamaño y forma similares a los del hueso humano, sinterizados sobre el titanio microrrugoso en un espesor de 20 nanómetros, que promueven la modificación de la energía de superficie, lo que aumenta la hidrofilia y proporciona



sustrato, que estimulan una mayor proliferación de osteoblastos.

La presencia de la Plus HANano® en la superficie de los implantes S.I.N. Plus demostró una mejora de la respuesta de cicatrización en pruebas moleculares de transducción de señales, en que la concentración de las proteínas que participan en el proceso de cicatrización aumentó significativamente, lo que demuestra el efecto positivo de este recubrimiento en la interacción con las células preosteoblásticas.

De la misma manera, hubo un aumento en la concentración de importantes marcadores osteogénicos, como la fosfatasa alcalina y la osteocalcina, lo que señala claramente la aceleración del proceso de mineralización.

Entre los aspectos más destacados y de gran significado clínico está la calidad mecánica del hueso que se forma alrededor de esta superficie altamente hidrofílica, que es resultado del potencial iónico generado por el recubrimiento HANano®.

La siguiente imagen muestra superficie de SW Plus con un aumento de 5.000x / 10.000x / 100.000x, respectivamente. La superficie moderadamente arrugada de Ti con PLUS de una nanocapa de Hidroxiapatita.

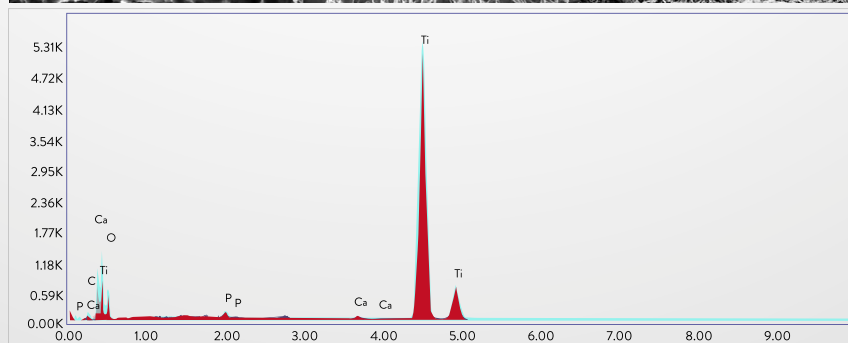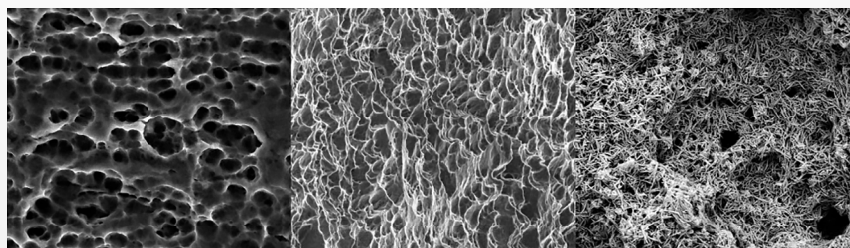

Element	Weight %	Atomic %	Net Int.	Error %	Kratio	Z	A	F
C K	2.38	6.12	17.55	14.07	0.0109	1.2237	0.3738	1.0000
O K	23.65	45.76	86.13	12.54	0.0225	1.1758	0.0809	1.0000
P K	0.62	0.62	27.83	21.11	0.0049	1.0352	0.7510	1.0095
Ca K	0.74	0.57	28.30	17.15	0.0080	1.0212	0.9855	1.0730
Ti K	72.61	46.92	2177.66	1.66	0.6760	0.9268	1.0034	1.0014

El gráfico y la tabla de arriba corresponden a un análisis de EDS en la superficie de SW PLUS, acercando la pureza y estabilidad de la superficie del implante.

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Los resultados positivos y negativos de Hanano® fueron evaluados y comprobados por innumerables estudios científicos en distintas universidades reconocidas e instituciones de investigación de todo el mundo. Vea algunos de ellos en el QRCode a continuación:

INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE NANOHIIDROXIAPATITA EN LA FORMACIÓN ÓSEA INICIAL.

Nano hydroxyapatite structures influence early bone formation.

Meirelles L, Arvidsson A, Andersson M, Kjellin P, Albrektsson T, Wennerberg A.

Journal of Biomedical Materials Research Part A Volume 87A, Issue 2, 2008, pp. 299-307

EL EFECTO DE LAS MODIFICACIONES QUÍMICAS Y NANOTOPOGRÁFICAS EN LAS FASES INICIALES DE LA OSTEOINTEGRACIÓN.

The effect of chemical and nanotopographical modifications on the early stages of osseointegration.

Meirelles L, Currie F, Jacobsson M, Albrektsson T, Wennerberg A.

The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants Volume 23, Issue 4, 2008, pp. 641-647

LOS IMPLANTES REVESTIDOS DE NANOHIIDROXIAPATITA MEJORAN LAS PROPIEDADES NANOMECAÑICAS DE LOS HUESOS.


Nano hydroxyapatite coated implants improve bone nanomechanical properties.

Jimbo R, Coelho PG, Bryington M, Baldassarri M, Tovar N, Currie F, Hayashi M, Janal MN, Andersson M, Ono D, Vandeweghe S, Wennerberg

A.J Dent Res. 2012;91(12):1172-7




Microscopia Electrónica de Barrido que muestra una célula osteoblástica sobre la superficie HAnano®. Cortesía: Cavalcanti JH, Tanaka M, Bezerra FJ, CBPF RJ.

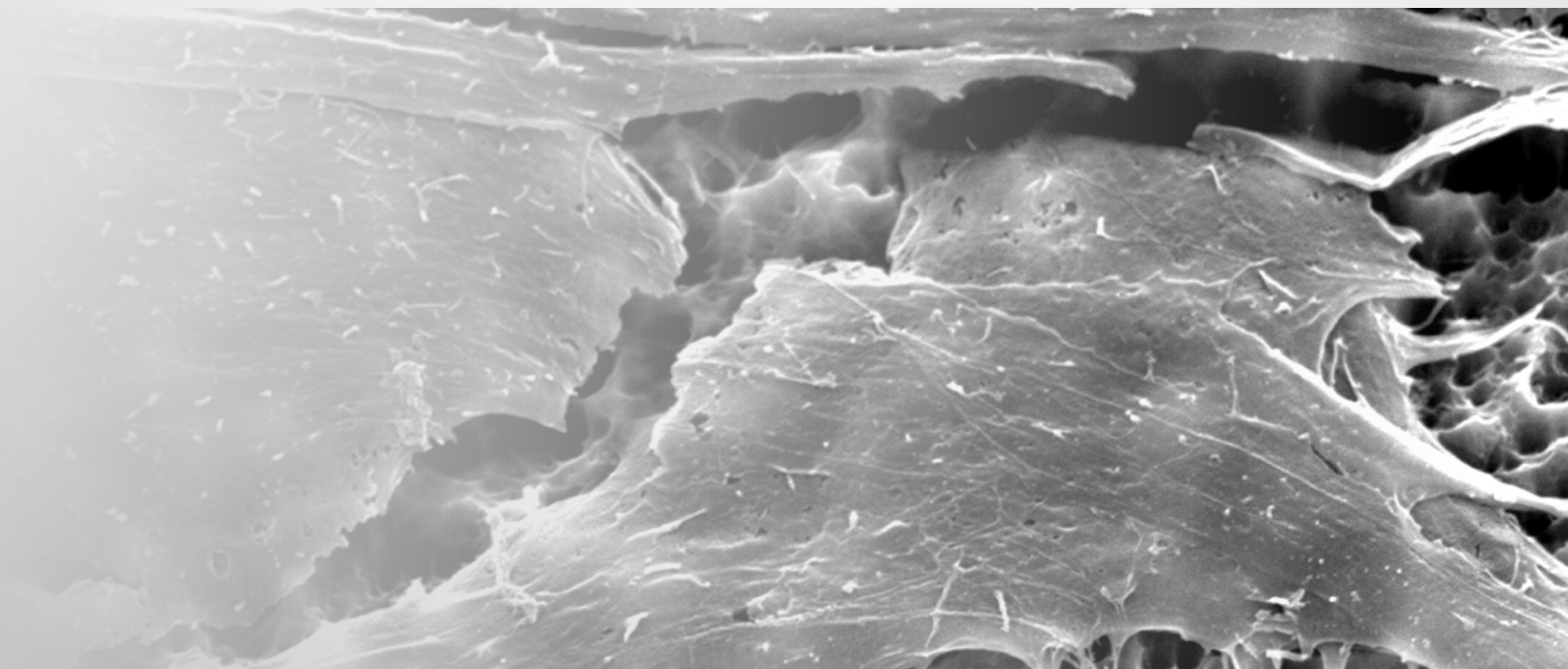

Strong SW

La línea de implantes Strong SW presenta un conjunto inseparable de experiencias para aquellos que buscan la excelencia en los resultados. Con excepcional practicidad clínica, el Strong SW tiene una línea completa de implantes.

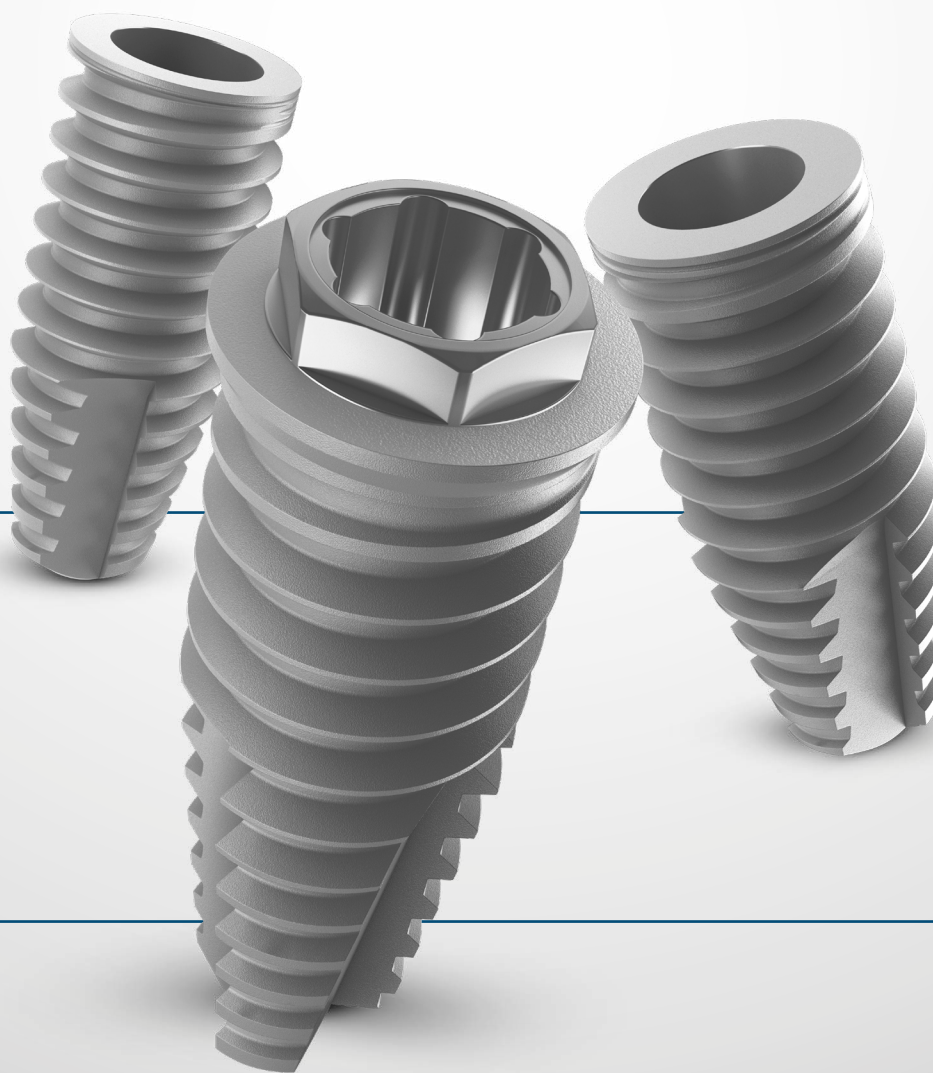


SOLUCIONES QUE TRAEN UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES



› Ápice:

Apoyo y estabilidad para casos de poco espesor óseo.

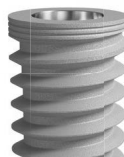

› Exclusivas microespiras cervicales:

Aumentan el área de contacto óseo y mejoran la disipación de las fuerzas oclusales.



› Precisión y adaptación:

Componentes protésicos exclusivos y alta resistencia a los esfuerzos transversales y axiales.


› Fabricado en Titanio Grado 4 comercialmente Puro (Ticp):

Metal liviano, muy resistente a la corrosión, al desgaste y a la fractura.



› Macrogeometría híbrida, cuerpo cilíndrico y ápice cónico

Unión entre implantes cónicos y cilíndricos, indicado para todas las densidades óseas. Contacto completo entre implante y hueso.

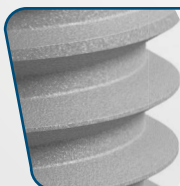


› Rosca trapecoidal:

La profundidad y el espacio de las roscas ofrecen alta estabilidad primaria y rápida velocidad de inserción.

› Ultra roscable:

Perfil de roscas más cortantes simplifican la instalación del implante.

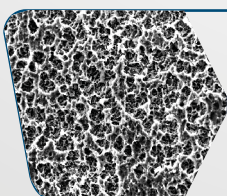

› Tratamiento en toda la superficie:

Doble grabado ácido en toda la superficie del implante Cono Morse. Los implante HE y HI cuentan con el tratamiento hasta la región cervical.





› Más opciones de componentes protésicos para Cono Morse:

Ángulo interno del Cono Morse disponible en 16 ° y 11.5 ° (excepto Plus).

Strong SW

HEXÁGONO EXTERNO

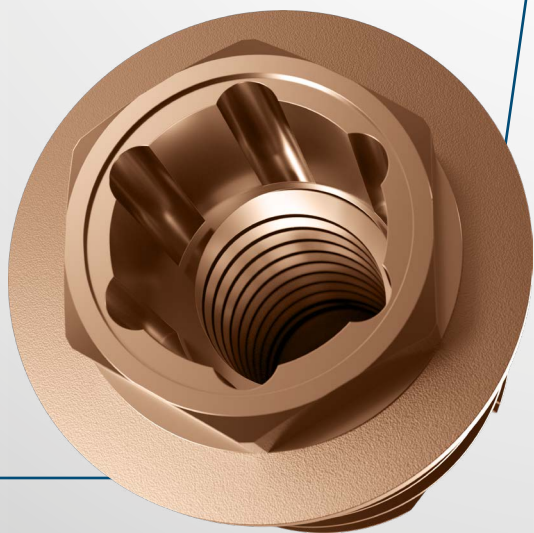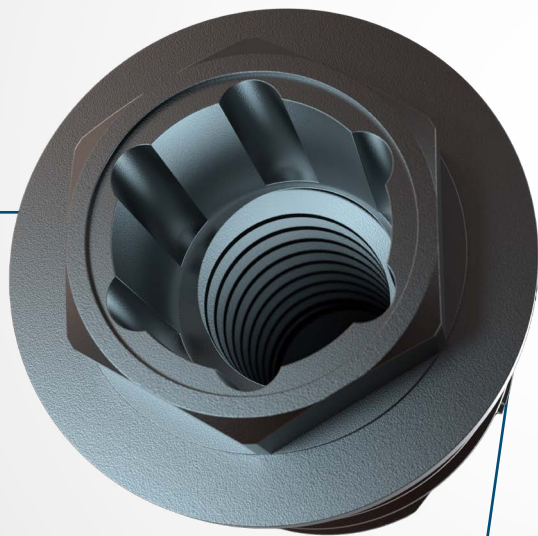

- › Indicado para rehabilitación con carga inmediata o tardía y para implantes únicos o múltiples.
- › Indicado para todos los tipos de hueso, incluyendo post extracción.
- › Conexión Hexalobular: La llave no se traba, soporta más torque y no deforma la conexión.
- › Permite la técnica de Plataforma Switching.
- › 3 opciones de llave para instalación (contra-ángulo, trinquete y llave digital).

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3,5 mm - Incisivos centrales y laterales
- › 3,8 mm - Incisivos centrales y laterales, caninos y premolares
- › 4,5 mm - Incisivos centrales superiores, caninos, premolares y molares
- › 5,0 mm - Molares


› Instalación al nivel óseo.


- › Rotación de las fresas iniciales: 1.500 rpm.
- › Rotación de las fresas: 3.5 a 5.0 mm: 800 rpm.
- › Rotación de los machos de rosca: 25 rpm*.
- › Rotación de inserción: 20 a 40 rpm.
- › Carga inmediata: torque recomendado a partir de 45 a 80 N.cm**.
- › Carga tardía: hasta 45 Ncm.

* En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.

SECUENCIA DE FRESADO

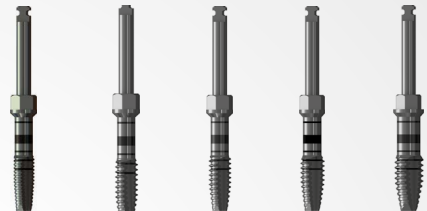				1500 rpm		800 rpm					25 rpm				
															
				FRLD 2020 Ø 2.0	FHD 2015 Ø 2.0	FRWD 35 Ø 3.05	FRWD 38 Ø 3.3	FCWD 41 Ø 4.1	FRWD 45 Ø 4.0	FRWD 50 Ø 4.25	CMRIW 35 Ø 3.5	CMRIW 37 Ø 3.75	CMRIW 38 Ø 3.8	CMRIW 45 Ø 4.5	CMRIW 50 Ø 5.0
 Strong SW Strong SW Plus	3.6	3.5	●	●	●						●				
	4.1	3.75	●	●	●	●	●					●			
	4.5	4.5	●	●	●	●		●						●	
	5.0	5.0	●	●	●	●		●	●						●

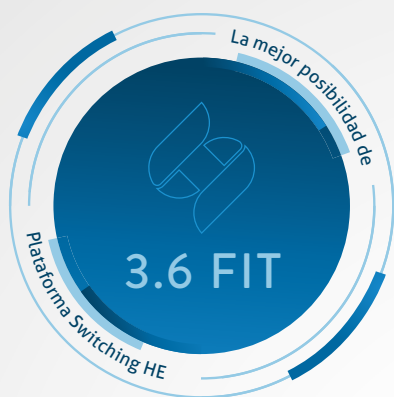

3.6 FIT

La **Plataforma Switching** es una técnica en la cual el diámetro del componente utilizado es menor que el diámetro de la Plataforma del implante, así, se crea un “paso” de 90 grados entre el implante y el componente.

S.I.N. trae lo mejor de este concepto a la línea Strong SW.

- › Una línea de componentes de 3.6mm para implantes de 3.5 y 4.1 mm.
- › Ayuda en el mantenimiento de los niveles óseos.
- › Simplifica el asentamiento clínico de los componentes de la prótesis.
- › Mejora la disipación de fuerzas en la región cervical del implante.
- › Minimiza la pérdida ósea marginal.
- › Mejora el sellado marginal para un mejor asentamiento del tejido periimplantario.
- › Promueve una mejor estética y rehabilitación con la más alta biocompatibilidad.



SECUENCIA PROTÉSICA HE

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (ANALÓGICO)

3.6 FIT, 4.1 Y 5.0 REGULAR

Unitario o múltiple



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
TI 3600	3.6	1.0	3.6
TI 3602	3.6	2.0	3.6
CIHE 3602	4.0	2.0	3.6
CIHE 3604	4.0	4.0	3.6
CIHE 3606	4.0	6.0	3.6
CI 4102	4.1	2.0	4.1
CI 4104	4.1	4.0	4.1
CI 3602	5.0	2.0	3.6
CI 3604	5.0	4.0	3.6
CI 4152	5.0	2.0	4.1
CI 4154	5.0	4.0	4.1
CI 3606	5.0	6.0	3.6
CI 4156	5.0	6.0	4.1
CI 4158	5.0	8.0	4.1
CI 5052	5.5	2.0	5.0
CI 5054	5.5	4.0	5.0
CI 5056	5.5	6.0	5.0
CI 5058	5.5	8.0	5.0



2

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3.6	5.0	5.0
CPHE 3508	3.6	8.0	5.0
CPHE 4108	4.1	8.0	5.0
CPHE 5008	5.0	8.0	5.0

10 N.cm



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZACIÓN
TMAHE 36	3.6	sin anodización
TMAI 3605	3.6	azul
TMAI 4105	4.1	amarillo
TMAI 5005	5.0	azul



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZACIÓN
TMFHE 36	3.6	sin anodización
TMFI 3605	3.6	azul
TMFI 4105	4.1	amarillo
TMFI 5005	5.0	azul



ANÁLOGO

CÓD.	PLAT. (mm)
ANHE 3600	3.6
AN 4100	4.1
AN 5000	5.0

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Para implantes HE de Ø 3.5 considere los componentes en negrita.

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Corta
(CTH 1220)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Corta
(CDHC 20)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Mediana
(CTH 1224)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Mediana
(CDHC 24)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Larga
(CTH 1230)

2



Llave Contra Ángulo
Cuadr. 1,3mm Corta
20,0mm (CTQ 20)



Llave Cuadrada
Cuadr. 1,3 mm
Corta
(CQTM 20)



Llave Contra Ángulo
Cuadr. 1,3mm Media
24,0mm (CTQ 24)



Llave Catraca
Hex. 1,3mm
Media
(CQTM 24)




Llave Contra Ángulo
Cuadr. 1,3mm Larga
30,0mm (CTQ 30)




CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.	PLAT. (mm)
CPTHE 360-H	3.6
CPTHE 366-H	3.6
CPT 360-H	3.6
CPT 366-H	3.6
CPT 400-H	4.1
CPT 406-H	4.1
CPT 500-H	5.0
CPT 506-H	5.0

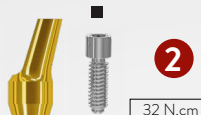

PILAR CEMENTADO ANGULADO 17°

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AIA 3651-Q	3,6	1,0
AIA 3652-Q	3,6	2,0
AIA 3653-Q	3,6	3,0
AIA 3654-Q	3,6	4,0
AIA 4151-Q	4,1	1,0
AIA 4152-Q	4,1	2,0
AIA 4154-Q	4,1	4,0
AIA 5052-Q	5,0	2,0
AIA 5054-Q	5,0	4,0

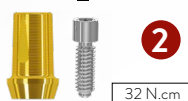

PILAR CEMENTADO RECTO

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AI 3651-Q	3.6	1.0
AI 3652-Q	3.6	2.0
AI 3653-Q	3.6	3.0
AI 3654-Q	3.6	4.0
AI 4151-Q	4.1	1.0
AI 4152-Q	4.1	2.0
AI 4153-Q	4.1	3.0
AI 4154-Q	4.1	4.0
AI 5051-Q	5.0	1.0
AI 5052-Q	5.0	2.0
AI 5053-Q	5.0	3.0
AI 5054-Q	5.0	4.0



PILAR EUCLA CR-CO

CÓD.	PLAT. (mm)
EUCLAHE 360-Q	3.6
EUCLAHE 366-Q	3.6
EUCLA 360-Q	3.6
EUCLA 366-Q	3.6
EUCLA 400-Q	4.1
EUCLA 406-Q	4.1
EUCLA 500-Q	5.0
EUCLA 506-Q	5.0



PILAR UCLA PLÁSTICO

CÓD.	PLAT. (mm)
UCLAHE 360-Q	3.6
UCLAHE 366-Q	3.6
UCLA 360-Q	3.6
UCLA 366-Q	3.6
UCLA 400-Q	4.1
UCLA 406-Q	4.1
UCLA 500-Q	5.0
UCLA 506-Q	5.0



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

PLPA 1
PTMA 22-1
Rosca de 2,0mm



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

PTQ 2008 Titanio
PT 2008 Titanio
Rosca de 2.0mm



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.

PPI 41
PPI 4100

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

⊙ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (DIGITAL)

3.6 FIT, 4.1 Y 5.0 REGULAR

Unitario o múltiple



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
TI 3600	3.6	1.0	3.6
TI 3602	3.6	2.0	3.6
CIHE 3602	4.0	2.0	3.6
CIHE 3604	4.0	4.0	3.6
CIHE 3606	4.0	6.0	3.6
CI 4102	4.1	2.0	4.1
CI 4104	4.1	4.0	4.1
CI 3602	5.0	2.0	3.6
CI 4152	5.0	2.0	4.1
CI 3604	5.0	4.0	3.6
CI 4154	5.0	4.0	4.1
CI 3606	5.0	6.0	3.6
CI 4156	5.0	6.0	4.1
CI 4158	5.0	8.0	4.1
CI 5052	5.5	2.0	5.0
CI 5054	5.5	4.0	5.0
CI 5056	5.5	6.0	5.0
CI 5058	5.5	8.0	5.0



2

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3.6	5.0	5.0
CPHE 3508	3.6	8.0	5.0
CPHE 4108	4.1	8.0	5.0
CPHE 5008	5.0	8.0	5.0



1



2

JIG DE ESCANEADO - HE

CÓD.

JBHE 34C	⊗
JBHE 36C	⊗
JBHE 41C	⊗



2

JIG DE ESCANEADO - HE

CÓD.

JBHE 34	⊗
JBHE 36	⊗
JBHE 41	⊗

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

Para implantes HE de Ø de 3.5, considerar los componentes en negrita.

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)



Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)



Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)



ANÁLOGO DIGITAL - HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN
ADHE 34	Hexágono de 2,55 mm
ADHE 35	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)
ADHE 41	Hexágono de 2,70 mm (Padrão Brånemark)



INTERFAZ TITANIO HE SIRONA

PLATAFORMA S.I.N.

BIBLIOTECA SIRONA

IHE 4104


BO 4.1 - BO 5.0



32 N.cm

INTERFAZ ANTIRROTACIONAL TITANIO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IHET 3404	Ø3,4X4	3.4	4.0
IHET 3406	Ø3,4X6	3.4	6.0
IHET 3604	Ø3,6X4	3.6	4.0
IHET 3606	Ø3,6X6	3.6	6.0
IHET 4104	Ø4,1X4	4.1	4.0
IHET 4106	Ø4,1X6	4.1	6.0

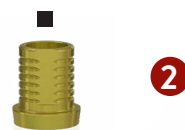

32 N.cm

INTERFAZ ROTACIONAL TITANIO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IRHET 3604	Ø3,6X4	3.6	4.0
IRHET 3606	Ø3,6X6	3.6	6.0
IRHET 4104	Ø4,1X4	4.1	4.0
IRHET 4106	Ø4,1X6	4.1	6.0



32 N.cm

INTERFAZ ANTIRROTACIONAL CROMO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IHEC 3404	Ø3.4X4	3.4	4.0
IHEC 3406	Ø3.4X6	3.4	6.0
IHEC 3604	Ø3.6X4	3.6	4.0
IHEC 3606	Ø3.6X6	3.6	6.0
IHEC 4104	Ø4.1X4	4.1	4.0
IHEC 4106	Ø4.1X6	4.1	6.0



32 N.cm

INTERFAZ ROTACIONAL CROMO HE

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IRHEC 3604	Ø3.6X4	3.6	4.0
IRHEC 3606	Ø3.6X6	3.6	6.0
IRHEC 4104	Ø4.1X4	4.1	4.0
IRHEC 4106	Ø4.1X6	4.1	6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal

⊗ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

⊗ Tornillo de pilar

⊗ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE 3.5

SECUENCIA PROTÉSICA PILAR UNIVERSAL (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Unitaria cementada

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
CIHE 3602	4.0	2.0	3.6
CIHE 3604	4.0	4.0	3.6
CIHE 3606	4.0	6.0	3.6

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3.6	5.0	5.0
CPHE 3508	3.6	8.0	5.0
CPHE 4108	4.1	8.0	5.0
CPHE 5008	5.0	8.0	5.0

PILAR UNIVERSAL

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. TRANSMUCOSA (mm)	ALT. DE CEMENTACIÓN (mm)
AIUNHE334002	3.3	2.0	4.0
AIUNHE334003	3.3	3.0	4.0
AIUNHE334004	3.3	4.0	4.0
AIUNHE336002	3.3	2.0	6.0
AIUNHE336003	3.3	3.0	6.0
AIUNHE336004	3.3	4.0	6.0

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)



Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)



Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.


**TRANSFER
EN POLIACETAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
TSIT 3340	3.3	4.0
TSIT 3360	3.3	6.0


ANÁLOGO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3.3	4.0
ASIT 3360	3.3	6.0


**CILINDRO PROVISIONAL
EN ACRÍLICO**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3.3	4.0
CPSIT 3360	3.3	6.0


**CILINDRO CALCINABLE
EN POLIACETAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3.3	4.0
CCSIT 3360	3.3	6.0


**JIG DE ESCANEO
PILAR UNIVERSAL**

CÓD.	DIÁM (mm)	ALT. (mm)
JBSIT 3340 	3.3	4.0
JBSIT 3360 	3.3	6.0
JBSIT 4540 	4.5	4.0
JBSIT 4560 	4.5	6.0


**ANÁLOGO DIGITAL
PILAR UNIVERSAL**

CÓD.	DIÁM (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3.3	4.0
ADUA 3360	3.3	6.0
ADUA 4540	4.5	4.0
ADUA 4560	4.5	6.0

 Secuencia analógica

 Secuencia digital

 Tornillo hexagonal

 Componente antirrotacional

 Tornillo cuadrado

 Tornillo de pilar

 Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

MINI PILAR - INTERMEDIARIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis parciales o totales atornilladas



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0



2

20 N.cm

MINI PILAR RECTO

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
MA 3601	3.6	1.0	4.8
MA 3602	3.6	2.0	4.8
MA 3603	3.6	3.0	4.8
MA 3604	3.6	4.0	4.8
MA 4101	4.1	1.0	4.8
MA 4102	4.1	2.0	4.8
MA 4103	4.1	3.0	4.8
MA 4104	4.1	4.0	4.8
MA 5001	5.0	1.0	4.8
MA 5002	5.0	2.0	4.8
MA 5003	5.0	3.0	4.8
MA 5004	5.0	4.0	4.8



3

20 N.cm

MINI PILAR ANGULADO 17°

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
MAA 3602	3.6	2.0	4.8
MAA 3604	3.6	4.0	4.8
MAA 4102	4.1	2.0	4.8
MAA 4103	4.1	3.0	4.8



3

20 N.cm

MINI PILAR ANGULADO 30°

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
MAA 3632	3.6	2.0	4.8
MAA 3634	3.6	4.0	4.8
MAA 4132	4.1	2.0	4.8
MAA 4134	4.1	4.0	4.8



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFM 4800



1

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855

Perfil de 5.0 mm

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Para implantes HE de Ø 3.5 considere los componentes en negrita.

LLAVES



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

ANÁLOGO
CÓD.
ANMA 4800

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

PTM 4800-2	Para mini pilar angulado
PTM 4800-3	Para mini pilar recto
PTMS 4800-3	Adecuado para soldadura láser Para mini pilar reto



CILINDRO CALCINABLEY CR-CO

CÓD.

CPM 4800-2	Para mini pilar angulado
CPM 4800-3	Para mini pilar recto
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto Para mini pilar angulado
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto Para mini pilar recto



ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR

CÓD.

ADMA

JIG DE ESCANE0 MINI PILAR

CÓD.

JBMA

JIG DE ESCANE0 MINI PILAR

CÓD.

JBMAC

PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.

PPM 01

TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

DIÁM.
(mm)

PL 1405 corto	1.4
PTMA 13-1 largo	1.4

TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

ALT.
(mm)

PRH 20	2.0	Para mini pilar angulado
PRH 30	3.0	Para mini pilar recto

INTERFAZ TITANIO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMAT 04	4.0
IMAT 06	6.0

INTERFAZ CROMO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMAC 04	4.0
IMAC 06	6.0

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA 1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto (CDAC 20)




Llave Catraca P/
Abutment Medio (CDAC 24)

3



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Corto (CTHA 1220)

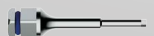

Llave de Catraca Hex.
1.2mm Est. Corto (CHTMA 20)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Medio (CTHA 1224)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Medio (CHTMA 24)

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

MICRO-MINI-PILAR - INTERMEDIARIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitarias, parciales o totales atornilladas

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



2

20 N.cm



1



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMM 33
TMM 3306



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMMF 33
TMMF 3306

IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0

MICRO MINI PILAR

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
MMAHE 3502	3,6	2.0	3.5
MMAHE 3503	3,6	3.0	3.5
MMAHE 3504	3,6	4.0	3.5

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMM 33

LLAVES


1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)

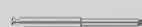

Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)




Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)


2

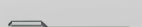

Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)

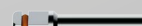


Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.



ANÁLOGO
CÓD.
AMMA 33

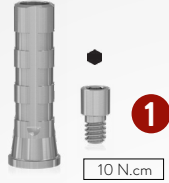

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

CPMT 33
CPMT 3306



CILINDRO CALCINABLEY CR-CO

CÓD.

CPMC 33	Plástico
CPMM 33	Cromo Cobalto
CPMC 3306	Plástico
CPMM 3306	Cromo Cobalto

TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

PTMMA 14



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

PRH 3035

ALT. (mm)

2.0



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.

PPMM 33
PPMM 3306



JIG DE ESCANEO MICRO MINI PILAR

CÓD.

JBMMMA
JBMMMA 06



JIG DE ESCANEO MICRO MINI PILAR

CÓD.

JBMMAC
JBMMMA 06C



ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI PILAR

CÓD.

ADMMA



INTERFAZ TITANIO MICRO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMMAT 04	4.0
IMMAT 06	6.0
IMMAT 0406	4.0
IMMAT 0606	6.0



INTERFAZ CROMO MICRO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMMAC 04	4.0
IMMAC 06	6.0
IMMAC 0406	4.0
IMMAC 0606	6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

PILAR CÓNICO - SECUENCIA SECUENCIA CON INTERMEDIO PROTÉSICO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitarias, parciales o totales atornilladas.



20 N.cm



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAA 4800

TMAA 4806



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFA 4800

TMFA 4806

IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0

PILAR CÓNICO HE

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
AC 3601	3.6	1.0	4.8
AC 3602	3.6	2.0	4.8
AC 3603	3.6	3.0	4.8
AC 3604	3.6	4.0	4.8
AC 4101	4.1	1.0	4.8
AC 4102	4.1	2.0	4.8
AC 4103	4.1	3.0	4.8
AC 4104	4.1	4.0	4.8
AC 5001	5.0	1.0	4.8
AC 5002	5.0	2.0	4.8
AC 5003	5.0	3.0	4.8
AC 5004	5.0	4.0	4.8

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PA 4855

Perfil de 5.0 mm

LLAVES


1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)

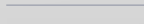

Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)




Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2

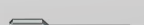

Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)




Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Para implantes HE de Ø 3.5 considere los componentes en negrita.

COMPATIBLE CON LA LÍNEA

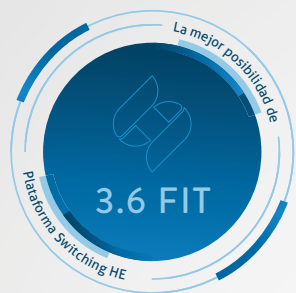

ANÁLOGO

CÓD.

ANAC



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

PTA 4800-3

PTA 4806-3



CILINDRO CALCINABLE Y CR-CO

CÓD.

CPAC 00-3 Plástico

CALE 00-3 Cromo-cobalto

CPAC 06-3 Plástico

CALE 06-3 Cromo-cobalto



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.

PPAC 01



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

DIÁM.
(mm)

PL 1405 Corto 1.4

PTMA 13-1 Largo 1.4



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

ALT.
(mm)

PRH 30 3.0



JIG DE ESCANEOPILAR CÓNICO

CÓD.

JBAC 00

JBAC 06



JIG DE ESCANEOPILAR CÓNICO

CÓD.

JBAC 00C

JBAC 06C



ANÁLOGO DIGITAL - PILAR CÓNICO

CÓD.

ADAC



INTERFAZ TITANIO PILAR CÓNICO

CÓD.

ALT. (mm)

IAC 0400 4.0

IAC 0406 4.0

IAC 0600 6.0

IAC 0606 6.0



INTERFAZ CROMO PILAR CÓNICO

CÓD.

ALT. (mm)

IACC 0400 4.0

IACC 0406 4.0

IACC 0600 6.0

IACC 0606 6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal

⊗ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊗ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

OVERDENTURE BARRA-CLIP (ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
CIHE 3602	4.0	2.0	3.6
CIHE 3604	4.0	4.0	3.6
CIHE 3606	4.0	6.0	3.6
CI 4102	4.1	2.0	4.1
CI 4104	4.1	4.0	4.1
CI 3602	5.0	2.0	3.6
CI 4152	5.0	2.0	4.1
CI 3604	5.0	4.0	3.6
CI 4154	5.0	4.0	4.1
CI 3606	5.0	6.0	3.6
CI 4156	5.0	6.0	4.1
CI 4158	5.0	8.0	4.1
CI 5052	5.5	2.0	5.0
CI 5054	5.5	4.0	5.0
CI 5056	5.5	6.0	5.0
CI 5058	5.5	8.0	5.0



2

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 3505	3.6	5.0	5.0
CPHE 3508	3.6	8.0	5.0
CPHE 4108	4.1	8.0	5.0
CPHE 5008	5.0	8.0	5.0



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZACIÓN
TMAHE 36	3.6	sin anodización
TMAI 3605	3.6	azul
TMAI 4105	4.1	amarillo
TMAI 5005	5.0	azul



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.	PLAT. (mm)	ANODIZACIÓN
TMFHE 36	3.6	sin anodización
TMFI 3605	3.6	azul
TMFI 4105	4.1	amarillo
TMFI 5005	5.0	azul

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Para implantes HE de Ø 3.5 considere los componentes en negrita.

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)

2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave Cuadrada
Hex. 1.2mm Media
(CQTM 20)




Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)



Llave Cuadrada
Hex. 1.2mm Larga
(CQTM 24)



Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)

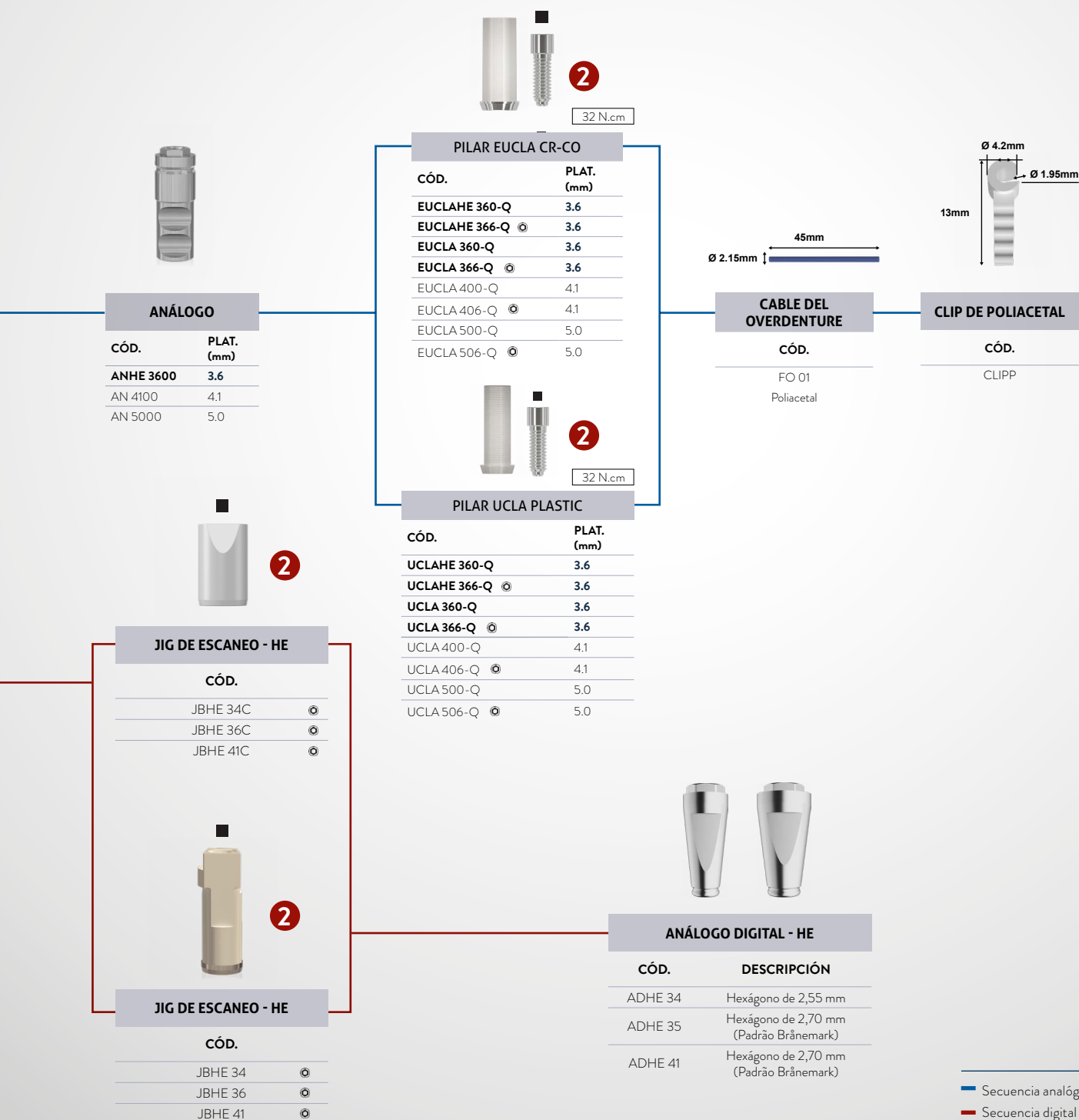

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal

⊗ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

⊗ Tornillo de pilar

⊗ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

OVERDENTURE BARRA-CLIP - MINI PILAR (ANALÓGICO Y DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SWHE 3585	SWHE 3585N	3.5	8.5	3.6
SWHE 3510	SWHE 3510N	3.5	10.0	3.6
SWHE 3511	SWHE 3511N	3.5	11.5	3.6
SWHE 3513	SWHE 3513N	3.5	13.0	3.6
SWHE 3515	SWHE 3515N	3.5	15.0	3.6
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0

COMPATIBLE CON LA LÍNEA



*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

*Para implantes HE de Ø 3.5 considere los componentes en negrita.



MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MA 3601	4.8	1.0	3.6
MA 3602	4.8	2.0	3.6
MA 3603	4.8	3.0	3.6
MA 3604	4.8	4.0	3.6
MA 4101	4.8	1.0	4.1
MA 4102	4.8	2.0	4.1
MA 4103	4.8	3.0	4.1
MA 4104	4.8	4.0	4.1
MA 5001	4.8	1.0	5.0
MA 5002	4.8	2.0	5.0
MA 5003	4.8	3.0	5.0
MA 5004	4.8	4.0	5.0



MINI PILAR ANGULADO 17°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MAA 3602	4.8	2.0	3.6
MAA 3604	4.8	4.0	3.6
MAA 4102	4.8	2.0	4.1
MAA 4103	4.8	3.0	4.1



MINI PILAR ANGULADO 30°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
MAA 3632	4.8	2.0	3.6
MAA 3634	4.8	4.0	3.6
MAA 4132	4.8	2.0	4.1
MAA 4134	4.8	4.0	4.1





PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855

LLAVES

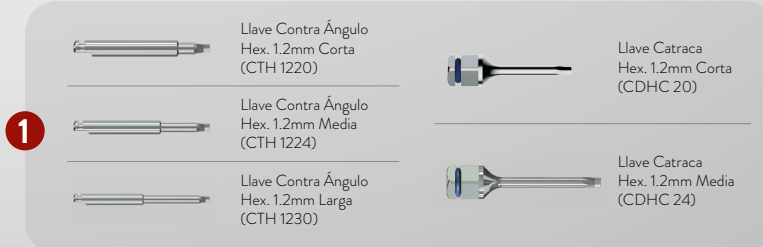

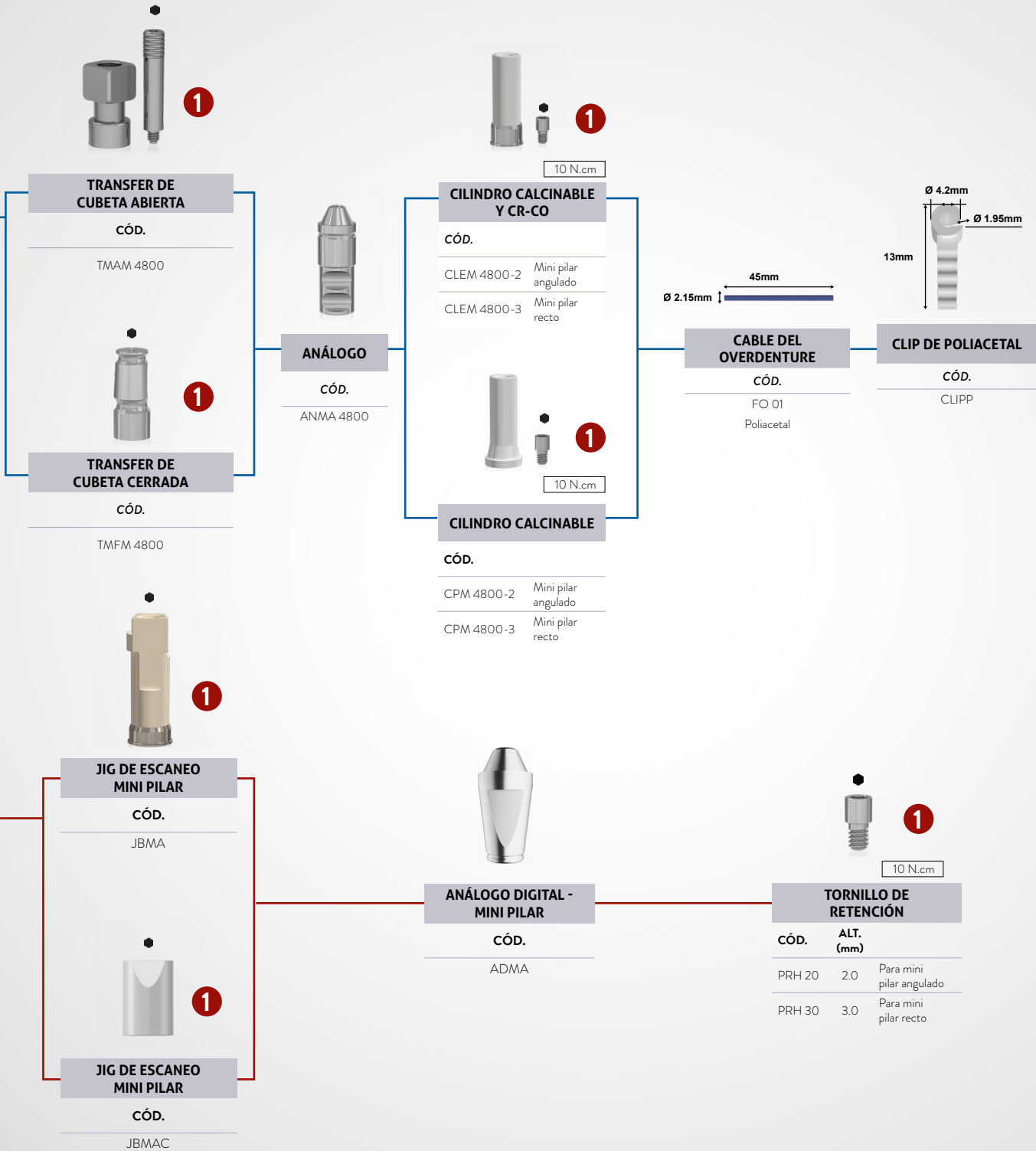

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)


3



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Corto
(CTHA 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Me-
dio (CTHA 1224)

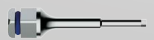

Llave de Catraca Hex.
1.2mm Est. Corto
(CHTMA 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Medio
(CHTMA 24)

— Secuencia analógica
— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal
⊙ Componente antirrotacional
■ Tornillo cuadrado
○ Tornillo de pilar
⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HE

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE				
CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
SCW 3707	SWHE 3707N	3.75	7.0	4.1
SCW 3785	SWHE 3785N	3.75	8.5	4.1
SCW 3710	SWHE 3710N	3.75	10.0	4.1
SCW 3711	SWHE 3711N	3.75	11.5	4.1
SCW 3713	SWHE 3713N	3.75	13.0	4.1
SCW 3715	SWHE 3715N	3.75	15.0	4.1
SCWE 4585	SWHE 4585N	4.5	8.5	4.5
SCWE 4510	SWHE 4510N	4.5	10.0	4.5
SCWE 4511	SWHE 4511N	4.5	11.5	4.5
SCWE 4513	SWHE 4513N	4.5	13.0	4.5
SCWE 4515	SWHE 4515N	4.5	15.0	4.5
SCW 5007	SWHE 5007N	5.0	7.0	5.0
SCW 5085	SWHE 5085N	5.0	8.5	5.0
SCW 5010	SWHE 5010N	5.0	10.0	5.0
SCW 5011	SWHE 5011N	5.0	11.5	5.0
SCW 5013	SWHE 5013N	5.0	13.0	5.0
SCW 5015	SWHE 5015N	5.0	15.0	5.0

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	PLAT. (mm)
CI 4102	4.1	2.0	4.1
CI 4104	4.1	4.0	4.1
CI 4152	5.0	2.0	4.1
CI 4154	5.0	4.0	4.1
CI 4156	5.0	6.0	4.1
CI 4158	5.0	8.0	4.1
CI 5052	5.5	2.0	5.0
CI 5054	5.5	4.0	5.0
CI 5056	5.5	6.0	5.0
CI 5058	5.5	8.0	5.0



2

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHE 4108	4.1	8.0	5.0
CPHE 5008	5.0	8.0	5.0



2

20 N.cm

PILAR EQUATOR HE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AEHE 4102	4.1	2.0
AEHE 4103	4.1	3.0
AEHE 4104	4.1	4.0
AEHE 4105	4.1	5.0
AEHE 4106	4.1	6.0

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)


2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)

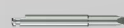

Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)



Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DP	1.6 mm



ACOPLE DE TITANIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DPR	2.9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARILLA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retención extra suave (0.6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retención suave (1.2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retención estándar (1.8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retención fuerte (2.7 kg)



CÁPSULA NEGRA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabajo



CÓD. CCE 01
CARACTERÍSTICA Pack de cápsulas (compuesto por 1 unidad del artículo 140 CEV; 1 unidad del artículo 140 CEN y 2 unidades del artículo 140 CET)





CÓD. 485 IC
CARACTERÍSTICA Clave para inserción y extracción de cápsulas de retención

- Secuencia analógica
- Secuencia digital
- ⬢ Tornillo hexagonal
- ⊙ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- ⬢ Tornillo de pilar
- ⊙ Componente rotacional

Strong SW

HEXÁGONO INTERNO

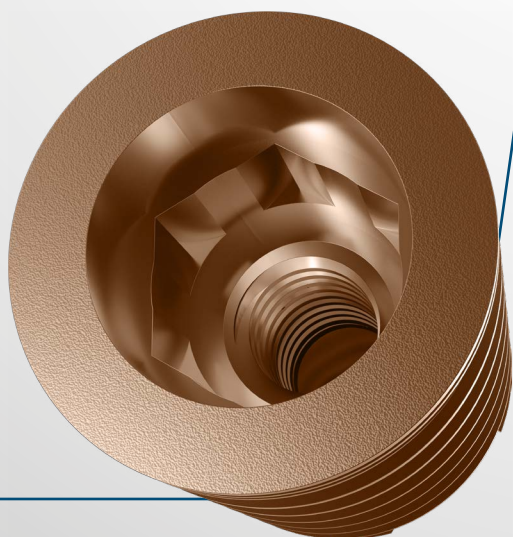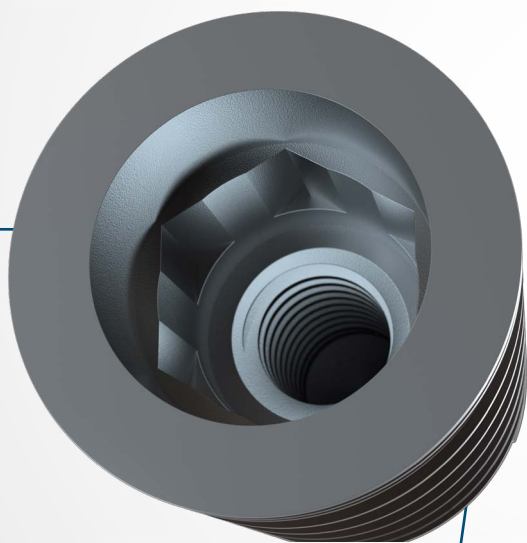

- › Indicado para rehabilitación con carga inmediata o tardía y para implantes unitarios o múltiples.
- › Indicado para todos los tipos de hueso, incluyendo post extracción.
- › 3 opciones de llave para instalación (contra-ángulo, torquimetro , llave digital).

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3,8 mm - Incisivos centrales, laterales, caninos y premolares
- › 4,5 mm - Incisivos centrales superiores, caninos, premolares y molares
- › 5,0 mm - Molares

› **Instalación al nivel óseo.**

- › Rotación de las fresas iniciales: 1.500 rpm.
- › Rotación de las fresas: 3.5 a 5.0 mm: 800 rpm.
- › Rotación de los machos de rosca: 25 rpm*.
- › Rotación de inserción: 20 a 40 rpm.
- › Carga inmediata: torque recomendado de 45 a 80 N.cm**.
- › Carga tardía: hasta 45 Ncm.



*En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.



- En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

INFORMACIONES TÉCNICAS



SW 38XX
SWHI 38xxN (Plus)

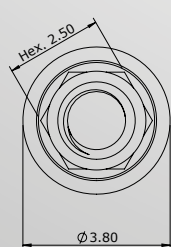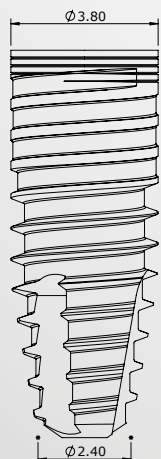

SW 45XX
SWHI 45xxN (Plus)

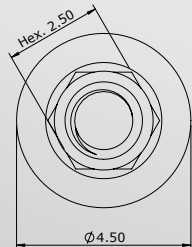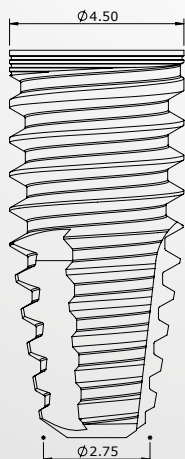


SW 50XX
SWHI 50xxN (Plus)

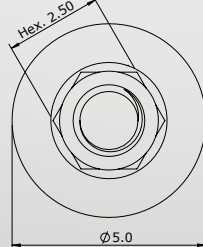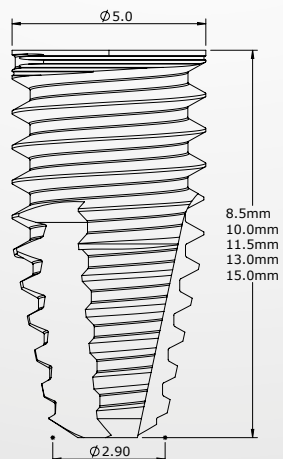

SECUENCIA PROTÉSICA HI

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (ANALÓGICO)

Unitario

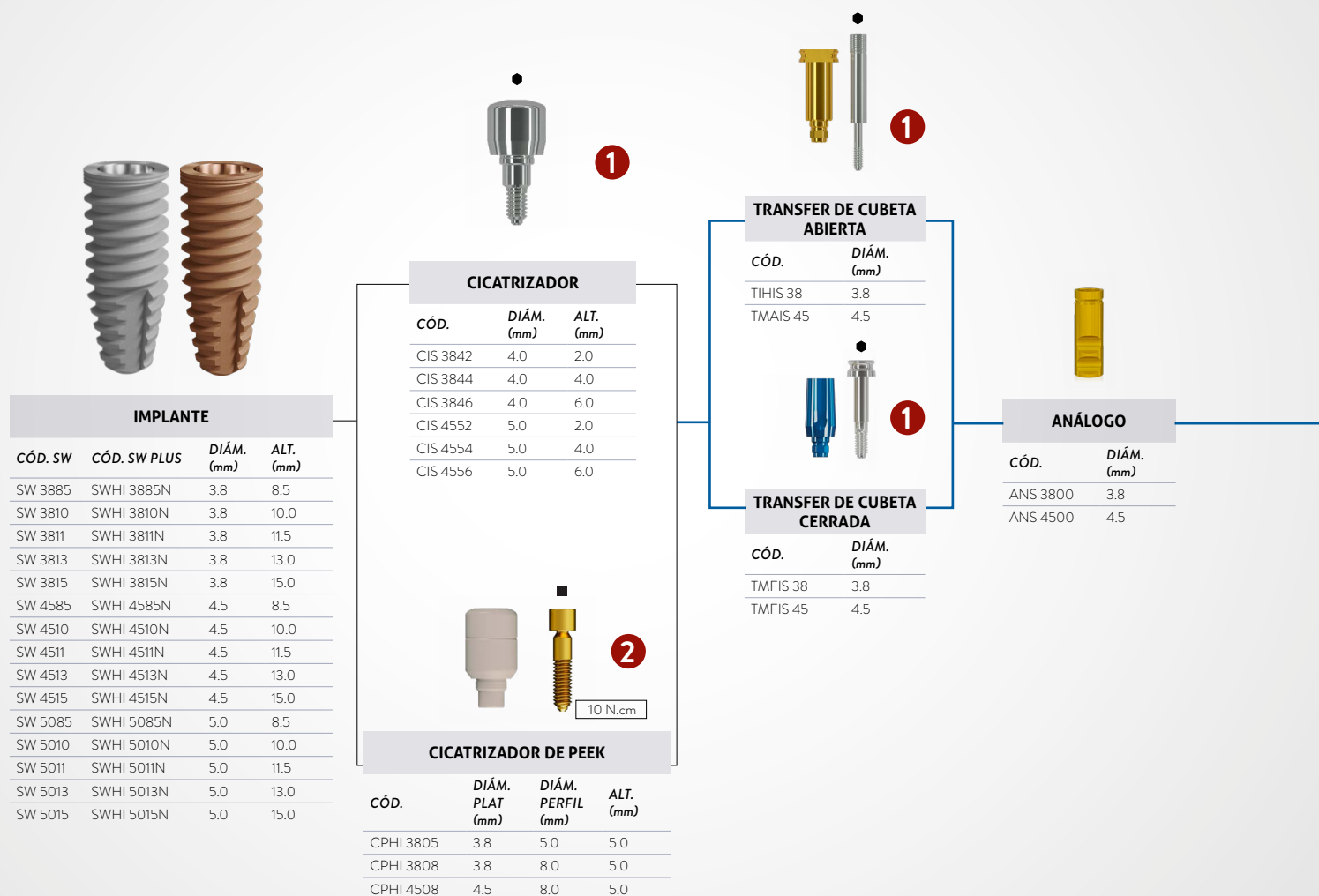

LLAVES



*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.



20 N.cm

**PILAR ANGULADO
CEMENTADO 17°**


CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AIAS 3842-Q	3.8	2.0
AIAS 3844-Q	3.8	4.0
AIAS 4562-Q	4.5	2.0
AIAS 4564-Q	4.5	4.0



20 N.cm

PILAR CEMENTADO RECTO

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
AIS 3801-Q	3.8	1.0
AIS 3802-Q	3.8	2.0
AIS 3803-Q	3.8	3.0
AIS 3804-Q	3.8	4.0
AIS 4501-Q	4.5	1.0
AIS 4502-Q	4.5	2.0
AIS 4503-Q	4.5	3.0
AIS 4504-Q	4.5	4.0

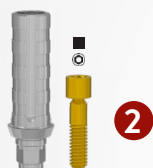

20 N.cm

**CILINDRO PROVISIONAL
DE TITANIO**


CÓD.	PLAT. (mm)
CPTS 386-Q	3.8
CPTS 456-Q	4.5



20 N.cm

PILAR EUCLA CRCO


CÓD.
EUCLAS 386 - Q
EUCLAS 456 - Q

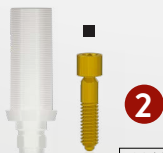

20 N.cm

PILAR UCLA PLÁSTICO

CÓD.
UCLAS 386-Q
UCLAS 380-Q
UCLAS 456-Q
UCLAS 450-Q

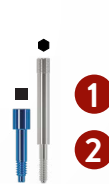
**TORNILLO DE
LABORATORIO**

CÓD.

PLHIS 1	■
PTMAS 24-1	●

Rosca de 1.8mm



20 N.cm

TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

PTQH 18

Rosca de 1.8 mm

— Secuencia analógica


— Secuencia digital

- Tornillo hexagonal
- ⊗ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- ⊗ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HI

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (ANALÓGICO)

Unitario

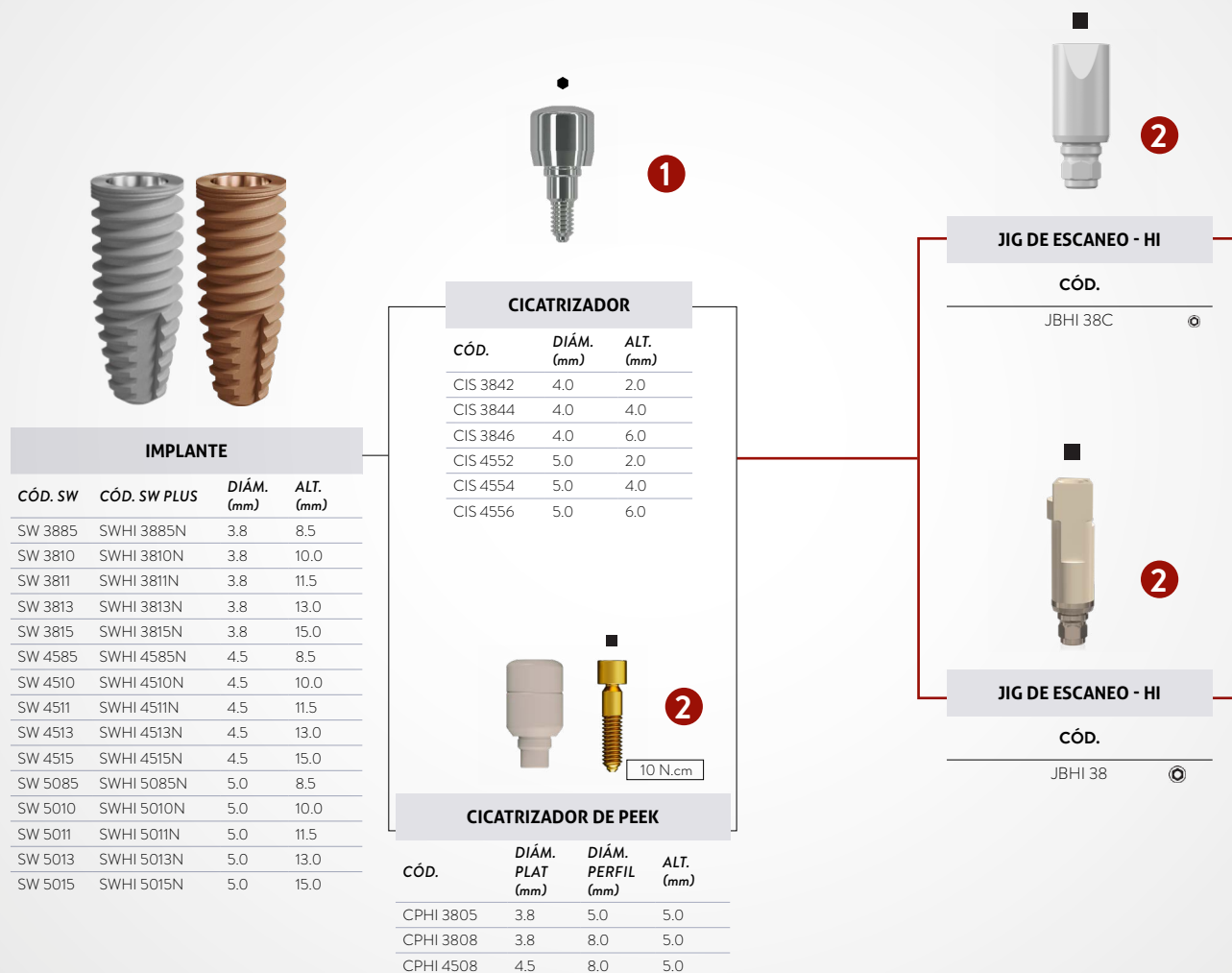

LLAVES



*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.


ANÁLOGO DIGITAL - HI
CÓD.

ADHI 38


2

20 N.cm

INTERFAZ TITANIO HI SIRONA
PLATAFORMA S.I.N.
BIBLIOTECA SIRONA

IHI 3804

FX 3.8 - FX 4.5

* Compatible con SW HI


2

20 N.cm

INTERFAZ CROMO HI

CÓD.	DESCRIPCIÓN	PLAT. (mm)	ALT. (mm)
IHIC 3804	Ø3,8X4	3,8	4,0
IHIC 3806	Ø3,8X6	3,8	6,0


2

20 N.cm

INTERFAZ TITANIO HI

CÓD.	DESCRIPCIÓN	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
IHIT 3804	Ø3,8X4	3,8	4,0
IHIT 3806	Ø3,8X6	3,8	6,0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

Tornillo hexagonal

Componente antirrotacional

Tornillo cuadrado

Tornillo de pilar

Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HI

MINI PILAR - INTERMEDIARIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis parciales o totales atornilladas



2

20 N.cm



1



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFM 4800

IMPLANTE			
CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SW 3885	SWHI 3885N	3.8	8.5
SW 3810	SWHI 3810N	3.8	10.0
SW 3811	SWHI 3811N	3.8	11.5
SW 3813	SWHI 3813N	3.8	13.0
SW 3815	SWHI 3815N	3.8	15.0
SW 4585	SWHI 4585N	4.5	8.5
SW 4510	SWHI 4510N	4.5	10.0
SW 4511	SWHI 4511N	4.5	11.5
SW 4513	SWHI 4513N	4.5	13.0
SW 4515	SWHI 4515N	4.5	15.0
SW 5085	SWHI 5085N	5.0	8.5
SW 5010	SWHI 5010N	5.0	10.0
SW 5011	SWHI 5011N	5.0	11.5
SW 5013	SWHI 5013N	5.0	13.0
SW 5015	SWHI 5015N	5.0	15.0

MINI PILAR			
CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
MAS 3801	3.8	1.0	4.8
MAS 3802	3.8	2.0	4.8
MAS 3803	3.8	3.0	4.8
MAS 3804	3.8	4.0	4.8
MAS 4501	4.5	1.0	4.8
MAS 4502	4.5	2.0	4.8
MAS 4503	4.5	3.0	4.8
MAS 4504	4.5	4.0	4.8

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855
Perfil de 5.0 mm

LLAVES

1

Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2

Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.

**ANÁLOGO**

CÓD.

ANMA 4800

**CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO**

CÓD.

PTM 4800-3	Mini pilar recto
PTMS 4800-3	Indicado para soldadura por láser

**CILINDRO CALCINABLE Y CrCo**

CÓD.

CPM 4800-3	Plástico
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto

**PROTECTOR DE PULIDO**

CÓD.

PPM 01

**TORNILLO DE LABORATORIO**

CÓD. DIÁM. (mm)

PL 1405 Corto	1.4
PTMA 13-1 Largo	1.4

**TORNILLO DE RETENCIÓN**

CÓD. ALT. (mm)

PRH 30	3.0
--------	-----

**JIG DE ESCANEO MINI PILAR**

CÓD.

JBMA

**JIG DE ESCANEO MINI PILAR**

CÓD.

JBMAC

**ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR**

CÓD.

ADMA

**INTERFAZ TITANIO MINI PILAR**

CÓD. ALT. (mm)

IMAT 04	4.0
IMAT 06	6.0

**INTERFAZ CROMO MINI PILAR**

CÓD. ALT. (mm)

IMAC 04	4.0
IMAC 06	6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HI

PILAR CÓNICO - SECUENCIA SECUENCIA CON INTERMEDIO PROTÉSICO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitarias, parciales o totales atornilladas.



2

20 N.cm



1



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAA 4800

TMAA 4806



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFA 4800

TMFA 4806

IMPLANTE			
CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SW 3885	SWHI 3885N	3.8	8.5
SW 3810	SWHI 3810N	3.8	10.0
SW 3811	SWHI 3811N	3.8	11.5
SW 3813	SWHI 3813N	3.8	13.0
SW 3815	SWHI 3815N	3.8	15.0
SW 4585	SWHI 4585N	4.5	8.5
SW 4510	SWHI 4510N	4.5	10.0
SW 4511	SWHI 4511N	4.5	11.5
SW 4513	SWHI 4513N	4.5	13.0
SW 4515	SWHI 4515N	4.5	15.0
SW 5085	SWHI 5085N	5.0	8.5
SW 5010	SWHI 5010N	5.0	10.0
SW 5011	SWHI 5011N	5.0	11.5
SW 5013	SWHI 5013N	5.0	13.0
SW 5015	SWHI 5015N	5.0	15.0

PILAR CÓNICO HI			
CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
ACS 3801	3.8	1.0	4.8
ACS 3802	3.8	2.0	4.8
ACS 3803	3.8	3.0	4.8
ACS 3804	3.8	4.0	4.8
ACS 4501	4.5	1.0	4.8
ACS 4502	4.5	2.0	4.8
ACS 4503	4.5	3.0	4.8
ACS 4504	4.5	4.0	4.8


PROTECTOR DE PILAR

CÓD.


PA 4855
Perfil de 5.0 mm

LLAVES

1

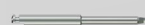Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2

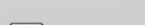Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.



ANÁLOGO

CÓD.
ANAC



10 N.cm

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

PTA 4800-3
PTA 4806-3



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINABLE Y CrCo

CÓD.

CPAC 00-3	Plástico
CALE 00-3	Cromo-cobalto
CPAC 06-3	Plástico
CALE 06-3	Cromo-cobalto



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.
PPAC 01



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.	DIÁM. (mm)
PL 1405 Corto	1.4
PTMA13-1 Largo	1.4



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.	ALT. (mm)
PRH 30	3.0



JIG DE ESCANEO PILAR CÓNICO

CÓD.

JBAC 00
JBAC 06



ANÁLOGO DIGITAL - PILAR CÓNICO

CÓD.
ADAC



INTERFAZ TITANIO PILAR CÓNICO

CÓD.	ALT. (mm)
IACT 0400	4.0
IACT 0406	4.0
IACT 0600	6.0
IACT 0606	6.0



INTERFAZ CROMO PILAR CÓNICO

CÓD.	ALT. (mm)
IACC 0400	4.0
IACC 0406	4.0
IACC 0600	6.0
IACC 0606	6.0



JIG DE ESCANEO PILAR CÓNICO

CÓD.

JBAC 00C
JBAC 06C

Sequencia analógica

Sequencia digital

Tornillo hexagonal

Componente antirrotacional

Tornillo cuadrado

Tornillo de pilar

Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HI

OVERDENTURE BARRA-CLIP (ANALÓGICO E DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SW 3885	SWHI 3885N	3.8	8.5
SW 3810	SWHI 3810N	3.8	10.0
SW 3811	SWHI 3811N	3.8	11.5
SW 3813	SWHI 3813N	3.8	13.0
SW 3815	SWHI 3815N	3.8	15.0
SW 4585	SWHI 4585N	4.5	8.5
SW 4510	SWHI 4510N	4.5	10.0
SW 4511	SWHI 4511N	4.5	11.5
SW 4513	SWHI 4513N	4.5	13.0
SW 4515	SWHI 4515N	4.5	15.0
SW 5085	SWHI 5085N	5.0	8.5
SW 5010	SWHI 5010N	5.0	10.0
SW 5011	SWHI 5011N	5.0	11.5
SW 5013	SWHI 5013N	5.0	13.0
SW 5015	SWHI 5015N	5.0	15.0



1

CICATRIZADOR DE TITANIO

CÓD.	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
CIS 3842	2.0	4.0
CIS 3844	4.0	4.0
CIS 3846	6.0	4.0
CIS 4552	2.0	5.0
CIS 4554	4.0	5.0
CIS 4556	6.0	5.0




2

10 N.cm

CICATRIZADOR DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPhi 3805	3.8	5.0	5.0
CPhi 3808	3.8	8.0	5.0
CPhi 4508	4.5	8.0	5.0

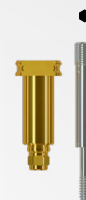

1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.	DIÁM. (mm)
TIHIS 38	3.8
TMAIS 45	4.5



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.	DIÁM. (mm)
TMFIS 38	3.8
TMFIS 45	4.5

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)



Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)





Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)

*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.

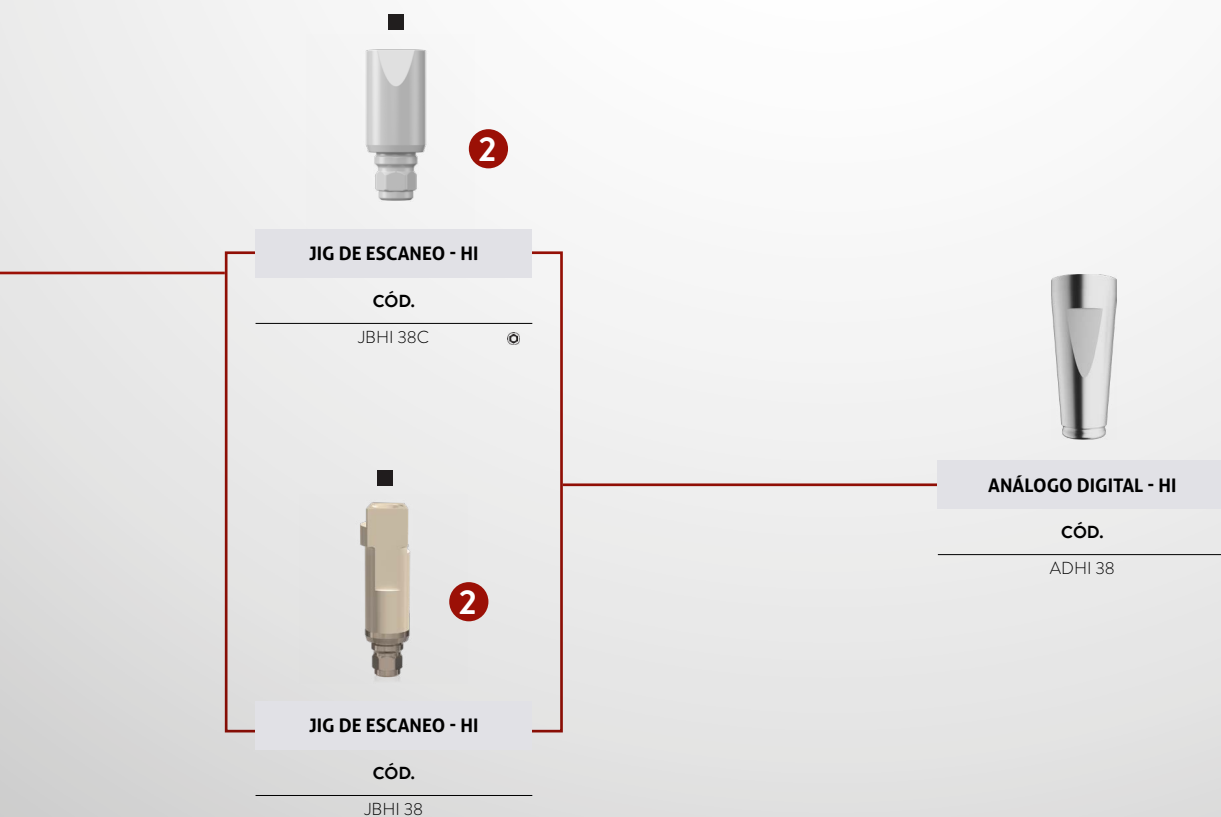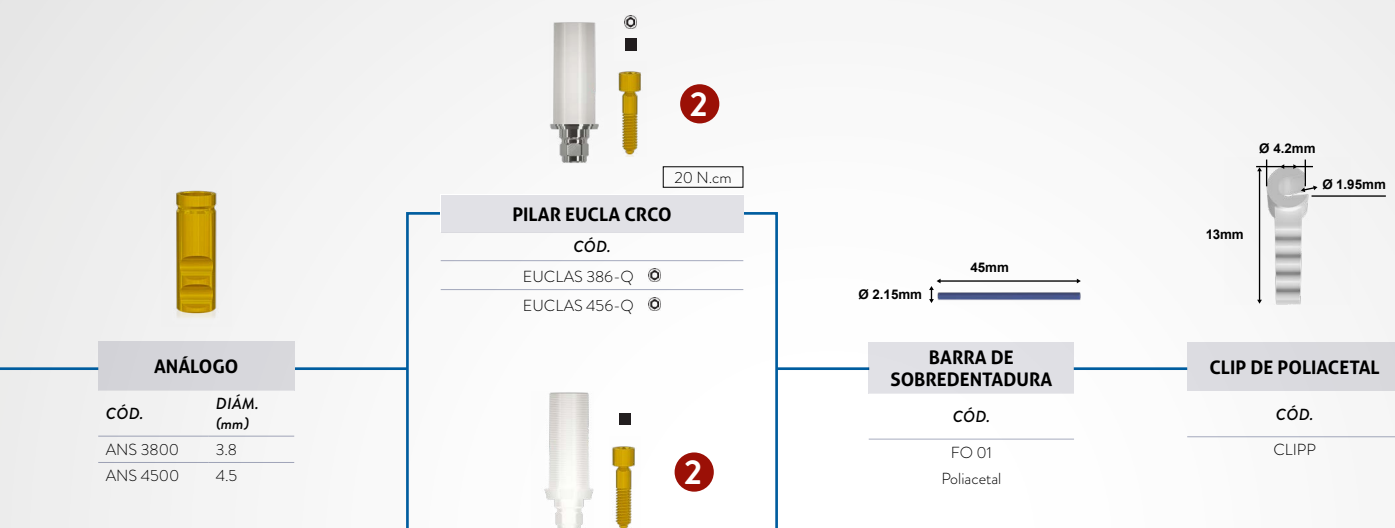

— Secuencia analógica
— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal
⊗ Componente antirrotacional
■ Tornillo cuadrado
⊗ Tornillo de pilar
⊗ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HI

OVERDENTURE BARRA-CLIP - MINI PILAR (ANALÓGICO Y DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SW 3885	SWHI 3885N	3.8	8.5
SW 3810	SWHI 3810N	3.8	10.0
SW 3811	SWHI 3811N	3.8	11.5
SW 3813	SWHI 3813N	3.8	13.0
SW 3815	SWHI 3815N	3.8	15.0
SW 4585	SWHI 4585N	4.5	8.5
SW 4510	SWHI 4510N	4.5	10.0
SW 4511	SWHI 4511N	4.5	11.5
SW 4513	SWHI 4513N	4.5	13.0
SW 4515	SWHI 4515N	4.5	15.0
SW 5085	SWHI 5085N	5.0	8.5
SW 5010	SWHI 5010N	5.0	10.0
SW 5011	SWHI 5011N	5.0	11.5
SW 5013	SWHI 5013N	5.0	13.0
SW 5015	SWHI 5015N	5.0	15.0

MINI PILAR

CÓD.	PLAT. (mm)	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
MAS 3801	3.8	1.0	4.8
MAS 3802	3.8	2.0	4.8
MAS 3803	3.8	3.0	4.8
MAS 3804	3.8	4.0	4.8
MAS 4501	4.5	1.0	4.8
MAS 4502	4.5	2.0	4.8
MAS 4503	4.5	3.0	4.8
MAS 4504	4.5	4.0	4.8

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMA 4855

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)





Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.

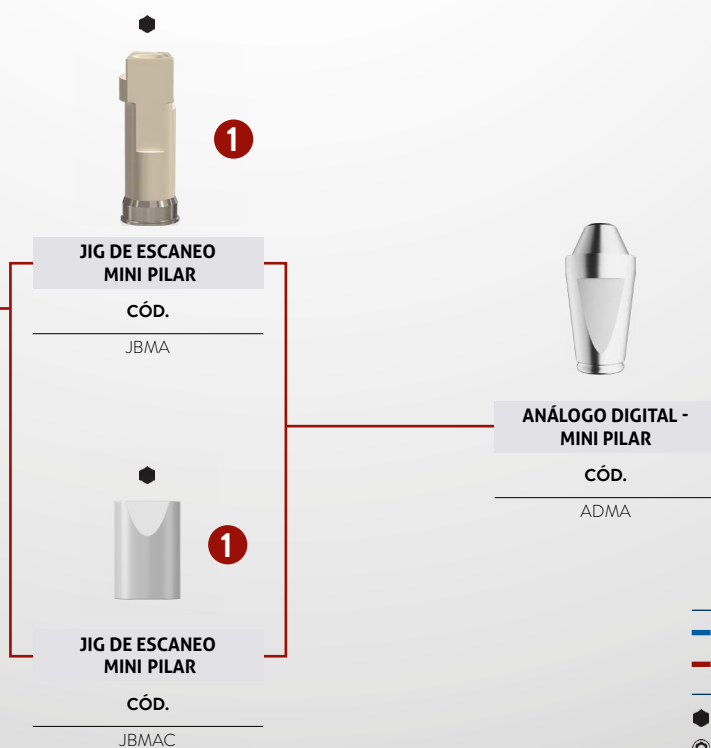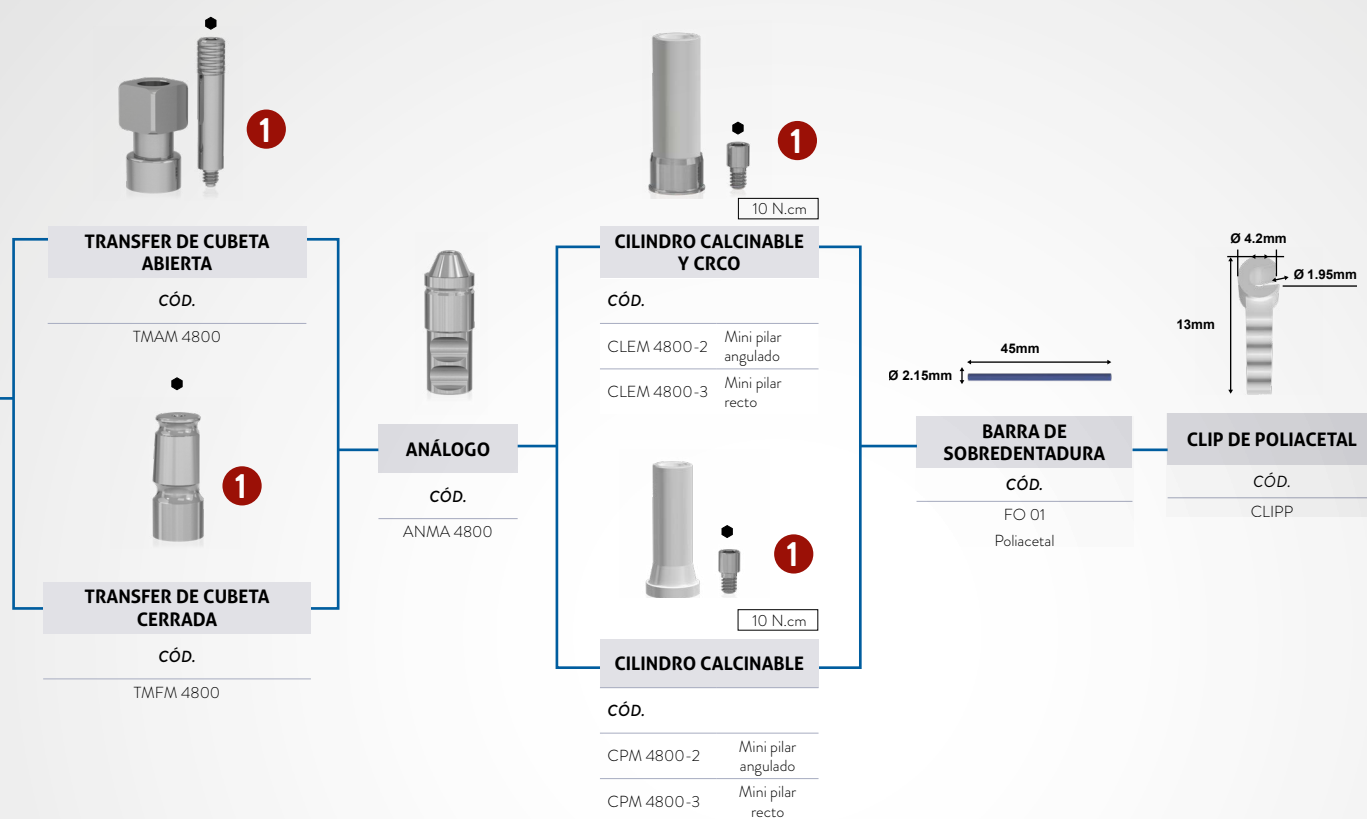

- Secuencia analógica
- Secuencia digital

- ⬢ Tornillo hexagonal
- ⊙ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- Tornillo de pilar
- ⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA HI

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SW 3885	SWHI 3885N	3.8	8.5
SW 3810	SWHI 3810N	3.8	10.0
SW 3811	SWHI 3811N	3.8	11.5
SW 3813	SWHI 3813N	3.8	13.0
SW 3815	SWHI 3815N	3.8	15.0
SW 4585	SWHI 4585N	4.5	8.5
SW 4510	SWHI 4510N	4.5	10.0
SW 4511	SWHI 4511N	4.5	11.5
SW 4513	SWHI 4513N	4.5	13.0
SW 4515	SWHI 4515N	4.5	15.0
SW 5085	SWHI 5085N	5.0	8.5
SW 5010	SWHI 5010N	5.0	10.0
SW 5011	SWHI 5011N	5.0	11.5
SW 5013	SWHI 5013N	5.0	13.0
SW 5015	SWHI 5015N	5.0	15.0



CICATRIZADOR DE TITANIO

CÓD.	ALT. (mm)	DIÁM. (mm)
CIS 3842	2.0	4.0
CIS 3844	4.0	4.0
CIS 3846	6.0	4.0
CIS 4552	2.0	5.0
CIS 4554	4.0	5.0
CIS 4556	6.0	5.0



CICATRIZADOR DE PEEK

CÓD.	DIÁM. PLAT. (mm)	DIÁM. PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPHI 3805	3.8	5.0	5.0
CPHI 3808	3.8	8.0	5.0
CPHI 4508	4.5	8.0	5.0



2

20 N.cm

PILAR EQUATOR HI

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AEHI 3801	3.8	1.0
AEHI 3802	3.8	2.0
AEHI 3803	3.8	3.0
AEHI 3804	3.8	4.0
AEHI 3805	3.8	5.0
AEHI 3806	3.8	6.0

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)


2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)

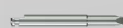

Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)



Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DP	1.6 mm



ACOPLE DE TITANIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DPR	2.9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARILLA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retención extra suave (0.6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retención suave (1.2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retención estándar (1.8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retención fuerte (2.7 kg)



CÁPSULA NEGRA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabajo



CÓD.	CARACTERÍSTICA
CCE 01	Pack de cápsulas (compuesto por 1 unidad del artículo 140 CEV; 1 unidad del artículo 140 CEN y 2 unidades del artículo 140 CET)





CÓD.	CARACTERÍSTICA
485 IC	Clave para inserción y extracción de cápsulas de retención

- Secuencia analógica
- Secuencia digital

- ⬢ Tornillo hexagonal
- ⊙ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- ⬢ Tornillo de pilar
- ⊙ Componente rotacional

Strong SW

CONO MORSE 16°

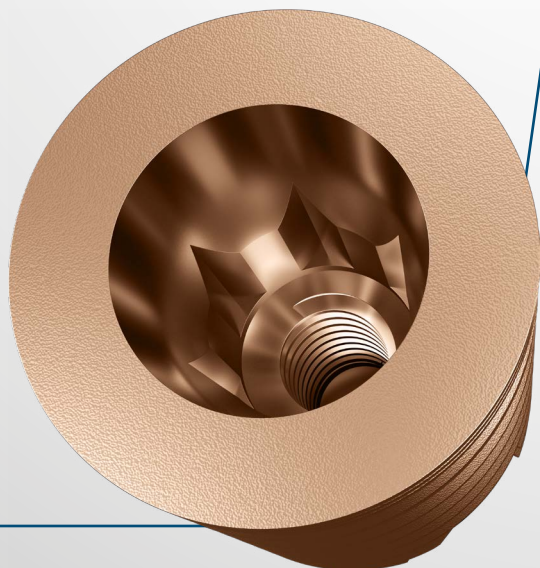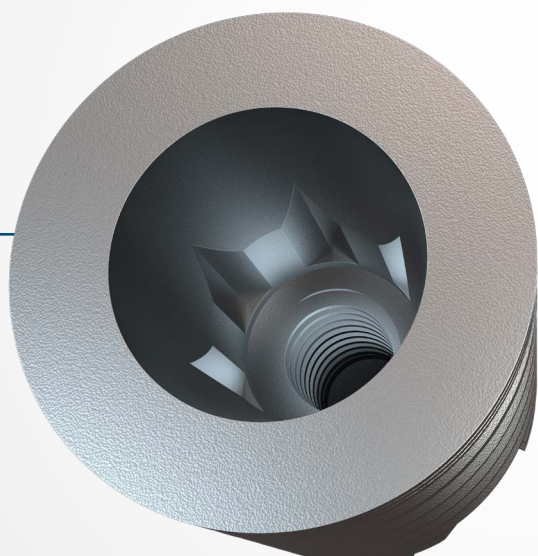

- › Indicado para rehabilitación con carga inmediata o tardía y para implantes únicos o múltiples.
- › También se recomienda para pequeños espacios mesiodistales (incisivos inferiores y laterales superiores).
- › Indicado para todos los tipos de hueso, incluyendo post extracción.
- › Implantes unitarios o múltiples. Contra-ángulo, torquimetro y llave digital.
- › 3 opciones de clave para instalación: (contra-ángulo, trinquete y llave digital).
- › Para instalación al nivel óseo es necesario usar la tapa TIMC.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3.5 mm - Incisivos centrales y laterales
- › 3.8 mm - Incisivos centrales y laterales, caninos y premolares
- › 4.5 mm - Incisivos centrales superiores, caninos, premolares y molares
- › 5.0 mm - Molares

› Instalación infraósea sugerida de 1.5 mm.

- › Ang. interna de 16°.
- › Rotación de las fresas iniciales: 1.500 rpm.
- › Rotación de las fresas: 3.5 a 5.0 mm: 800 rpm.
- › Rotación de los machos de rosca: 25 rpm*.
- › Rotación de inserción: 20 a 40 rpm.
- › Carga inmediata: torque recomendado de 45 a 80 N.cm**.
- › Carga tardía: hasta 45 Ncm.

* En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.

SECUENCIA DE FRESADO

		1500 rpm		800 rpm						25 rpm					

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (ANALÓGICO)

Unitario



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0

CICATRIZADORES DE TITÂNIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3.5	2.0
CIM 3504C	3.5	4.0
CIM 3506C	3.5	6.0
CIM 4502C	4.5	2.0
CIM 4504C	4.5	4.0
CIM 4506C	4.5	6.0

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5.0	4.0
CPCM 0804	8.0	4.0
CPCM 0508	5.0	8.0
CPCM 0808	8.0	8.0

10 N.cm

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.	DIÁM. (mm)
TMAIM 35C	3.5
TMAIM 45C	4.5

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.	DIÁM. (mm)
TMFIM 35C	3.5
TMFIM 45C	4.5

ANÁLOGO

CÓD.
ANMP 3800

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Mediana
(CDHC 24)



20 N.cm

**PILAR ANGULADO
CEMENTADO 17°**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AIAM 3501C-H	3,5	1,0
AIAM 3502C-H	3,5	2,0
AIAM 3503C-H	3,5	3,0
AIAM 3504C-H	3,5	4,0
AIAM 3505C-H	3,5	5,0
AIAM 4501C-H	4,5	1,0
AIAM 4502C-H	4,5	2,0
AIAM 4503C-H	4,5	3,0
AIAM 4504C-H	4,5	4,0
AIAM 4505C-H	4,5	5,0



20 N.cm

PILAR CEMENTADO RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AIMP 3501C-H	3.5	1.0
AIMP 3502C-H	3.5	2.0
AIMP 3503C-H	3.5	3.0
AIMP 3504C-H	3.5	4.0
AIMP 3505C-H	3.5	5.0
AIMP 4501C-H	4.5	1.0
AIMP 4502C-H	4.5	2.0
AIMP 4503C-H	4.5	3.0
AIMP 4504C-H	4.5	4.0
AIMP 4505C-H	4.5	5.0



20 N.cm

**PILAR EUCLA CRCO*
(SIN ROSCA INTERNA)**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAM 3501 - H	3.5	1.0
EUCLAM 3502 - H	3.5	2.0
EUCLAM 3503 - H	3.5	3.0
EUCLAM 3504 - H	3.5	4.0
EUCLAM 4501 - H	4.5	1.0
EUCLAM 4502 - H	4.5	2.0
EUCLAM 4503 - H	4.5	3.0
EUCLAM 4504 - H	4.5	4.0



20 N.cm

**CILINDRO PROVISIONAL
DE TITANIO**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CPTM 3501 - H	3.5	1.0
CPTM 3502 - H	3.5	2.0
CPTM 3503 - H	3.5	3.0
CPTM 3504 - H	3.5	4.0
CPTM 4501 - H	4.5	1.0
CPTM 4502 - H	4.5	2.0
CPTM 4503 - H	4.5	3.0
CPTM 4504 - H	4.5	4.0



1

**TORNILLO DE
LABORATORIO**

CÓD.

PTMAML 16

PTL 16

Rosca de 1.6 mm



1

TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

PT 16

Rosca de 1.6 mm

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (DIGITAL)

Unitario



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3.5	2.0
CIM 3504C	3.5	4.0
CIM 3506C	3.5	6.0
CIM 4502C	4.5	2.0
CIM 4504C	4.5	4.0
CIM 4506C	4.5	6.0



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DE LA PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	N/A	5.0	4.0
CPCM 0804	N/A	8.0	4.0
CPCM 0508	N/A	5.0	8.0
CPCM 0808	N/A	8.0	8.0



1

JIG DE ESCaneo - MT 16°

CÓD.
JBSWCM



1

JIG DE ESCaneo - MT 16°

CÓD.
JBSWCMC

©

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Mediana
(CDHC 24)



ANÁLOGO DIGITAL - MT 16°

CÓD.

ADCM



1

20 N.cm

INTERFAZ TITANIO MT 16° SIRONA

PLATAFORMAA
S.I.N.

BIBLIOTECA SIRONA

ICM 0804

ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0

ICM 2004

ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0



1

20 N.cm

INTERFAZ TITANIO MT 16°

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ALTURA DEL TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMT 0504	0.5X4	0.5	4.0
ICMT 0506	0.5X6	0.5	6.0
ICMT 2004	2.0X4	2.0	4.0
ICMT 2006	2.0X6	2.0	6.0
ICMT 3004	3.0X4	3.0	4.0
ICMT 3006	3.0X6	3.0	6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

⊖ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

PILAR UNIVERSAL (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis cementada unitaria



IMPLANTE


CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3.5	2.0
CIM 3504C	3.5	4.0
CIM 3506C	3.5	6.0
CIM 4502C	4.5	2.0
CIM 4504C	4.5	4.0
CIM 4506C	4.5	6.0

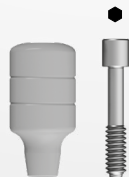

1

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DE LA PLAT. (mm)	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	N/A	5.0	4.0
CPCM 0804	N/A	8.0	4.0
CPCM 0508	N/A	5.0	8.0
CPCM 0808	N/A	8.0	8.0



1

20 N.cm

PILAR UNIVERSAL CEMENTADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALTURA DE CIMENTACIÓN (MM)	ALT. DEL TRANSMUCOSO (mm)
AIM 33401C	3.3	4.0	1.0
AIM 33402C	3.3	4.0	2.0
AIM 33403C	3.3	4.0	3.0
AIM 33404C	3.3	4.0	4.0
AIM 33405C	3.3	4.0	5.0
AIM 33601C	3.3	6.0	1.0
AIM 33602C	3.3	6.0	2.0
AIM 33603C	3.3	6.0	3.0
AIM 33604C	3.3	6.0	4.0
AIM 33605C	3.3	6.0	5.0
AIM 45401C	4.5	4.0	1.0
AIM 45402C	4.5	4.0	2.0
AIM 45403C	4.5	4.0	3.0
AIM 45404C	4.5	4.0	4.0
AIM 45405C	4.5	4.0	5.0
AIM 45601C	4.5	6.0	1.0
AIM 45602C	4.5	6.0	2.0
AIM 45603C	4.5	6.0	3.0
AIM 45604C	4.5	6.0	4.0
AIM 45605C	4.5	6.0	5.0



2

10 N.cm

PILAR UNIVERSAL ANGULADO 17° CEMENTADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. DEL TRANSMUCOSO (mm)	ALTURA DE CIMENTACIÓN (MM)
AAIM 331741C	3.3	1.5	4.0
AAIM 331742C	3.3	2.5	4.0
AAIM 331743C	3.3	3.5	4.0
AAIM 331761C	3.3	1.5	6.0
AAIM 331762C	3.3	2.5	6.0
AAIM 331763C	3.3	3.5	6.0
AAIM 451741C	4.5	1.5	4.0
AAIM 451742C	4.5	2.5	4.0
AAIM 451743C	4.5	3.5	4.0
AAIM 451761C	4.5	1.5	6.0
AAIM 451762C	4.5	2.5	6.0
AAIM 451763C	4.5	3.5	6.0

**TRANSFER EN POLIACETAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
TSIT 3340	3.3	4.0
TSIT 3360	3.3	6.0
TSIT 4540	4.5	4.0
TSIT 4560	4.5	6.0

**ANÁLOGO**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3.3	4.0
ASIT 3360	3.3	6.0
ASIT 4540	4.5	4.0
ASIT 4560	4.5	6.0

**CILINDRO PROVISIONAL EN ACRÍLICO**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3.3	4.0
CPSIT 3360	3.3	6.0
CPSIT 4540	4.5	4.0
CPSIT 4560	4.5	6.0

**CILINDRO CALCINABLE EN POLIACETAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3.3	4.0
CCSIT 3360	3.3	6.0
CCSIT 4540	4.5	4.0
CCSIT 4560	4.5	6.0

**JIG DE ESCANEO PILAR UNIVERSAL**

CÓD.		DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
JBSIT 3340	⊙	3.3	4.0
JBSIT 3360	⊙	3.3	6.0
JBSIT 4540	⊙	4.5	4.0
JBSIT 4560	⊙	4.5	6.0

**ANÁLOGO DIGITAL PILAR UNIVERSAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3.3	4.0
ADUA 3360	3.3	6.0
ADUA 4540	4.5	4.0
ADUA 4560	4.5	6.0

LLAVES



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Mediana
(CDHC 24)



Llave Contra Ángulo
Hex. 0,9mm Mediana
(CTH 0924)



Llave de Trinquete
Hex 0,9 Corta
(CCH 0920)



Llave de Trinquete
Hex 0,9 Larga
(CCH 0924)

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

⬢ Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

MINI-PILAR- INTERMEDIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis parciales o totales atornilladas



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0



2

20 N.cm

MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 4801 C	4.8	1.0
MAM 4802 C	4.8	2.0
MAM 4803 C	4.8	3.0
MAM 4804 C	4.8	4.0



3

20 N.cm

MINI PILAR ANGULADO INDEXADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ÁNG.
MAAM 4802I	4.8	2.0	17°
MAAM 4803I	4.8	3.0	17°
MAAM 4804I	4.8	4.0	17°
MAAM 4832I	4.8	2.0	30°
MAAM 4833I	4.8	3.0	30°
MAAM 4834I	4.8	4.0	30°

Utilizar la llave hexagonal 1.2 mm



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFM 4800



1

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855
Perfil de 5.0 mm

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Medio
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)




Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

3



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Corto
(CTHA 1220)

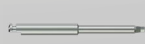

Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Me-
dio (CTHA 1224)



Llave de Catraca Hex.
1.2mm Est. Corto
(CHTM 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Medio
(CHTM 24)

**ANÁLOGO**

CÓD.

ANMA 4800



1

10 N.cm

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

PTM 4800-3	Para mini pilar recto
PTMS 4800-3	Para mini pilar recto Indicado para soldadura por láser.
PTM 4800-2	Para mini pilar angulado



1

10 N.cm

CILINDRO CALCINABLE Y CRCO


CÓD.

CPM 4800-3	Plástico/Para mini pilar recto
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto/ Para mini pilar recto
CPM 4800-2	Plástico/Para mini pilar angulado
CLEM 4800-2	Cromo-cobalto/ Para mini pilar angulado

**PROTECTOR DE PULIDO**

CÓD.

PPM 01

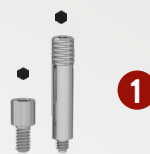

1

TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

DIÁM.
(mm)

PL 1405 Curto	1,4
PTMA 13-1 Largo	1,4



1

10 N.cm

TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

COMP.
(mm)

PRH 20	2,0	Para mini pilar angulado
PRH 30	3,0	Para mini pilar recto



1

JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.

JBMA



1

JIG DE ESCANEO MINI PILAR


CÓD.

JBMAC

**ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR**

CÓD.

ADMA

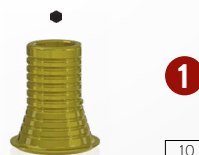

1

10 N.cm

INTERFAZ TITANIO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMAT 04	4,0
IMAT 06	6,0



1

10 N.cm

INTERFAZ CROMO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMAC 04	4,0
IMAC 06	6,0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊗ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

MICRO MINI PILAR - INTERMEDIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitario, parciales o totales atornilladas



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0



2

20 N.cm

MICRO MINI PILAR

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 3301	3.5	1.0
MAM 3302	3.5	2.0
MAM 3303	3.5	3.0
MAM 3304	3.5	4.0



1

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMM 33



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMM 33

TMM 3306



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMMF 33

TMMF 3306

LLAVES


1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)

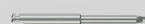

Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)



ANÁLOGO
CÓD.
AMMA 33



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

CPMT 33

CPMT 3306



CILINDRO CALCINABLE Y CRCRO

CÓD.

CPMC 33 Plástico

CPMM 33 Cromo-Cobalto

CPMC 3306 Plástico

CPMM 3306 Cromo-Cobalto



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

PTMMA 14



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

ALT. (mm)

PRH 3035

2.0



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.

PPMM 33

PPMM 3306



JIG DE ESCANEÓ MICRO MINI PILAR

CÓD.

JBMMMA

JBMMMA 06



JIG DE ESCANEÓ MICRO MINI PILAR

CÓD.

JBMMMAC

JBMMMA 06C



ANÁLOGO DIGITAL - MICRO MINI PILAR

CÓD.

ADMMA



INTERFAZ TITANIO MICRO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMMAT 04

4.0

IMMAT 06

6.0

IMMAT 0406

4.0

IMMAT 0606

6.0



INTERFAZ CROMO MICRO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMMAC 04

4.0

IMMAC 06

6.0

IMMAC 0406

4.0

IMMAC 0606

6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

Tornillo hexagonal

Componente antirrotacional

Tornillo cuadrado

Tornillo de pilar

Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

PILAR MULTIFUNCIONAL - INTERMEDIO PROTÉSICO ATORNILLADO (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Prótesis unitario, parciales o totales atornilladas



2

32 N.cm



1



1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAAM 00

TMAAM 06



1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFAM 00

TMFAM 06

IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0

PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AMCM 4801	4.8	1.0
AMCM 4802	4.8	2.0
AMCM 4803	4.8	3.0
AMCM 4804	4.8	4.0

Utilizar la llave hexagona 1.6 mm.

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PAM 48

LLAVES

1



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Carraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Carraca
Hex. 1.2mm Mediana
(CDHC 24)

2



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.6mm Corta
(CTH 1620)



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.6mm Mediana
(CTH 1624)




Llave de Carraca
Hex. 1.6mm Corta
(CCH 1620)



Llave de Carraca
Hex. 1.6mm Mediana
(CCH 1624)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

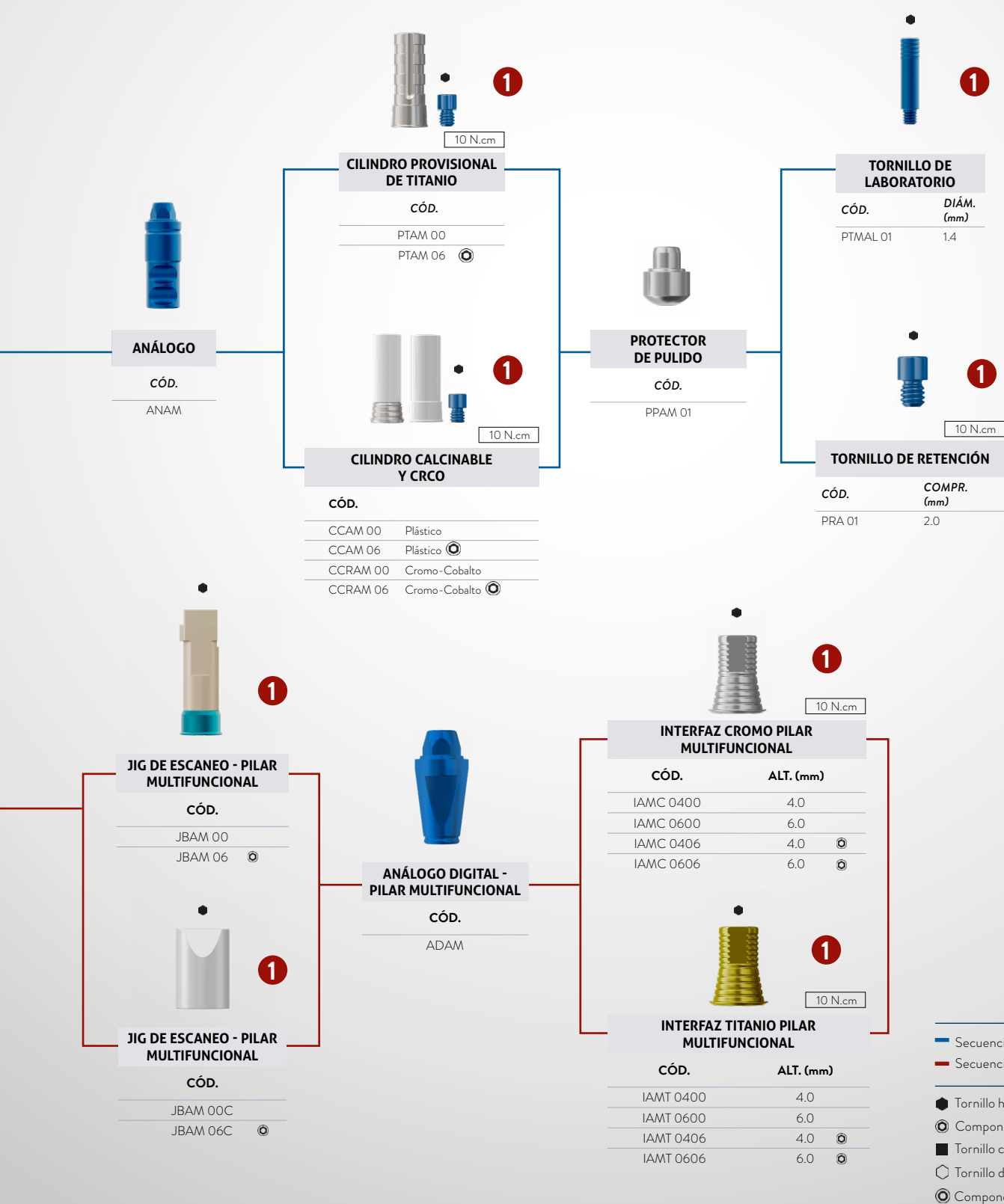

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

OVERDENTURE BARRA-CLIP (MINI PILAR) - (ANALÓGICO Y DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0



2

20 N.cm

MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAM 4801 C	4.8	1.0
MAM 4802 C	4.8	2.0
MAM 4803 C	4.8	3.0
MAM 4804 C	4.8	4.0



3

MINI PILAR ANGULADO INDEXADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ÁNG.
MAAM 4802I	4.8	2.0	17°
MAAM 4803I	4.8	3.0	17°
MAAM 4804I	4.8	4.0	17°
MAAM 4832I	4.8	2.0	30°
MAAM 4833I	4.8	3.0	30°
MAAM 4834I	4.8	4.0	30°

Utilizar la llave hexagonal 1.2 mm



1

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMA 4855
Perfil de 5.0 mm

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

3



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Corto
(CTHA 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Me-
dio (CTHA 1224)




Llave de Catraca Hex.
1.2mm Est. Corto
(CHTMA 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Medio
(CHTMA 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

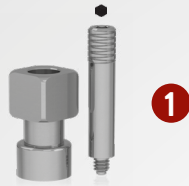

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



CILINDRO CALCINABLE Y CRCO

CÓD.

CLEM 4800-2 Mini pilar angulado

CLEM 4800-3 Mini pilar recto



CILINDRO CALCINABLE

CÓD.

CPM 4800-2 Mini pilar angulado


CPM 4800-3 Mini pilar recto



BARRA DE SOBREDENTADURA

CÓD.

FO 01
Poliacetal

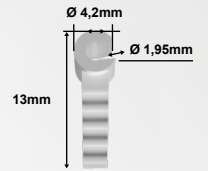

CLIP DE POLIACETAL

CÓD.

CLIPP

CONO MORSE 16°



JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.

JBMA



JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL MINI PILAR

CÓD.

ADMA



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.	COMP. (mm)	
PRH 20	2.0	Para mini pilar angulado
PRH 30	3.0	Para mini pilar recto

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA MT 16°

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE

CÓD. SW	CÓD. SW PLUS	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
SWCM 3585	SWCM 3585N	3.5	8.5
SWCM 3510	SWCM 3510N	3.5	10.0
SWCM 3511	SWCM 3511N	3.5	11.5
SWCM 3513	SWCM 3513N	3.5	13.0
SWCM 3515	SWCM 3515N	3.5	15.0
SWCM 3885	SWCM 3885N	3.8	8.5
SWCM 3810	SWCM 3810N	3.8	10.0
SWCM 3811	SWCM 3811N	3.8	11.5
SWCM 3813	SWCM 3813N	3.8	13.0
SWCM 3815	SWCM 3815N	3.8	15.0
SWCM 4585	SWCM 4585N	4.5	8.5
SWCM 4510	SWCM 4510N	4.5	10.0
SWCM 4511	SWCM 4511N	4.5	11.5
SWCM 4513	SWCM 4513N	4.5	13.0
SWCM 4515	SWCM 4515N	4.5	15.0
SWCM 5085	SWCM 5085N	5.0	8.5
SWCM 5010	SWCM 5010N	5.0	10.0
SWCM 5011	SWCM 5011N	5.0	11.5
SWCM 5013	SWCM 5013N	5.0	13.0
SWCM 5015	SWCM 5015N	5.0	15.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIM 3502C	3.5	2.0
CIM 3504C	3.5	4.0
CIM 3506C	3.5	6.0
CIM 4502C	4.5	2.0
CIM 4504C	4.5	4.0
CIM 4506C	4.5	6.0



1

10 N.cm

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPCM 0504	5.0	4.0
CPCM 0804	8.0	4.0
CPCM 0508	5.0	8.0
CPCM 0808	8.0	8.0



2

20 N.cm

PILAR EQUATOR MT 16°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AECM 3501	3.5	1.0
AECM 3502	3.5	2.0
AECM 3503	3.5	3.0
AECM 3504	3.5	4.0
AECM 3505	3.5	5.0
AECM 3506	3.5	6.0

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)


2



Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)

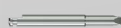

Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)



Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DP	1.6 mm



ACOPLE DE TITANIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DPR	2.9 mm



SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARILLA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retención extra suave (0.6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retención suave (1.2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retención estándar (1.8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retención fuerte (2.7 kg)



CÁPSULA NEGRA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabajo



CÓD.
CCE 01

CARACTERÍSTICA
Pack de cápsulas (compuesto por 1 unidad del artículo 140 CEV; 1 unidad del artículo 140 CEN y 2 unidades del artículo 140 CET)




CÓD.
485 IC

CARACTERÍSTICA
Clave para inserción y extracción de cápsulas de retención

-  Secuencia analógica
-  Secuencia digital
-  Tornillo hexagonal
-  Componente antirrotacional
-  Tornillo cuadrado
-  Tornillo de pilar
-  Componente rotacional

Strong swC

CONO MORSE 11.5°

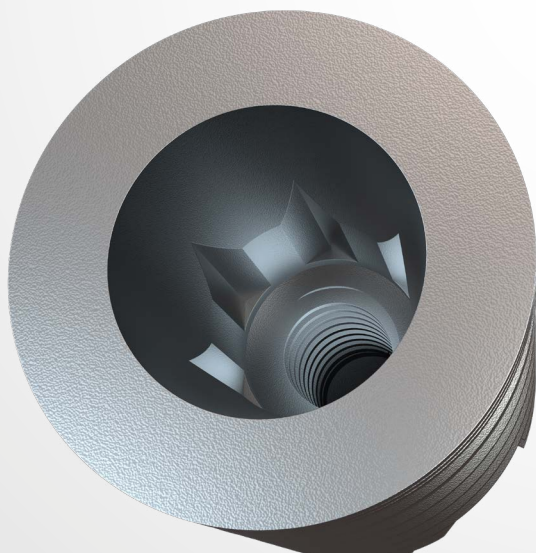

- › Indicado para rehabilitación con carga inmediata o tardía y para implantes unitarios o múltiples.
- › También se recomienda para pequeños espacios mesiodistales (incisivos inferiores y laterales superiores).
- › Indicado para todos los tipos de hueso, incluyendo post extracción.
- › Implantes unitarios o múltiples.
- › 3 opciones de llave para instalación (contra-ángulo, torquimetro, llave digital).
- › Para instalación al nivel óseo es necesario usar la tapa TIMU 0012

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:

- › 3.5 mm - Incisivos centrales y laterales
- › 3.8 mm - Incisivos centrales y laterales, caninos y premolares
- › 4.5 mm - Incisivos centrales superiores, caninos, premolares y molares
- › 5.0 mm - Molares

› Instalación infraósea sugerida de 1.5 mm.

- › Ang. interna de 11.5°.
- › Rotación de las fresas iniciales: 1.500 rpm.
- › Rotación de las fresas: 3.5 a 5.0 mm: 800 rpm.
- › Rotación de los machos de rosca: 25 rpm*.
- › Rotación de inserción: 20 a 40 rpm.
- › Carga inmediata: torque recomendado de 45 a 80 N.cm**.
- › Carga tardía: hasta 45 Ncm

* En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se deberespetar el torque máximo.

** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.

SECUENCIA DE FRESADO

Strong SWC


		1500 rpm		800 rpm					25 rpm				
													
PLAT. (mm)	DIÁM. (mm)	FRLD 2020 Ø 2.0	FHD 2015 Ø 2.0	FRWD 35 Ø 3.05	FRWD 38 Ø 3.3	FCWD 41 Ø 4.1	FRWD 45 Ø 4.0	FRWD 50 Ø 4.25	CMRIW 35 Ø 3.5	CMRIW 37 Ø 3.75	CMRIW 38 Ø 3.8	CMRIW 45 Ø 4.5	CMRIW 50 Ø 5.0
3.5	3.5	●	●	●					●				
3.8	3.8	●	●	●	●						●		
4.5	4.5	●	●	●	●		●					●	
5.0	5.0	●	●	●	●		●	●					●



**Strong
SWC**

- En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.


INFORMACIONES TÉCNICAS

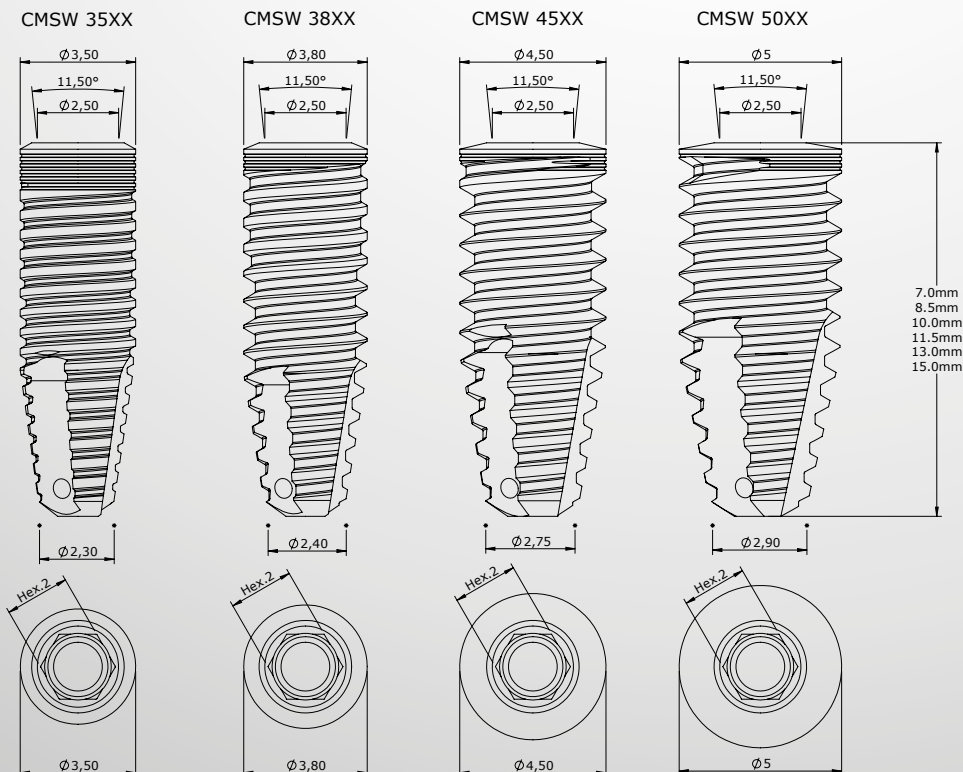

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

SECUENCIA DIRECTA SOBRE EL IMPLANTE (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Unitario

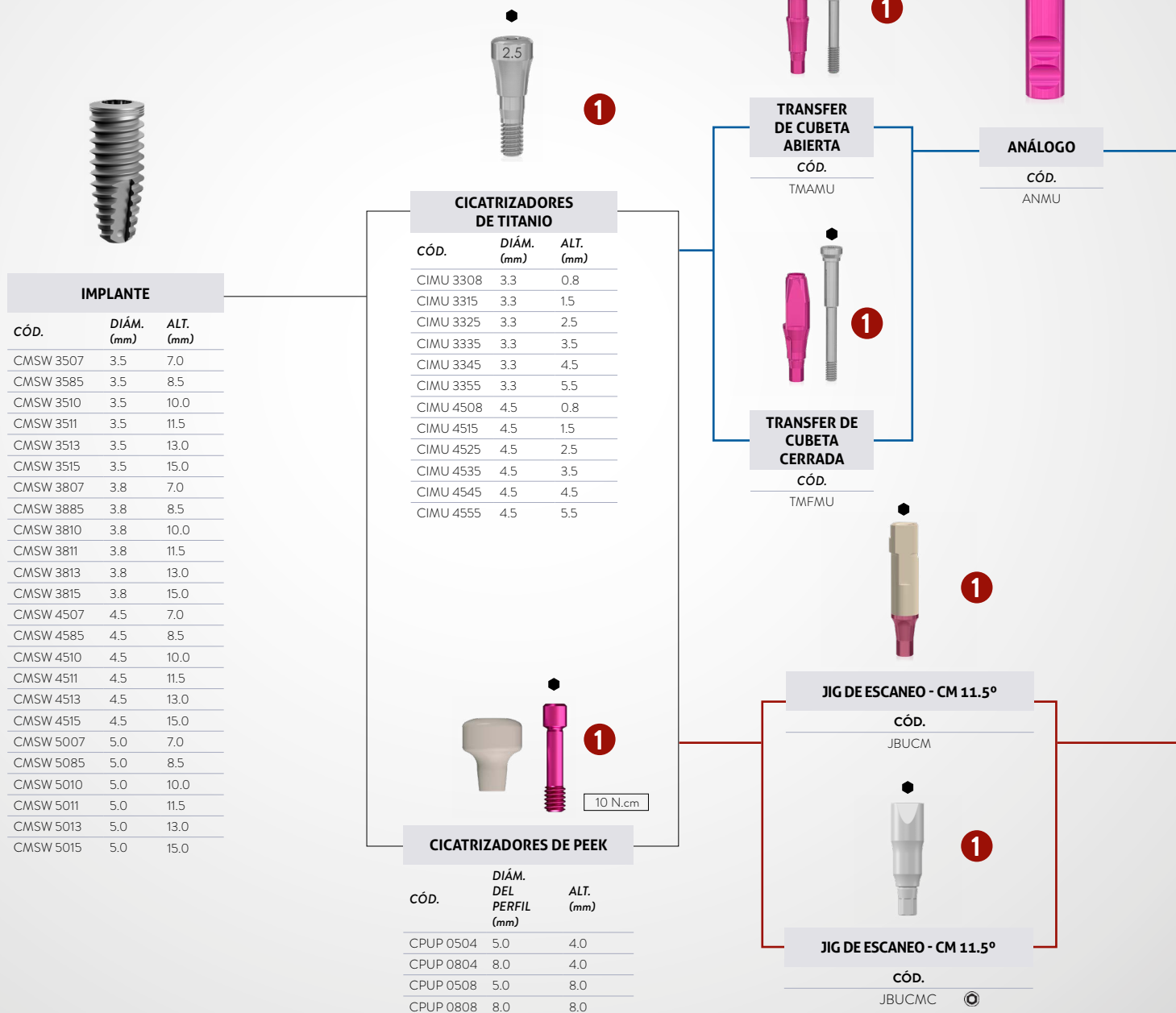

LLAVES




*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CPTMU 3501-H	3.5	1.0
CPTMU 3502-H	3.5	2.0
CPTMU 3503-H	3.5	3.0
CPTMU 3504-H	3.5	4.0
CPTMU 4501-H	4.5	1.0
CPTMU 4502-H	4.5	2.0
CPTMU 4503-H	4.5	3.0
CPTMU 4504-H	4.5	4.0

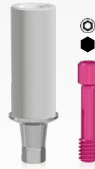

PILAR EUCLA

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
EUCLAMU 3501-H	3.8	1.0
EUCLAMU 3502-H	3.8	2.0
EUCLAMU 3503-H	3.8	3.0
EUCLAMU 3504-H	3.8	4.0
EUCLAMU 4501-H	4.5	1.0
EUCLAMU 4502-H	4.5	2.0
EUCLAMU 4503-H	4.5	3.0
EUCLAMU 4504-H	4.5	4.0



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.	DIÁM. (mm)
PTM 18	1.8

Para Cilindro Provisional.



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.	DIÁM. (mm)
PTM 1816	1.8



ANÁLOGO DIGITAL CM 11.5°

CÓD.
ADCMU



INTERFAZ TITANIO CM 11.5° SIRONA

PLATAFORMAA S.I.N.	BIBLIOTECA SIRONA
ICMU 0804	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0
ICMU 2004	ATOS 3.5/4.0 – ATOS 4.5/5.0



INTERFAZ TITANIO CM 11.5°

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ALTURA DEL TRANSMUCOSO (mm)	ALT. (mm)
ICMUT 0504	0.5X4	0.5	4.0
ICMUT 0506	0.5X6	0.5	6.0
ICMUT 2004	2.0X4	2.0	4.0
ICMUT 2006	2.0X6	2.0	6.0
ICMUT 3004	3.0X4	3.0	4.0
ICMUT 3006	3.0X6	3.0	6.0

CONO MORSE 11.5°

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

SECUENCIA CON INTERMEDIARIO PROTÉSICO PILAR UNIVERSAL (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Unitaria cementada



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CMSW 3507	3.5	7.0
CMSW 3585	3.5	8.5
CMSW 3510	3.5	10.0
CMSW 3511	3.5	11.5
CMSW 3513	3.5	13.0
CMSW 3515	3.5	15.0
CMSW 3807	3.8	7.0
CMSW 3885	3.8	8.5
CMSW 3810	3.8	10.0
CMSW 3811	3.8	11.5
CMSW 3813	3.8	13.0
CMSW 3815	3.8	15.0
CMSW 4507	4.5	7.0
CMSW 4585	4.5	8.5
CMSW 4510	4.5	10.0
CMSW 4511	4.5	11.5
CMSW 4513	4.5	13.0
CMSW 4515	4.5	15.0
CMSW 5007	5.0	7.0
CMSW 5085	5.0	8.5
CMSW 5010	5.0	10.0
CMSW 5011	5.0	11.5
CMSW 5013	5.0	13.0
CMSW 5015	5.0	15.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5



1

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DEL PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5.0	4.0
CPUP 0804	8.0	4.0
CPUP 0508	5.0	8.0
CPUP 0808	8.0	8.0



2

10 N.cm

PILAR UNIVERSAL ANGULADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. TRANSMUCOSA MAYOR (MM)	ALT. TRANSMUCOSA MENOR (MM)	ALT. CEMENTACIÓN (MM)	ANG.
APASIT 341715	3.3	2.6	1.5	4.0	17°
APASIT 341725	3.3	3.6	2.5	4.0	17°
APASIT 341735	3.3	4.6	3.5	4.0	17°
APASIT 343015	3.3	3.15	1.5	4.0	30°
APASIT 343025	3.3	4.15	2.5	4.0	30°
APASIT 343035	3.3	5.15	3.5	4.0	30°
APASIT 361715	3.3	2.6	1.5	6.0	17°
APASIT 361725	3.3	3.6	2.5	6.0	17°
APASIT 361735	3.3	4.6	3.5	6.0	17°
APASIT 363015	3.3	3.15	1.5	6.0	30°
APASIT 363025	3.3	4.15	2.5	6.0	30°
APASIT 363035	3.3	5.15	3.5	6.0	30°
APASIT 441715	4.5	3.0	1.5	4.0	17°
APASIT 441725	4.5	4.0	2.5	4.0	17°
APASIT 441735	4.5	5.0	3.5	4.0	17°
APASIT 443015	4.5	3.75	1.5	4.0	30°
APASIT 443025	4.5	4.75	2.5	4.0	30°
APASIT 443035	4.5	5.75	3.5	4.0	30°
APASIT 461715	4.5	3.0	1.5	6.0	17°
APASIT 461725	4.5	4.0	2.5	6.0	17°
APASIT 461735	4.5	5.0	3.5	6.0	17°
APASIT 463015	4.5	3.75	1.5	6.0	30°
APASIT 463025	4.5	4.75	2.5	6.0	30°
APASIT 463035	4.5	5.75	3.5	6.0	30°

Utilizar la llave hexagonal 0.9 mm

LLAVES



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1,2 mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Corta
(CDHC 20)



Llave de Carraca
Hex. 1,2 mm Mediana
(CDHC 24)



Llave Contra Ángulo
Hex. 0.9mm Mediana
(CTH 0924)



Llave de Trinquete
Hex 0.9 Corta
(CCH 0920)



Llave de Trinquete
Hex 0.9 Larga
(CCH 0924)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.



2

10 N.cm

**PILAR UNIVERSAL RECTO
TORNILLO PASANTE**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. CEMENTACIÓN (mm)	ALT. TRANSMUCOSA (mm)
APSIT 334008	3.3	4.0	0.8
APSIT 334015	3.3	4.0	1.5
APSIT 334025	3.3	4.0	2.5
APSIT 334035	3.3	4.0	3.5
APSIT 334045	3.3	4.0	4.5
APSIT 334055	3.3	4.0	5.5
APSIT 336008	3.3	6.0	0.8
APSIT 336015	3.3	6.0	1.5
APSIT 336025	3.3	6.0	2.5
APSIT 336035	3.3	6.0	3.5
APSIT 336045	3.3	6.0	4.5
APSIT 336055	3.3	6.0	5.5
APSIT 454008	4.5	4.0	0.8
APSIT 454015	4.5	4.0	1.5
APSIT 454025	4.5	4.0	2.5
APSIT 454035	4.5	4.0	3.5
APSIT 454045	4.5	4.0	4.5
APSIT 454055	4.5	4.0	5.5
APSIT 456008	4.5	6.0	0.8
APSIT 456015	4.5	6.0	1.5
APSIT 456025	4.5	6.0	2.5
APSIT 456035	4.5	6.0	3.5
APSIT 456045	4.5	6.0	4.5
APSIT 456055	4.5	6.0	5.5

Utilizar la llave hexagonal 0.9 mm



1

20 N.cm

**PILAR UNIVERSAL
RECTO**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. CEMENTACIÓN (mm)	ALT. TRANSMUCOSA (mm)
ASIT 334008	3.3	4.0	0.8
ASIT 334015	3.3	4.0	1.5
ASIT 334025	3.3	4.0	2.5
ASIT 334035	3.3	4.0	3.5
ASIT 334045	3.3	4.0	4.5
ASIT 334055	3.3	4.0	5.5
ASIT 336008	3.3	6.0	0.8
ASIT 336015	3.3	6.0	1.5
ASIT 336025	3.3	6.0	2.5
ASIT 336035	3.3	6.0	3.5
ASIT 336045	3.3	6.0	4.5
ASIT 336055	3.3	6.0	5.5
ASIT 454008	4.5	4.0	0.8
ASIT 454015	4.5	4.0	1.5
ASIT 454025	4.5	4.0	2.5
ASIT 454035	4.5	4.0	3.5
ASIT 454045	4.5	4.0	4.5
ASIT 454055	4.5	4.0	5.5
ASIT 456008	4.5	6.0	0.8
ASIT 456015	4.5	6.0	1.5
ASIT 456025	4.5	6.0	2.5
ASIT 456035	4.5	6.0	3.5
ASIT 456045	4.5	6.0	4.5
ASIT 456055	4.5	6.0	5.5


**TRANSFER
EN POLIACETAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
TSIT 3340	3.3	4.0
TSIT 3360	3.3	6.0
TSIT 4540	4.5	4.0
TSIT 4560	4.5	6.0


ANÁLOGO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
ASIT 3340	3.3	4.0
ASIT 3360	3.3	6.0
ASIT 4540	4.5	4.0
ASIT 4560	4.5	6.0


**CILINDRO PROVISIONAL
EN ACRÍLICO**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CPSIT 3340	3.3	4.0
CPSIT 3360	3.3	6.0
CPSIT 4540	4.5	4.0
CPSIT 4560	4.5	6.0


**CILINDRO CALCINABLE
EN POLIACETAL**

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CCSIT 3340	3.3	4.0
CCSIT 3360	3.3	6.0
CCSIT 4540	4.5	4.0
CCSIT 4560	4.5	6.0


**JIG DE ESCANEO
PILAR UNIVERSAL**

CÓD.	DIÁM (mm)	ALT. (mm)
JBSIT 3340	3.3	4.0
JBSIT 3360	3.3	6.0
JBSIT 4540	4.5	4.0
JBSIT 4560	4.5	6.0


**ANÁLOGO DIGITAL
PILAR UNIVERSAL**

CÓD.	DIÁM (mm)	ALT. (mm)
ADUA 3340	3.3	4.0
ADUA 3360	3.3	6.0
ADUA 4540	4.5	4.0
ADUA 4560	4.5	6.0

CONO MORSE 11.5°

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

SECUENCIA CON INTERMEDIARIO PROTÉSICO - PILAR MULTIFUNCIONAL (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Unitaria, Múltiple parcial o total atornillado



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CMSW 3507	3.5	7.0
CMSW 3585	3.5	8.5
CMSW 3510	3.5	10.0
CMSW 3511	3.5	11.5
CMSW 3513	3.5	13.0
CMSW 3515	3.5	15.0
CMSW 3807	3.8	7.0
CMSW 3885	3.8	8.5
CMSW 3810	3.8	10.0
CMSW 3811	3.8	11.5
CMSW 3813	3.8	13.0
CMSW 3815	3.8	15.0
CMSW 4507	4.5	7.0
CMSW 4585	4.5	8.5
CMSW 4510	4.5	10.0
CMSW 4511	4.5	11.5
CMSW 4513	4.5	13.0
CMSW 4515	4.5	15.0
CMSW 5007	5.0	7.0
CMSW 5085	5.0	8.5
CMSW 5010	5.0	10.0
CMSW 5011	5.0	11.5
CMSW 5013	5.0	13.0
CMSW 5015	5.0	15.0



2

32 N.cm

PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AMCMU 4808	4.8	0.8
AMCMU 4815	4.8	1.5
AMCMU 4825	4.8	2.5
AMCMU 4835	4.8	3.5
AMCMU 4845	4.8	4.5
AMCMU 4855	4.8	5.5

Utilice la llave hexagonal de
1.6 mm del kit de prótesis



1

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PAM 48

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.6mm Corta
(CTH 1620)



Llave de Contra-ángulo
Hex. 1.6mm Mediana
(CTH 1624)



Llave de Carraca
Hex. 1.6mm Corta
(CCH 1620)



Llave de Carraca
Hex. 1.6mm Mediana
(CCH 1624)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.
TMAAM 00
TMAAM 06



ANÁLOGO

CÓD.
ANAM



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.
TMFAM 00
TMFAM 06



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.
PTAM 00
PTAM 06



CILINDRO CALCINABLE Y CRCO

CÓD.
CCAM 00 Plástico
CCAM 06 Plástico
CCRAM 00 Cromo Cobalto
CCRAM 06 Cromo Cobalto



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD. ALT. (mm)
PRA 01 2.0



PROTECTOR DE PULIDO

CÓD.
PPAM 01



TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.
PTMAL 01



JIG DE ESCANEO - PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.
JBAM 00
JBAM 06



JIG DE ESCANEO - PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.
JBAM 00C
JBAM 06C



ANÁLOGO DIGITAL - PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.
ADAM



INTERFAZ CROMO PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)
IAMC 0400	4.0
IAMC 0600	6.0
IAMC 0406	4.0
IAMC 0606	6.0



INTERFAZ TITANIO PILAR MULTIFUNCIONAL

CÓD.	ALT. (mm)
IAMT 0400	4.0
IAMT 0600	6.0
IAMT 0406	4.0
IAMT 0606	6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

SECUENCIA CON INTERMEDIO PROTÉSICO - MINI PILAR (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Múltiples parciales o totales atornilladas



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CMSW 3507	3.5	7.0
CMSW 3585	3.5	8.5
CMSW 3510	3.5	10.0
CMSW 3511	3.5	11.5
CMSW 3513	3.5	13.0
CMSW 3515	3.5	15.0
CMSW 3807	3.8	7.0
CMSW 3885	3.8	8.5
CMSW 3810	3.8	10.0
CMSW 3811	3.8	11.5
CMSW 3813	3.8	13.0
CMSW 3815	3.8	15.0
CMSW 4507	4.5	7.0
CMSW 4585	4.5	8.5
CMSW 4510	4.5	10.0
CMSW 4511	4.5	11.5
CMSW 4513	4.5	13.0
CMSW 4515	4.5	15.0
CMSW 5007	5.0	7.0
CMSW 5085	5.0	8.5
CMSW 5010	5.0	10.0
CMSW 5011	5.0	11.5
CMSW 5013	5.0	13.0
CMSW 5015	5.0	15.0



2

20 N.cm

MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4.8	0.8
MAMU 4815	4.8	1.5
MAMU 4825	4.8	2.5
MAMU 4835	4.8	3.5
MAMU 4845	4.8	4.5
MAMU 4855	4.8	5.5



3

20 N.cm

MINI PILAR ANGULADO INDEXADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4.8	1.5	17°
MAMA 1725I	4.8	2.5	17°
MAMA 1735I	4.8	3.5	17°
MAMA 3015I	4.8	1.5	30°
MAMA 3025I	4.8	2.5	30°
MAMA 3035I	4.8	3.5	30°

*Utilizar la llave hexagonal 1.2 mm



PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

3



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Corto
(CTHA 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Me-
dio (CTHA 1224)



Llave de Catraca Hex.
1.2mm Est. Corto
(CHTMA 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Medio
(CHTMA 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.


TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800

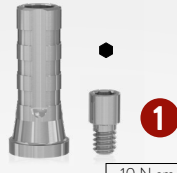

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CÓD.

PTM 4800-2 Para mini pilar angulado
PTM 4800-3 Para mini pilar recto



CILINDRO CALCINABLEY CR-CO

CÓD.


CPM 4800-2 Para mini pilar angulado
CPM 4800-3 Para mini pilar recto
CLEM 4800-2 Cromo Cobalto Para mini pilar angulado
CLEM 4800-3 Cromo Cobalto Para mini pilar recto



PROTECTOR DE POLIMENTO

CÓD.


PPM 01

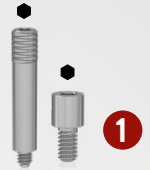

TORNILLO DE LABORATORIO

CÓD.

PL 1405 corto
PTMA 13-1 largo

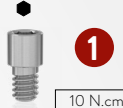

TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

ALT. (mm)

PRH 20	2.0	Para mini pilar angulado
PRH 30	3.0	Para mini pilar recto



JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.

JBMA



JIG DE ESCANEO MINI PILAR

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR

CÓD.

ADMA



INTERFAZ TITANIO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMAT 04	4.0
IMAT 06	6.0



INTERFAZ CROMO MINI PILAR

CÓD.

ALT. (mm)

IMAC 04	4.0
IMAC 06	6.0

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

SECUENCIA CON INTERMEDIO PROTÉSICO - MICRO MINI PILAR (ANALÓGICO Y DIGITAL)

Unitaria, múltiples parciales o totales atornilladas



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CMSW 3507	3.5	7.0
CMSW 3585	3.5	8.5
CMSW 3510	3.5	10.0
CMSW 3511	3.5	11.5
CMSW 3513	3.5	13.0
CMSW 3515	3.5	15.0
CMSW 3807	3.8	7.0
CMSW 3885	3.8	8.5
CMSW 3810	3.8	10.0
CMSW 3811	3.8	11.5
CMSW 3813	3.8	13.0
CMSW 3815	3.8	15.0
CMSW 4507	4.5	7.0
CMSW 4585	4.5	8.5
CMSW 4510	4.5	10.0
CMSW 4511	4.5	11.5
CMSW 4513	4.5	13.0
CMSW 4515	4.5	15.0
CMSW 5007	5.0	7.0
CMSW 5085	5.0	8.5
CMSW 5010	5.0	10.0
CMSW 5011	5.0	11.5
CMSW 5013	5.0	13.0
CMSW 5015	5.0	15.0



2

20 N.cm

MICRO MINI PILAR

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MMAM 3308	3.5	0.8
MMAM 3315	3.5	1.5
MMAM 3325	3.5	2.5
MMAM 3335	3.5	3.5
MMAM 3345	3.5	4.5



1

PROTECTOR DE PILAR

CÓD.
PMM 33

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)




Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.

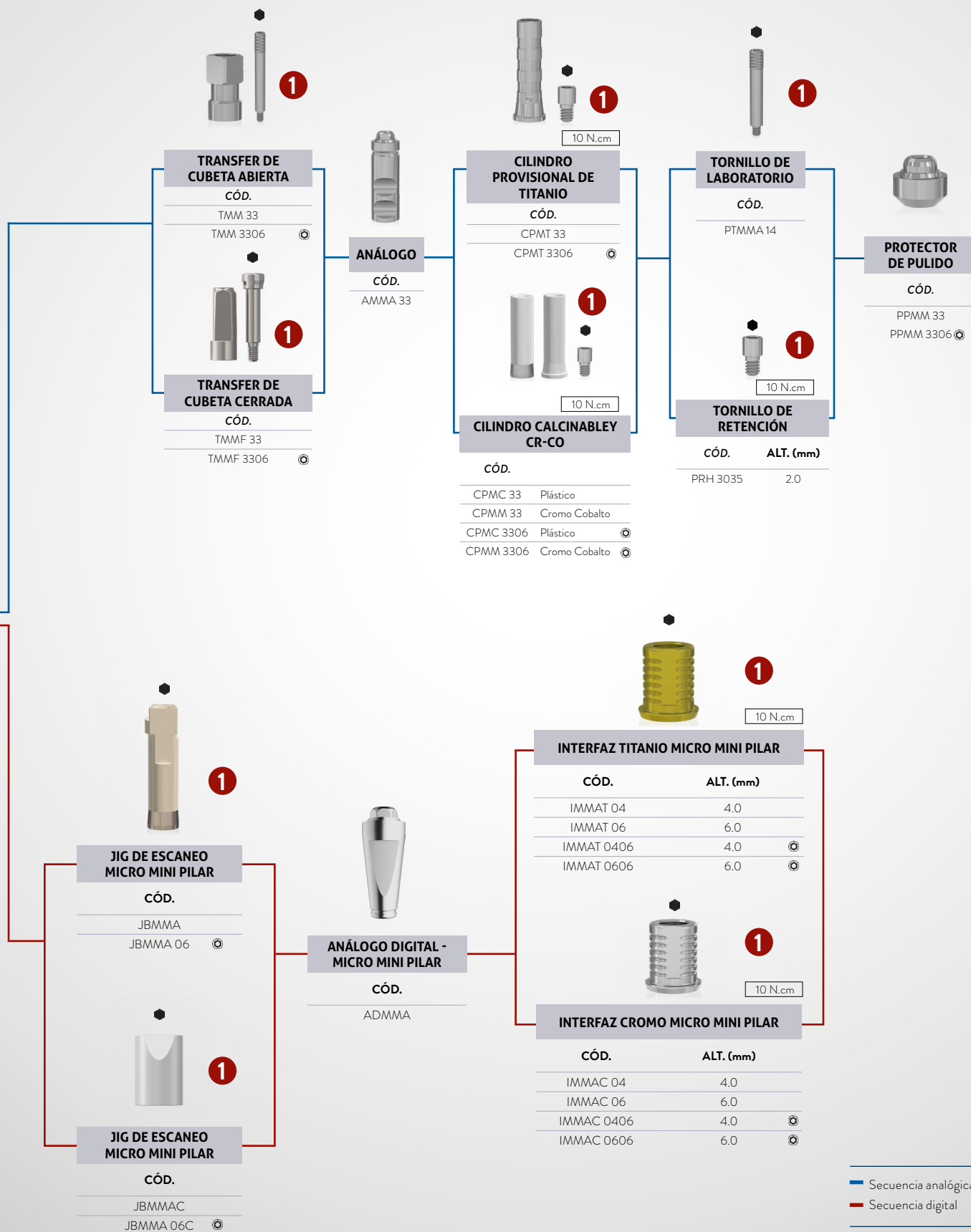

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

■ Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

OVERDENTURE BARRA-CLIP CON INTERMEDIO PROTÉSICO - MINI PILAR
(ANALÓGICO Y DIGITAL)



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CMSW 3507	3.5	7.0
CMSW 3585	3.5	8.5
CMSW 3510	3.5	10.0
CMSW 3511	3.5	11.5
CMSW 3513	3.5	13.0
CMSW 3515	3.5	15.0
CMSW 3807	3.8	7.0
CMSW 3885	3.8	8.5
CMSW 3810	3.8	10.0
CMSW 3811	3.8	11.5
CMSW 3813	3.8	13.0
CMSW 3815	3.8	15.0
CMSW 4507	4.5	7.0
CMSW 4585	4.5	8.5
CMSW 4510	4.5	10.0
CMSW 4511	4.5	11.5
CMSW 4513	4.5	13.0
CMSW 4515	4.5	15.0
CMSW 5007	5.0	7.0
CMSW 5085	5.0	8.5
CMSW 5010	5.0	10.0
CMSW 5011	5.0	11.5
CMSW 5013	5.0	13.0
CMSW 5015	5.0	15.0



2

20 N.cm

MINI PILAR RECTO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
MAMU 4808	4.8	0.8
MAMU 4815	4.8	1.5
MAMU 4825	4.8	2.5
MAMU 4835	4.8	3.5
MAMU 4845	4.8	4.5
MAMU 4855	4.8	5.5



3

20 N.cm

MINI PILAR ANGULADO INDEXADO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAMA 1715I	4.8	1.5	17°
MAMA 1725I	4.8	2.5	17°
MAMA 1735I	4.8	3.5	17°
MAMA 3015I	4.8	1.5	30°
MAMA 3025I	4.8	2.5	30°
MAMA 3035I	4.8	3.5	30°

*Utilizar la llave hexagonal 1.2 mm



PROTECTOR DE PILAR

CÓD.

PMA 4855

LLAVES

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Media
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)



Llave Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2



Llave Contra Ángulo P/
Abutment Media (CTA
1224)



Llave Catraca P/
Abutment Corto
(CDAC 20)



Llave Catraca P/
Abutment Medio
(CDAC 24)

3



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Corto
(CTHA 1220)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Est. Me-
dio (CTHA 1224)



Llave de Catraca Hex.
1.2mm Est. Corto
(CHTMA 20)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Medio
(CHTMA 24)

*Verifique la disponibilidad de los productos en su región.



TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CÓD.

TMAM 4800



TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CÓD.

TMFM 4800



ANÁLOGO

CÓD.

ANMA 4800



CILINDRO CALCINABLE Y CR-CO

CÓD.


CLEM 4800-2	Cromo-cobalto Para mini pilar angulado
CLEM 4800-3	Cromo-cobalto Para mini pilar recto
CPM 4800-2	Plástico Para mini pilar angulado
CPM 4800-3	Plástico Para mini pilar recto

Ø 2.15mm 45mm

CABLE DEL OVERDENTURE

CÓD.

FO 01
Poliacetal

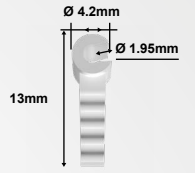

CLIP DE POLIACETAL

CÓD.

CLIPP



JIG DE ESCANEÓ MINI PILAR

CÓD.

JBMA



JIG DE ESCANEÓ MINI PILAR

CÓD.

JBMAC



ANÁLOGO DIGITAL - MINI PILAR

CÓD.

ADMA



TORNILLO DE RETENCIÓN

CÓD.

ALT.
(mm)

PRH 20	2.0	Para mini pilar angulado
PRH 30	3.0	Para mini pilar recto

— Secuencia analógica

— Secuencia digital

● Tornillo hexagonal

⊙ Componente antirrotacional

■ Tornillo cuadrado

○ Tornillo de pilar

⊙ Componente rotacional

SECUENCIA PROTÉSICA CM 11.5°

OVERDENTURE - EQUATOR



IMPLANTE

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CMSW 3507	3.5	7.0
CMSW 3585	3.5	8.5
CMSW 3510	3.5	10.0
CMSW 3511	3.5	11.5
CMSW 3513	3.5	13.0
CMSW 3515	3.5	15.0
CMSW 3807	3.8	7.0
CMSW 3885	3.8	8.5
CMSW 3810	3.8	10.0
CMSW 3811	3.8	11.5
CMSW 3813	3.8	13.0
CMSW 3815	3.8	15.0
CMSW 4507	4.5	7.0
CMSW 4585	4.5	8.5
CMSW 4510	4.5	10.0
CMSW 4511	4.5	11.5
CMSW 4513	4.5	13.0
CMSW 4515	4.5	15.0
CMSW 5007	5.0	7.0
CMSW 5085	5.0	8.5
CMSW 5010	5.0	10.0
CMSW 5011	5.0	11.5
CMSW 5013	5.0	13.0
CMSW 5015	5.0	15.0



1

CICATRIZADORES DE TITANIO

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
CIMU 3308	3.3	0.8
CIMU 3315	3.3	1.5
CIMU 3325	3.3	2.5
CIMU 3335	3.3	3.5
CIMU 3345	3.3	4.5
CIMU 3355	3.3	5.5
CIMU 4508	4.5	0.8
CIMU 4515	4.5	1.5
CIMU 4525	4.5	2.5
CIMU 4535	4.5	3.5
CIMU 4545	4.5	4.5
CIMU 4555	4.5	5.5



1

CICATRIZADORES DE PEEK

CÓD.	DIÁM. DO PERFIL (mm)	ALT. (mm)
CPUP 0504	5.0	4.0
CPUP 0804	8.0	4.0
CPUP 0508	5.0	8.0
CPUP 0808	8.0	8.0

10 N.cm



2

20 N.cm

PILAR EQUATOR CM 11,5°

CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)
AEUM 3508	3.5	0.8
AEUM 3515	3.5	1.5
AEUM 3525	3.5	2.5
AEUM 3535	3.5	3.5
AEUM 3545	3.5	4.5
AEUM 3555	3.5	5.5

LLAVES



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Corta
(CTH 1220)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Corta
(CDHC 20)

1



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Mediana
(CTH 1224)



Llave Contra Ángulo
Hex. 1.2mm Larga
(CTH 1230)



Llave de Catraca
Hex. 1.2mm Media
(CDHC 24)

2




Llave de Torque Cuadrada
20,0mm (CTQ 20)



Llave Cuadrada
1,3x20mm
(CQTM 20)



Llave de Torque Cuadrada
24,0mm (CTQ 24)

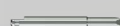

Llave de Torque Cuadrada
30,0mm (CTQ 30)



Llave Cuadrada
1,3x24mm
(CQTM 24)



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DP	1.6 mm




ACOPLE DE TITANIO

CÓD.
141 CTE



DISCO DE PROTECCIÓN PACK 10

CÓD.	DIÁM
100 DPR	2.9 mm

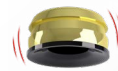

SMARTBOX

CÓD.
330 SBE



CÁPSULA AMARILLA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEG	Retención extra suave (0.6 kg)



CÁPSULA ROSA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CER	Retención suave (1.2 kg)



CÁPSULA TRANSPARENTE

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CET	Retención estándar (1.8 kg)



CÁPSULA VIOLETA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEV	Retención fuerte (2.7 kg)



CÁPSULA NEGRA

CÓD.	CARACTERÍSTICA
140 CEN	Cápsula de trabajo



CÓD.	CARACTERÍSTICA
CCE 01	Pack de cápsulas (compuesto por 1 unidad del artículo 140 CEV; 1 unidad del artículo 140 CEN y 2 unidades del artículo 140 CET)



CÓD.	CARACTERÍSTICA
485 IC	Clave para inserción y extracción de cápsulas de retención

- Secuencia analógica
- Secuencia digital

- ⬢ Tornillo hexagonal
- ⊙ Componente antirrotacional
- Tornillo cuadrado
- ⬢ Tornillo de pilar
- ⊙ Componente rotacional

KIT QUIRÚRGICO STRONG SW

UN ÚNICO KIT, DIVERSAS POSIBILIDADES

Apenas 7 fresas:

- › Protocolo de fresado muy simple y eficiente
- › Secuencia de instalación por colores.

Exclusivo diseño y alto nivel de precisión de los instrumentales.

Fresas con DLC (Diamond like carbon):
Menor calentamiento óseo, incremento de la durabilidad y alto poder de corte.

Fresas con indicación de profundidad.

Acompaña llave bidigital.

Torquímetro de varilla con
medidor de torque.




Un único kit para toda la línea Strong SW: Posibilidad de instalación de implantes CM, HE y HI con el mismo kit.

Caja organizadora que se puede esterilizar en un autoclave más pequeño.

Diseño de bandeja más ligero y compacto.

CÓDIGO: KCSW 02

LA INSTALACIÓN DE LOS IMPLANTES DE LA LÍNEA STRONG SW DEBE REALIZARSE
SOLO CON EL KIT QUIRÚRGICO STRONG SW.

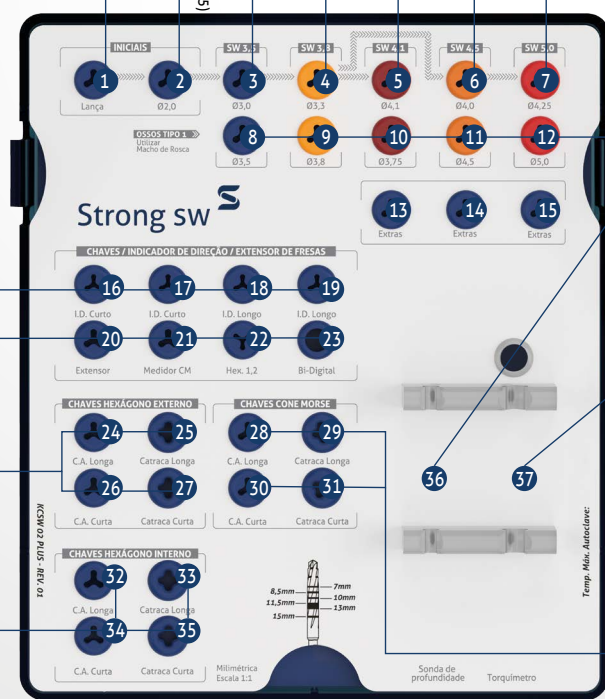

KIT SAFE DRILL

PRECISIÓN, SEGURIDAD Y MENOS TIEMPO DE CIRUGÍA

Codificación de colores
Más moderno y fácil de identificar.

Compatible con el kit
quirúrgico Strong SW.



Acción y eficiencia:
limitadores de poliacetal
exclusivos con ajuste
perfecto y alta resistencia,
lo que garantiza una mayor
durabilidad del kit.

Precisión y seguridad: Perforación
segura hasta la profundidad deseada,
elimina el control visual y las pausas
para verificar la osteotomía.

Para la instalación infraósea del Cono Morse se realiza de acuerdo con la recomendación se requiere el uso de una anilla de 1.5 mm superior a la profundidad del implante.

CÓDIGO: KWSD 02

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

LSDD 2007	LIMITADOR SAFE DRILL Ø2.00/Ø2.70X7.0MM
LSDD 2085	LIMITADOR SAFE DRILL Ø2.00/Ø2.70X8.5MM
LSDD 2010	LIMITADOR SAFE DRILL Ø2.00/Ø2.70X10.0MM
LSDD 2011	LIMITADOR SAFE DRILL Ø2.00/Ø2.70X11.5MM
LSDD 2013	LIMITADOR SAFE DRILL Ø2.00/Ø2.70X13.0MM
LSDD 2015	LIMITADOR SAFE DRILL Ø2.00/Ø2.70X15.0MM
LSDD 3007	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.00/Ø3.30X7.0MM
LSDD 3085	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.00/Ø3.30X8.5MM
LSDD 3010	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.00/Ø3.30X10.0MM
LSDD 3011	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.00/Ø3.30X11.5MM

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

LSDD 3013	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.00/Ø3.30X13.0MM
LSDD 3015	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.00/Ø3.30X15.0MM
LSDD 3807	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.80/Ø4.25X7.0MM
LSDD 3885	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.80/Ø4.25X8.5MM
LSDD 3810	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.80/Ø4.25X10.0MM
LSDD 3811	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.80/Ø4.25X11.5MM
LSDD 3813	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.80/Ø4.25X13.0MM
LSDD 3815	LIMITADOR SAFE DRILL Ø3.80/Ø4.25X15.0MM
COW SD 02	CAJA ORGANIZADORA SAFE DRILL SW

*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.

KIT SHORT DRILL

EL SISTEMA DE FRESA DE LA LÍNEA STRONG SW ESTÁ COMPLETO

Alt. de las fresas: 27; 28.5 y 29 mm.

Marcas milimétricas: de 7; 8.5 y 10 mm.

Acero inoxidable y revestimiento en DLC (Diamond Like Carbon): mayor poder de corte, asegurando un menor calentamiento del hueso.



CÓDIGO: KSDSW

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FRLD 2020C	FRESA LANZA Ø2.0MM CORTA
FHD 2010C	FRESA HELICOIDAL Ø2.0X10MM CORTA
FRWD 35C	FRESA CÓNICA Ø3.0MM CORTA
FRWD 38C	FRESA CÓNICA Ø3.3MM CORTA
FRWD 45C	FRESA CÓNICA Ø4.0MM CORTA
FRWD 50C	FRESA CÓNICA Ø4.25MM CORTA
FCWD 41C	FRESA COUNTERSINK Ø4.1MM CORTA

*Verifique la disponibilidad de este producto en su región.

KIT CIRUGÍA GUIADA STRONG SW

KIT COMPACTO Y COMPLETO

Desarrollado con alta innovación tecnológica y calidad industrial superior, los kits Cirugía Guiada S.I.N. proporcionan numerosos beneficios en el procedimiento de instalación de implantes dentales.

Ahora puede ofrecer a sus pacientes una cirugía con mayor comodidad, precisión extrema y tiempo quirúrgico reducido, favoreciendo la recuperación postoperatoria.

Conozca lo mejor de la implantología mundial.

Codificación de colores
Más moderno y fácil de identificar.

Sistema de fresas larga y corta
Mayor gama de opciones según el caso clínico.
Fresa estándar: 42.5 mm
Fresa corta: 37.5 mm

Sistema Safe Drill integrado

Limitadores que permiten el CONTROL EXACTO DE LA PROFUNDIDAD del alveolo.



Sistema estrecho de anillas
EVITA COLISIÓN ENTRE LAS ANILLAS de guía y errores de orientación a pequeñas distancias mesio-distales.

Posibilidad de instalación en diferentes diámetros *, longitudes y Plataformas protésicas de las líneas.

Sistema de posición de anillos flexible
Permite el POSICIONAMIENTO DE GUÍAS QUIRÚRGICAS EN DOS POSICIONES en relación al nivel óseo.



CÓDIGO: KCSWG 04

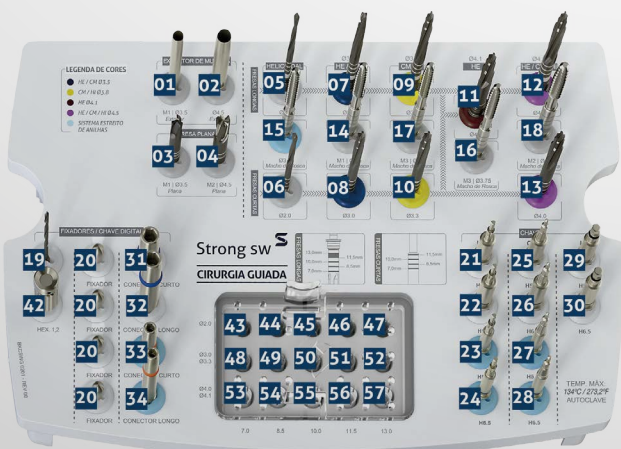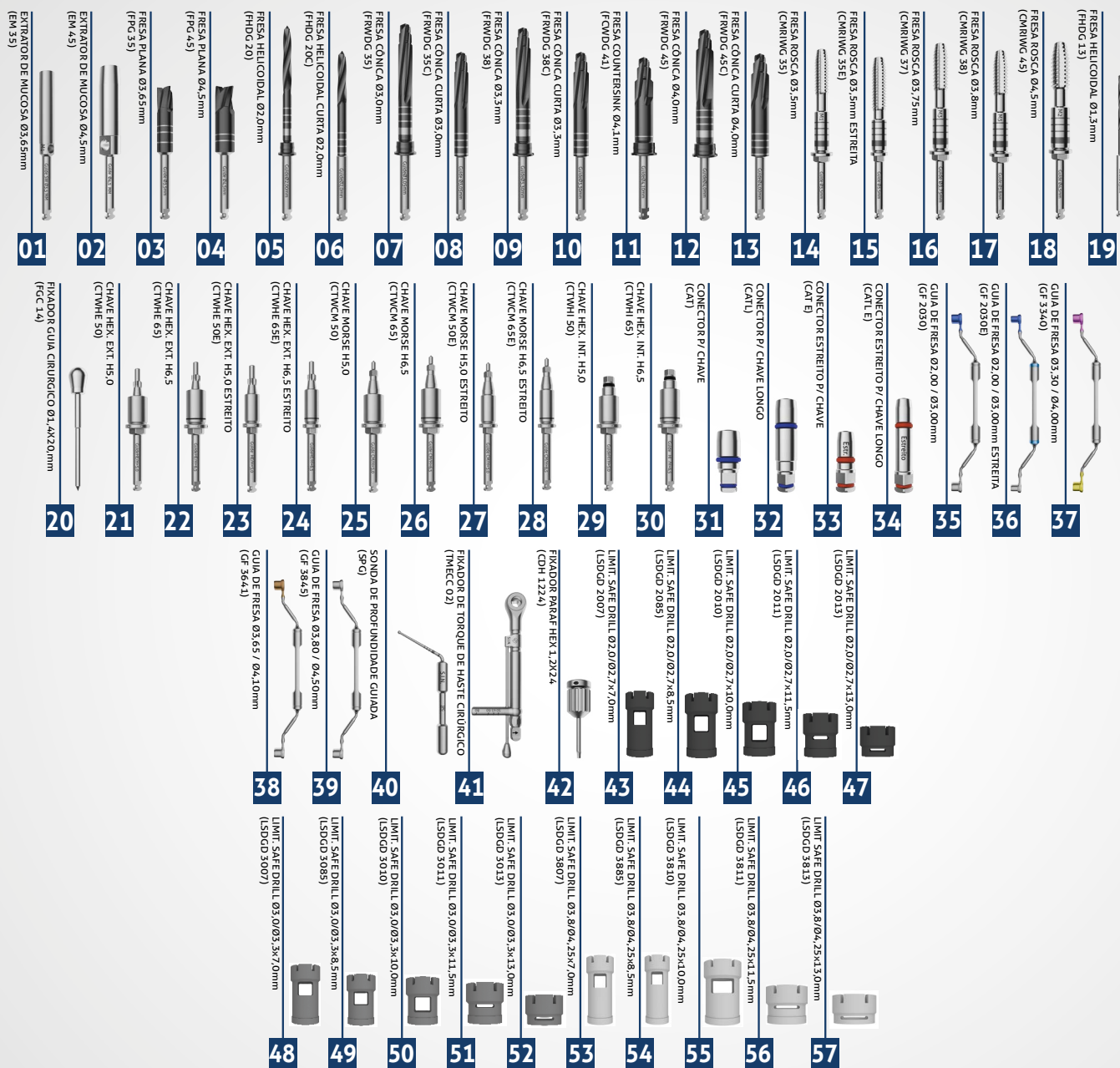

Caja organizadora Cirugía Guiada Strong SW (COSWG 02)

GET TO KNOW OUR COMPLEMENTARY KITS



KIT PROTÉSICO

Ideal para la fase restauradora con precisión, agilidad y seguridad.

Código: KTMEC 02



KIT EXPANSOR

Ideal para realizar la expansión ósea lateral, ayudando a evitar la necesidad de injertos óseos.

Código: KEXP



KIT DE INJERTO ÓSEO

Utilizado para la estabilización de injertos óseos en bloque y para cirugías de regeneración ósea guiada.

Código: KENX



KIT LEVANTAMIENTO DE SENO

Indicado para cirugías de elevación del seno maxilar, este kit permite el desplazamiento de la membrana sinusal, así como el curetaje y la compactación del injerto.


Código: KLEV 02



KIT OSTEÓTOMO

Permite una elevación atraumática del seno maxilar, resultando en un aumento vertical del hueso.

Código: KOST

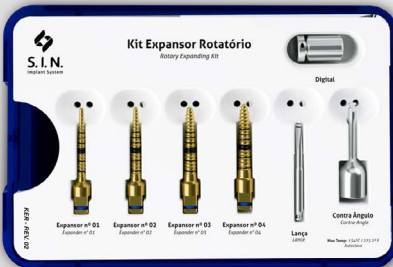

KIT EXPANSOR ROTATIVO

Indicado para casos con espesor óseo limitado. Recomendado para la expansión y compactación ósea, ayudando a evitar la necesidad de injertos óseos. Código: ER



KIT DE ORTODONCIA

Diseñado para la instalación y extracción quirúrgica sencilla de mini tornillos, asistiendo en el tratamiento de ortodoncia. Código: KOR




**¿QUIERES SABER
MÁS? ESCANEA EL
CÓDIGO QR AL LADO**



IMPLANTES ORTODÓNCICOS

- > Fácil instalación y remoción.
- > Puede realizarse la carga inmediata después de la aplicación quirúrgica.
- > Fácil conexión con accesorios ortodóncicos.
- > Diámetro del orificio: 0.6 mm.

ÁPICE DE ROSCA AUTOPERFORANTE:

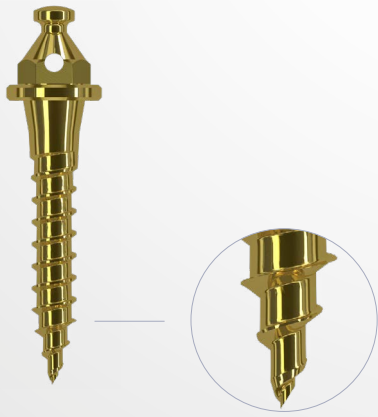

INFORMACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

› Longitudes:

Profundidad gingival = 0, 1, 2 y 3 mm
Cuerpo=6, 8 y 10 mm

› Diámetro:

1.4 mm
1.6 mm
1.8 mm

AUTO PERFORANTE SIN PERFIL TRANSMUCOSO



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1406	1.4 mm	6.0 mm
POT 1408	1.4 mm	8.0 mm
POT 1400	1.4 mm	10.0 mm
POT 1606	1.6 mm	6.0 mm
POT 1608	1.6 mm	8.0 mm
POT 1600	1.6 mm	10.0 mm
POT 1806	1.8 mm	6.0 mm
POT 1808	1.8 mm	8.0 mm
POT 1800	1.8 mm	10.0 mm

AUTO PERFORANTE CON EL PERFIL DE TRANSMUCOSO - 2mm



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1420	1.4 mm	10.0 mm
POT 1428	1.4 mm	8.0 mm
POT 1620	1.6 mm	10.0 mm
POT 1628	1.6 mm	8.0 mm
POT 1820	1.8 mm	10.0 mm
POT 1828	1.8 mm	8.0 mm

AUTO PERFORANTE CON EL PERFIL DE TRANSMUCOSO CORTO - 1mm



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1416	1.4 mm	6.0 mm
POT 1418	1.4 mm	8.0 mm
POT 1410	1.4 mm	10.0 mm
POT 1616	1.6 mm	6.0 mm
POT 1618	1.6 mm	8.0 mm
POT 1610	1.6 mm	10.0 mm
POT 1816	1.8 mm	6.0 mm
POT 1818	1.8 mm	8.0 mm
POT 1810	1.8 mm	10.0 mm

AUTO PERFORANTE CON EL PERFIL DE TRANSMUCOSO - 3mm



CÓDIGO	DIÁM.	ALT.
POT 1438	1.4 mm	8.0 mm
POT 1430	1.4 mm	10.0 mm
POT 1638	1.6 mm	8.0 mm
POT 1630	1.6 mm	10.0 mm
POT 1838	1.8 mm	8.0 mm
POT 1830	1.8 mm	10.0 mm

INSTRUMENTOS DE LOS KITS COMPLEMENTARIOS

LLAVES DIGITALES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALT.	INDICACIÓN
	CDA 20	LLAVE DE PILAR 20.0MM	CORTA	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar y pilar cónico.
	CDA 24	LLAVE DE PILAR 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar y pilar cónico
	CDH 0920	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 0.9MM X 20MM	CORTA	Utilizado para la instalación de la tapa del implante Tryon HE, el pilar universal recto con tornillo pasante y el pilar universal angulado.
	CDH 0924	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 0.9MM X 24MM	LARGO	Utilizado para la instalación de la tapa del implante Tryon HE, el pilar universal recto con tornillo pasante y el pilar universal angulado.
	CDH 1220	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 1.2MM X 20MM	CORTA	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transferente, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2mm.
	CDH 1224	LLAVE DIGITAL HEXAGONAL DE 1.2MM X 24MM	LARGO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transferente, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2mm.
	CDHA 1220	LLAVE DIGITAL HEX. MINI-PILAR ÁNG. 20.0MM	CORTA	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2mm hexagonal (excepto para mini-pilar angulado Unitite).
	CDHA 1224	LLAVE DIGITAL HEX. MINI-PILAR ÁNG. 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2mm hexagonal (excepto para mini-pilar angulado Unitite).
	CDHA 1237	LLAVE DIGITAL HEX. MINI-PILAR ÁNG. 37.0MM	EXTRA LARGA	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta hexagonal de 1.2mm hexagonal (excepto para mini-pilar angulado Unitite).
	CDQ 1220	LLAVE DIGITAL CUADRADA 20.0MM	CORTA	Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3mm.

MARTILLO QUIRÚRGICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	MART 1	> Acero inoxidable quirúrgico utilizado con los kits Osteótomo y Expandores > Extremo de contacto confeccionado en material sintético que proporciona mayor sensibilidad, menor impacto y reducción del trauma durante el uso

LLAVES DIGITALES



ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALT.	INDICACIÓN
	CDQ 1224	LLAVE DIGITAL CUADRADA 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008,PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3mm.
	CDQ 1237	LLAVE DIGITAL CUADRADA 37.0MM	EXTRA LARGA	Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008,PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3mm.
	CLH 1277	LLAVE HEXAGONAL DE 77.0MM	EXTRA LARGA	Llave para laboratorio. Utilizada para la instalación de tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2mm.
	CLQ 1277	LAVE HEXAGONAL DE 77.0MM	EXTRA LARGA	Llave para laboratorio. Utilizada para la instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008,PTQH 18 y PTQ 2006). Punta de 1.3mm.
	CRC 16	LLAVE PARA REMOCIÓN DEL CILINDRO PROVISORIO	CORTA	Utilizada para la remoción del cilindro provisorio Cono Morse 16° 1.6mm.
	CRC 18	LLAVE PARA REMOCIÓN DEL CILINDRO PROVISORIO	CORTA	Utilizada para la remoción del cilindro provisorio Cono Morse 11.5° 1.8 mm
	CDH 1620	LLAVE DIGITAL HEX. 1.6MM	CORTA	Utilizada para la instalación del Pilar Multifuncional. Punta hexagonal de 1.6 mm
	CDH 1624	LLAVE DIGITAL HEX. 1.6MM	MEDIA	Utilizada para la instalación del Pilar Multifuncional. Punta hexagonal de 1.6 mm
	CCH 1620	LLAVE DE TORNQUETE HEX HEX. 1.6MM	CORTA	Utilizada para la instalación y el torque del pilar multifuncional. Punta hexagonal de 1.6 mm
	CCH 1624	LAVE DE TORNQUETE HEX. 1.6MM MEDIA	MEDIA	Utilizada para la instalación y el torque del pilar multifuncional. Punta hexagonal de 1.6 mm

FRESAS PERFILADORAS ÓSEAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INDICACIÓN
	PO 4150	Plataforma 4,1 mm – Hex. Externo	Abre perfil del hueso a 5,0 mm
	PO 5055	Plataforma 5,0 mm – Hex. Externo	Abre perfil del hueso a 5,5 mm

*Verifica la disponibilidad del producto en tu país.

LLAVE PARA CONTRA-ÁNGULO

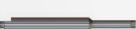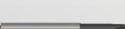
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALT.	INDICACIÓN
	CTA 1224	LLAVE TORQUE PILAR 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar y pilar cónico.
	CTH 0924	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 24.0MM	LARGO	Utilizado para la instalación de la tapa del implante Tryon HE, el pilar universal recto con tornillo pasante y el pilar universal angulado.
	CTH 1220	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 20.0MM	CORTA	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transferente, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2mm.
	CTH 1224	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transferente, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2mm.
	CTH 1230	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO 30.0MM	EXTRA LARGA	Utilizada para la instalación del montador, cicatrizador, transferente, tornillos de retención (PTL 16, PT 2006, PT 2008, PRH 20 y PRH 30) y tornillos de laboratorio. Punta hexagonal de 1.2mm.
	CTHA 1220	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO MINI PILAR ANGULADO 20.0MM	CORTA	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta de 1.2mm hexagonal (excepto para mini-pilar angulado Unitite).
	CTHA 1224	LLAVE TORQUE HEXAGONAL CONTRA-ÁNGULO MINI PILAR ANGULADO 24.0MM	LARGO	Utilizada para la instalación del tornillo del mini-pilar angulado. Punta de 1.2mm hexagonal (excepto para mini-pilar angulado Unitite).
	CTQ 20	LLAVE TORQUE CUADRADA 20.0MM	CORTA	Utilizada en contra-ángulo para instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Punta de 1.3mm.
	CTQ 24	LLAVE TORQUE CUADRADA 24.0MM	LARGO	Utilizada en contra-ángulo para instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Punta de 1.3mm.
	CTQ 30	LLAVE TORQUE CUADRADA 30.0MM	EXTRA LARGA	Utilizada en contra-ángulo para instalación de tornillos de retención con encaje cuadrado (PTQ 2008, PTQH 18, PTQ 2006). Punta de 1.3mm.
	CTH 1620	LLAVE DE CONTRA-ÁNGULO HEX. 1.6MM	CORTA	Utilizada en contra-ángulo para la instalación del Pilar Multifuncional.
	CTH 1624	LLAVE DE CONTRA-ÁNGULO HEX. 1.6MM	MEDIA	Utilizada en contra-ángulo para la instalación del Pilar Multifuncional.

FRESAS HELICOIDALES

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	FH 2010	ø 2.0x 10.0 mm	> Acero inoxidable quirúrgico. > Tratamiento térmico. > Marcado a láser. > Utilizadas como secuencia para la confección del alvéolo.
	FH 2020	ø 2.0x 18.0 mm	
	FH 3010	ø 3.0x 10.0 mm	
	FH 3020	ø 3.0x 18.0 mm	

FRESAS TREFINAS

ITEM	CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	FTR 02	ø 2.0 mm	> Acero inoxidable quirúrgico. > Tratamiento térmico. > Marcado a láser. > Puede ser utilizada para la remoción de implantes, retirada de huesos y biopsias óseas. > Medidas referentes al diámetro interno de la pieza.
	FTR 04	ø 4.2 mm	
	FTR 05	ø 5.1 mm	
	FTR 06	ø 6.1 mm	
	FTR 08	ø 8.0 mm	

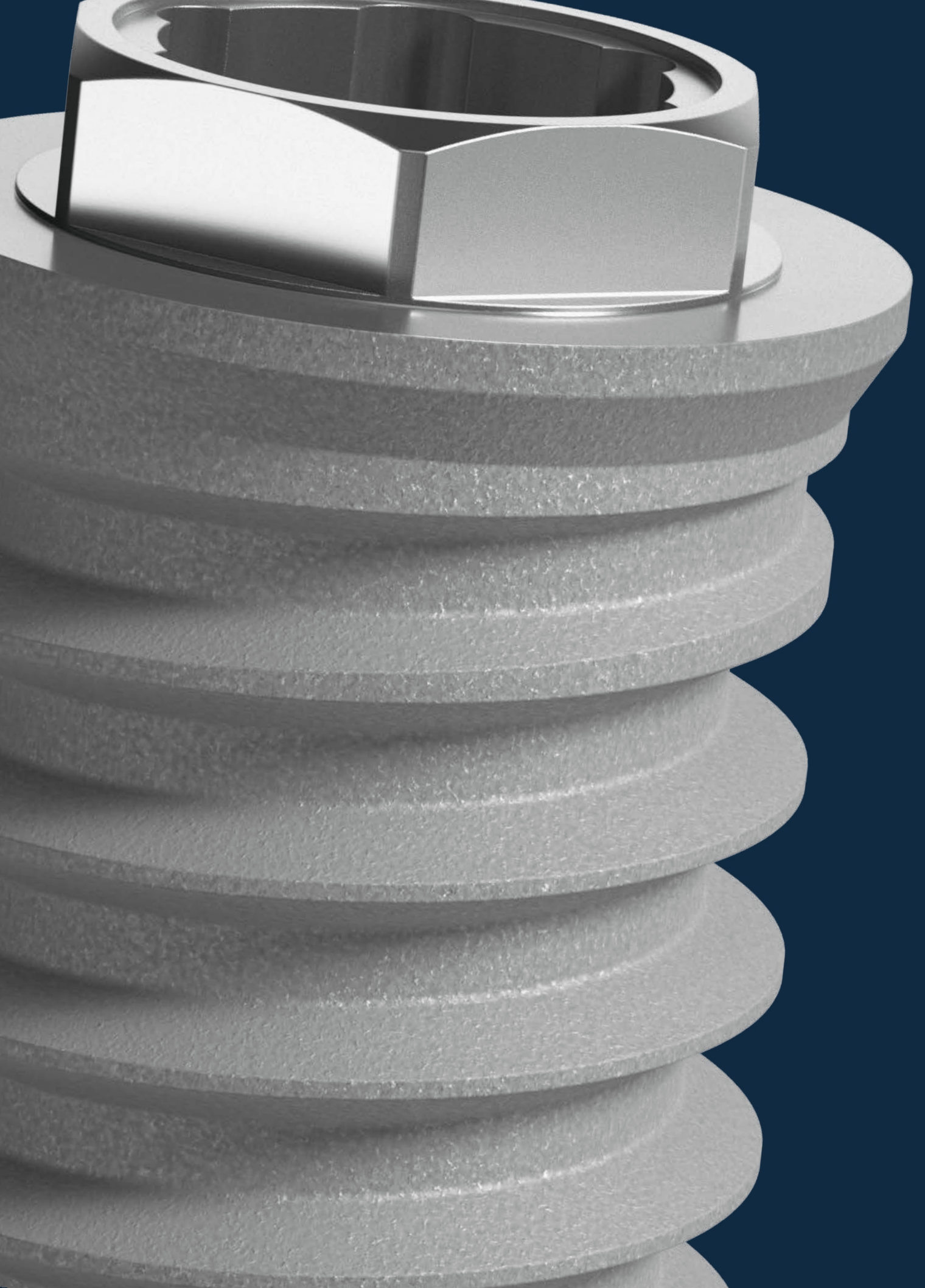

CALIDAD Y TECNOLOGÍA SUPERIOR

*NOSOTROS GARANTIZAMOS PORQUE
ESTAMOS **ORGULLOSOS** DE LO QUE PRODUCIMOS!*

La principal prioridad de S.I.N. es garantizar calidad y seguridad para nuestros clientes. Ofrecer lo que hay de mejor en implantes, componentes, kits quirúrgicos e instrumentales es la base de toda nuestra actuación.



INSPECCIÓN EN 100% DE LOS LOTES FABRICADOS

El control de calidad se realiza en todos los productos que la S.I.N. fabrica para garantizar el éxito de las cirugías de nuestros clientes, el cumplimiento de los estándares de calidad, así como agregar valor para todos aquellos que eligieron devolver la sonrisa de diversas personas.



**IMPLANTES CON GARANTÍA
PARA TODA LA VIDA***



**5 AÑOS DE GARANTÍA:
COMPONENTES PROTÉSICOS***




*ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
ACCEDER A LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA
DE S.I.N O ACCEDE AL ENLACE
<https://bit.ly/3rqcLF4>



MÁS FACILIDAD Y SEGURIDAD PARA SUS PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS

Los paquetes de S.I.N. brindan practicidad manteniendo los productos íntegros, facilitando su manipulación e identificación.

- › **01** Embalaje más fácil de abrir y manipular con guantes.

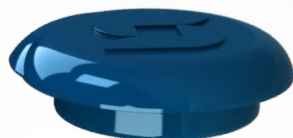

- › **02** Embalaje transparente simplicidad y rapidez en la identificación del implante.

- › **03** Mantiene el implante y la tapa del implante en compartimientos separados.



- › **04** Sistema de apertura superior Snap-On con sistema giratorio que asegura la esterilización del implante.

- › **05** Con un conector propio, capture el implante con la llave de contra-ángulo y muévelo hasta conseguir el encaje perfecto.



- › **06** El único sistema de implantes que ofrece la tapa del implante en el mismo paquete. Para capturarlo, retirar la tapa superior del tubo y encajar la llave digital hexagonal de 1.2 mm.

Importante: El implante no debe ser tomado con la llave torniquete y sí con un conector propio.


REALIZANDO EL DESARMADO DEL TORQUÍMETRO

La limpieza se debe realizar inmediatamente después de usar el torquímetro.

Para la limpieza, el torquímetro debe ser desarmado, para ello no es necesario el uso de herramientas.


Tire del mango del inversor de dirección hacia atrás.

› 01

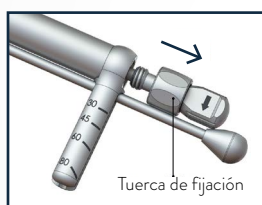


Retire el torniquete del encaje con la cabeza.

› 02

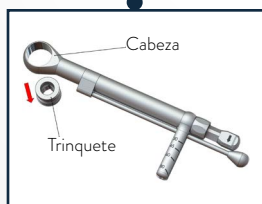

Gire la puerta de fijación en sentido antihorario.

› 03

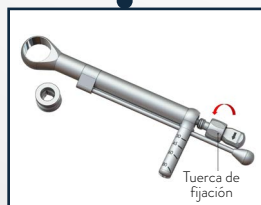

Retire el eje central del torquímetro.

› 04



Retire el mango con graduación de toque.

› 05



Comience el procedimiento de limpieza.

› 06

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuidados especiales y aclaraciones sobre los instrumentos quirúrgicos.



LIMPIEZA DEL KIT

- Retire manualmente todos los instrumentos quirúrgicos del kit. Desmonte las piezas de la caja del kit (tapa, bandeja y fondo).
- Prepare el detergente enzimático, según las instrucciones del fabricante.
- Sumerja las bandejas en la solución preparada de detergente y déjelas durante al menos 5 minutos. Luego, con un cepillo de cerdas suaves, frote las piezas para eliminar la materia orgánica de los productos.
- Retire las bandejas de la solución detergente y enjuáguelas con agua corriente durante 1 minuto. Repita el enjuague dos veces más, totalizando 3 enjuagues de 1 minuto cada uno.
- Inspección visual de cada parte en busca de residuos del proceso de limpieza o desechos orgánicos del uso del producto.
- Si se detectan residuos en el producto, repita el proceso de limpieza hasta que se eliminen por completo.
- Seque las piezas con un paño suave, limpio y seco o con papel desechable.



LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

- Desmontar la pieza (si corresponde). Para torquímetros, complete el desmontaje del producto, retire todo el material orgánico interno con agua corriente y continúe con el siguiente paso solo cuando realice estos procedimientos.
- Prepare el detergente enzimático, según las instrucciones del fabricante.
- Sumerja todas las piezas del producto en la solución preparada de detergente y déjelas durante al menos 5 minutos. Luego, con un cepillo de cerdas suaves, frote las piezas para eliminar la materia orgánica de los productos.
- Retire las piezas de la solución detergente y enjuáguelas con agua corriente durante 1 minuto. Repita el enjuague dos veces más, totalizando 3 enjuagues de 1 minuto cada uno.
- Inspeccione visualmente cada parte para ver si hay residuos del proceso de limpieza o residuos orgánicos del uso del producto.
- Si se confirma la presencia de residuos en el producto, repita el proceso de limpieza, hasta la eliminación total de residuos.
- Seque las piezas con un paño suave, limpio y seco o con papel desechable.
- Continúe con el siguiente proceso de esterilización.

RECOMENDACIONES DE ESTERILIZACIÓN

- Esterilice el día anterior o el día del procedimiento.
- No se recomienda la esterilización química, ya que ciertos productos pueden causar decoloración y daños en los instrumentales.
- No utilice una temperatura superior a 60°C para secar los productos.
- Nunca use hornos de calor seco para esterilizar instrumentos de S.I.N.



ESTERILIZACIÓN

El producto es reutilizable suministrado no es estéril. Debe estar limpio y esterilizado en autoclave antes de su uso.

- Seque todos los instrumentos antes del ciclo de esterilización con vapor.
- El producto debe estar envuelto en un envoltorio esterilizable con vapor.
- Esterilice con vapor en ciclos de 121°C a 1 ATM de presión durante 30 minutos o de 134°C a 2 ATM de presión durante 20 minutos. Dejar secar durante 30 minutos.
- Coloque siempre la caja en la autoclave sobre una superficie plana y lejos de las paredes del dispositivo.
- Nunca superponga objetos o incluso otros casos.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Utilice los PPE adecuados (guantes, máscaras, gafas, gorras, etc.).
- Inicie la limpieza inmediatamente después del uso quirúrgico.
- Nunca deje que los instrumentos se sequen con residuos orgánicos después del uso quirúrgico.
- Nunca deje que el instrumento se seque naturalmente después de limpiarlo.
- Nunca use soluciones salinas, incluya hipoclorito de sodio, desinfectante, peróxido de hidrógeno o alcohol para limpiar o enjuagar los instrumentos y kits quirúrgicos.
- No utilice nunca lana de acero ni productos abrasivos para evitar dañar los instrumentos.
- No apile los instrumentos en lotes para evitar la deformación de piezas más pequeñas y delicadas.

LIMPIEZA DE LOS TORQUÍMETROS

- Desmontar la pieza. Retire todo el material orgánico interno con agua corriente y pase a la siguiente etapa solo después de realizar estos procedimientos.
- Preparar el detergente enzimático de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Sumerja todas las piezas del producto en la solución de detergente preparada y déjelas por al menos 5 minutos, utilizando posteriormente un cepillo de cerdas suaves para frotar las piezas y eliminar la materia orgánica de los productos.
- Retire las piezas de la solución de detergente y enjuáguelas con agua corriente durante 1 minuto, repitiendo el enjuague dos veces más, totalizando 3 enjuagues de 1 minuto cada uno.
- Inspeccionar visualmente cada pieza para verificar si hay residuos del proceso de limpieza o residuos orgánicos provenientes del uso del producto.
- En caso de confirmarse la presencia de residuos en el producto, repetir el proceso de limpieza hasta la total eliminación de los residuos.
- Secar con un paño suave, limpio y seco o con papel desechable.
- Proceder con el proceso de esterilización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- › BÁEZ-ROSALES A, et al. Carga inmediata con rehabilitación definitiva en maxilar inferior: reportede caso. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 2015
- › CABRAL L, GUEDES C. Comparative Analysis of 4 Impression Techniques for Implants. Implant Dentristry 2007; 16(2): 187-194
- › CALASANS-MAIA JA, NETO AS, BATISTA MMD, ALVES ATNN, GRANJEIRO JM, CALASANS-MAIA MD. Management of ankylosed young permanent incisors after trauma and prior to implant rehabilitation. Oral Surgery 2013
- › COELHO PG, MARIN C, GRANATO R, BONFANTE EA, LIMA CP, OLIVEIRA S, EHRENFEST DMD, SUZUKI M. Alveolar Buccal Bone Maintenance After Immediate Implantation with a Surgical Flap Approach: A Study in Dogs. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 2011; 31: e80–e86
- › DIAS ECLCM, BISOGNIN EDC, HARARI ND, MACHADO SJ, DA SILVA CP, SOARES GDA, VIDIGAL GM. Evaluation of Implant-Abutment Microgap and Bacterial Leakage in Five External-Hex Implant Systems: An In Vitro Study. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2012; 27(2): 346-351
- › DUARTE ARC, NETO JPS, SOUZA JCM, BONACHELA WC. Detorque Evaluation of Dental Abutment Screws after Immersion in a Fluoridated Artificial Saliva Solution. Journal of Prosthodontics 2013; 22: 275–281
- › FILHO LCM, CIRANO FR, HAYASHI F, FENG HS, CONTE A, DIB LL, CASATI MZ. Assessment of theCorrelation Between Insertion Torque and Resonance Frequency Analysis of Implants Placed in Bone Tissue of Different Densities. Journal of Oral Implantology 2014; 40(3): 259-262
- › FREITAS-JÚNIOR AC, et al. Biomechanical evaluation of internal and external hexagon Plataforma switched implant-abutment connections: An in vitro laboratory and three-dimensional finite element analysis. Dent Mater 2012
- › LORENZONI FC, COELHO PG, BONFANTE G, CARVALHO RM, SILVA NRFA, SUZUKI M, SILVA TL, BONFANTE EA. Sealing Capability and SEM Observation of the Implant-Abutment Interface. International Journal of Dentistry 2011; Article ID 864183
- › MARTINS LMM, BONFANTE EA, ZAVANELLI RA, FREITAS JR AC, SILVA NRFA, MAROTTA L, COELHO PG. Fatigue Reliability of 3 Single-Unit Implant-Abutment Designs. Implant Dentistry 2012; 21(1) 67-71
- › PESSOA RS, BEZERRA FJB, SOUSA RM, SLOTEN JV, CASATI MZ, JAECQUES SVN. Biomechanical Evaluation of Plataforma Switching: Different Mismatch Sizes, Connection Types, and Implant Protocols. J Periodontol 2014; 85(9)
- › PESSOA RS, COELHO PG, MURARU L, MARCANTONIO Jr E, VAZ LG, SLOTEN JV, JAECQUES, SVN. Influence of Implant Design on the Biomechanical Environment of Immediately Placed Implants: Computed Tomography–Based Nonlinear Three-Dimensional Finite Element Analysis. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2011; 26(6): 1279-1287
- › PRATI AJ, CASATI MZ, RIBEIRO FV, CIRANO FR, PASTORE GP, PIMENTEL SP, CASARIN RCV. Release ofBone Markers in Immediately Loaded and Nonloaded Dental Implants: A Randomized Clinical. JDent Res 2013; 92: 161S
- › RAMOS MB, PEGORATO LF, TAKAMORI E, COELHO PG, SILVA TL, BONFANTE EA. Evaluation of UCLA Implant-Abutment Sealing. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2014; 29(1): 113-120
- › ROSA MB, ALBREKTSSON T, FRANCISCHONE CE, SCHWARTZ FILHO HO, WENNEMBERG A. Micrometric Characterization of the Implant Surfaces from the Five Largest Companies in Brazil, the Second Largest Worldwide Implant Market. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2013; 28(3): 358-365
- › SALGADO AC, MACHADO AN, CARVALHO W, BARBOZA EP, GOUVÊA CVD. Guidelines for Positioning External Hexagon Implants in Screw-Retained Multiple Prostheses Using Rotational Abutment-Type Components. Implant Dentistry. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2014; 23(5): 602-606
- › VALVERDE GB, JIMBO R, TEIXEIRA HS, BONFANTE EA, JANAL MN, COELHO PG. Evaluation of surface roughness as a function of multiple blasting processing variables. Clin. Oral Impl. Res. 2011, 1–5.
- › ZANARDI PR, COSTA B, STEGUN RC, SESMA N, MORI M, LAGANÁ DC. Connecting Accuracy of Interchanged Prosthetic Abutments to Different Dental Implants Using Scanning Electron Microscopy. Braz Dent J 2012; 23(5): 502-507

DONDE ESTAMOS



APUNTA LA CÁMARA DE TU TELÉFONO AL
CÓDIGO QR Y DESCUBRE DÓNDE ESTÁ PRESENTE S.I.N.

SEDE

2140 Vereador Abel Ferreira Av
Jardim Anália Franco
São Paulo – SP - Brazil

FÁBRICA

421 Soldado Ocimar Guimarães
da Silva St - Jardim Anália Franco
São Paulo – SP - Brazil

SUCURSAL EN PORTUGAL

General Ferreira Martins St, 10 8D -
1495-137 Algés - Portugal
+351 21 412-0336

sinimplantsystem.com/es/



Descubra Implantat, el hábitat educativo de S.I.N.

 implantat.global

internacional@sinimplantsystem.com
www.sinimplantsystem.com/es/

Visite nuestras Redes Sociales



[@sinimplantsystemlatam](https://www.instagram.com/sinimplantsystemlatam)



[@sinimplantglobal](https://www.facebook.com/sinimplantglobal)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)