



Descubra Implantat, el streaming educativo de S.I.N. Implant System.

 [implantat.global](https://www.implantat.global)

www.sinimplantsystem.com

Visite nuestras redes sociales



@sinimplantglobal




@sinimplantglobal



S.I.N. Implant System



@sin_implant

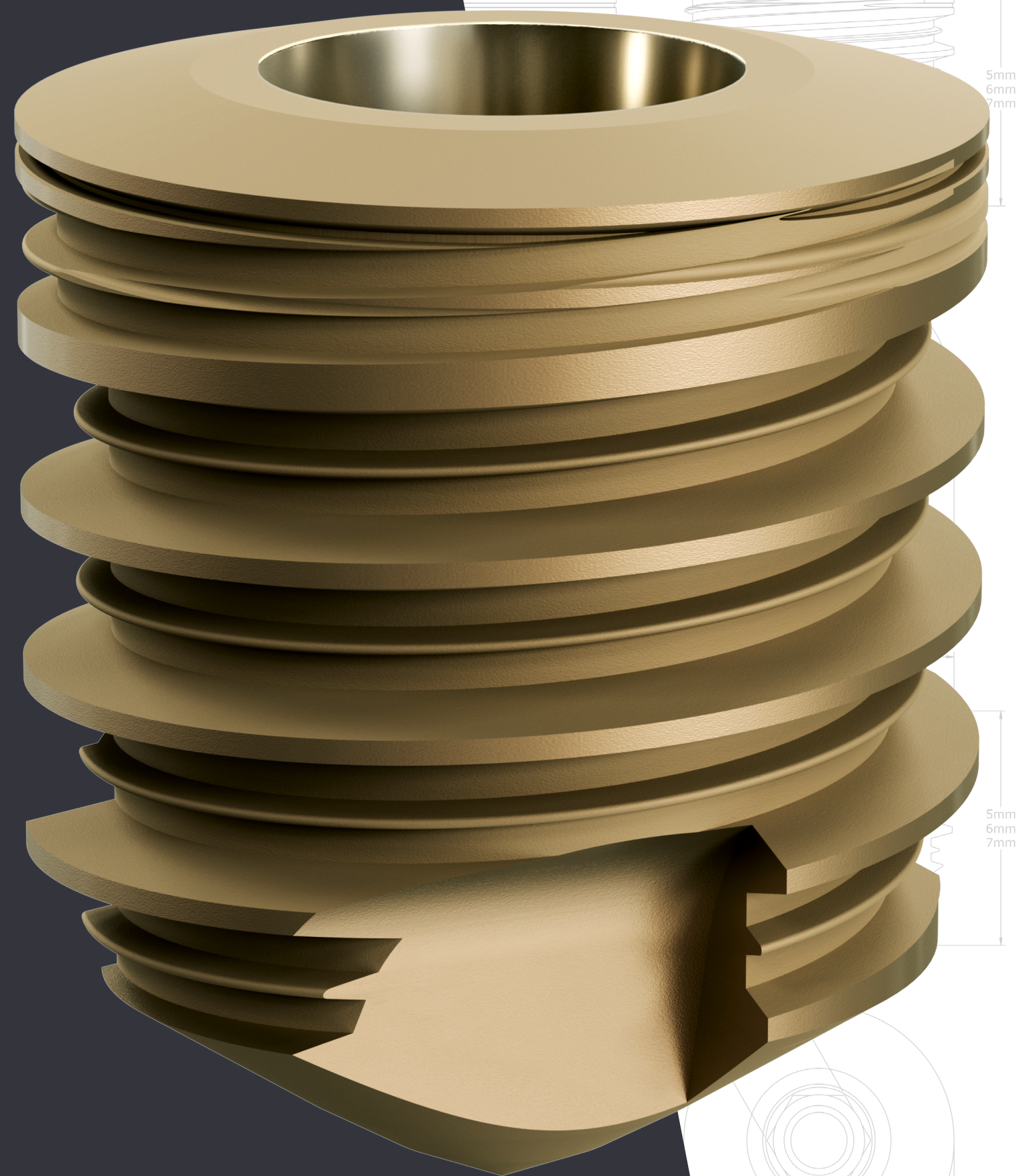

UCMC 50xxN

UCMC 60xxN

Ø 5

4°

Ø 2,50

Ø 6

4°

Ø 2,50

5mm
6mm
7mm

5mm
6mm
7mm

Ø 6

Unitite COMPACT

- La línea Unitite® Compact está altamente recomendada para situaciones de disponibilidad ósea vertical reducida en el maxilar y la mandíbula.
- Diversidad de tamaños: La línea Unitite® Compact cuenta con tres longitudes y diámetros diferentes que permiten una mayor versatilidad quirúrgica.
- Minimiza o elimina la necesidad de realizar cirugías complejas para el aumento de hueso.
- Alto rendimiento: Con un conjunto de características exclusivas, la línea Unitite® Compact proporciona una gran estabilidad y previsibilidad de resultados en casos con altura ósea reducida.
- Versatilidad protésica: Permite la realización de prótesis cementadas o atornilladas simples y múltiples.
- Plataforma Cono Morse: Posee un ángulo interno de 4 grados que permite una excelente estabilidad protésica y favorece la longevidad del implante.

INDICACIONES DE USO CLÍNICO:


- **4.0 mm** – Caninos, premolares e molares.
- **5.0 mm** – Molares superiores e inferiores.
- **6.0 mm** – Molares superiores e inferiores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Rotación de las fresas iniciales: 1200 rpm
- Rotación de las fresas de 2,7 a 5,8 mm: 800 rpm
- Rotación de los machos de rosca de 4.0 a 6.0 mm: 20 rpm*
- Rotación de inserción: 20 a 40 rpm
- Torque máximo: 60 N.cm.
- Viene con tapa implante a nivel de la plataforma protésica.

*En huesos tipo I y II el uso del macho de rosca es opcional, porque es de un implante compresivo. Sin embargo, siempre se debe respetar el torque máximo.

** Contraindicado en pacientes con problemas sistémicos o locales y a criterio del profesional.

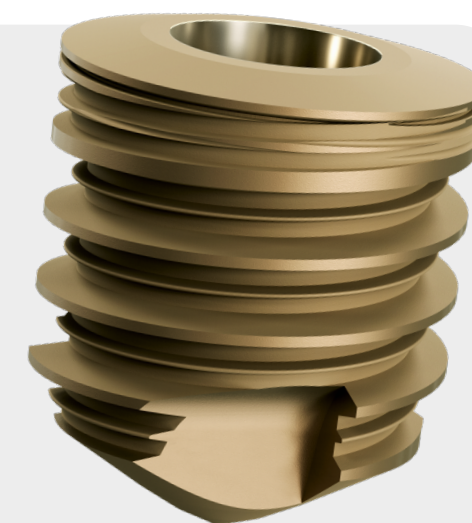

CUADRO PROTÉSICO

Unitite

COMPACT



PILAR UNIVERSAL			
CEMENTADA			
Unitaria			
ANALÓGICO		DIGITAL	
	CICATRIZADORES DE TITANIO 10 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) CIC-4002 4.0 2.0 CIC-4004 4.0 4.0 CIC-4006 4.0 6.0		CICATRIZADOR DE PEEK 10 N.cm CÓD. DIÁM. PERFIL (mm) ALT. (mm) CPUC-0504 5.0 4.0 CPUC-0804 8.0 4.0 CPUC-0508 5.0 8.0 CPUC-0808 8.0 8.0
 PILAR UNIVERSAL 20 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) ALT. DE TRANSMUCOSO (mm) ALT. DE CIMENTACIÓN (mm) AIMC-45401 4.5 1.0 4.0 AIMC-45402 4.5 2.0 4.0 AIMC-45403 4.5 3.0 4.0 AIMC-45404 4.5 4.0 4.0 AIMC-45605 4.5 5.0 4.0 AIMC-45601 4.5 1.0 6.0 AIMC-45602 4.5 2.0 6.0 AIMC-45603 4.5 3.0 6.0 AIMC-45604 4.5 4.0 6.0 AIMC-45605 4.5 5.0 6.0			
	TRANSFER EN POLIACETAL CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) TSIT-4540 4.5 4.0 TSIT-4560 4.5 6.0		JIG DE ESCANEO PILAR UNIVERSAL CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) JB5IT-3340 3.3 4.0 JB5IT-3360 3.3 6.0 JB5IT-4540 4.5 4.0 JB5IT-4560 4.5 6.0
	CILINDRO PROVISIONAL EN ACRÍLICO CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) CPSIT-4540 4.5 4.0 CPSIT-4560 4.5 6.0	NO APLICA	
	ANÁLOGO CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) ASIT-4540 4.5 4.0 ASIT-4560 4.5 6.0		ANÁLOGO DIGITAL PILAR UNIVERSAL CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) ADUA-3340 3.3 4.0 ADUA-3360 3.3 6.0 ADUA-4540 4.5 4.0 ADUA-4560 4.5 6.0
	CILINDRO CALCINABLE EN POLIACETAL CÓD. DIÁM. (mm) ALT. (mm) CCSIT-4540 4.5 4.0 CCSIT-4560 4.5 6.0	NO APLICA	
NO APLICA			
NO APLICA			

TIPOS DE PRÓTESIS	MINI PILAR																			
	ATORNILLADA																			
	Múltiple parcial o total																			
	ANALÓGICO	DIGITAL																		
CICATRIZADORES	 PROTECTOR DE PILAR 10 N.cm CÓD. PWA-4855																			
INTERMEDARIO PROTÉSICO	 MINI PILAR 20 N.cm <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>DIÁM. (mm)</th><th>ALT. DE TRANSMUCOSO</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAC-4801</td><td>4.8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>MAC-4802</td><td>4.8</td><td>2.0</td></tr><tr><td>MAC-4803</td><td>4.8</td><td>3.0</td></tr><tr><td>MAC-4804</td><td>4.8</td><td>4.0</td></tr><tr><td>MAC-4805</td><td>4.8</td><td>5.0</td></tr></tbody></table>		CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. DE TRANSMUCOSO	MAC-4801	4.8	1.0	MAC-4802	4.8	2.0	MAC-4803	4.8	3.0	MAC-4804	4.8	4.0	MAC-4805	4.8	5.0
CÓD.	DIÁM. (mm)	ALT. DE TRANSMUCOSO																		
MAC-4801	4.8	1.0																		
MAC-4802	4.8	2.0																		
MAC-4803	4.8	3.0																		
MAC-4804	4.8	4.0																		
MAC-4805	4.8	5.0																		
TRANSFER	 TRANSFER DE CUBETA ABIERTA 10 N.cm CÓD. TMAM-4800  TRANSFER DE CUBETA CERRADA 10 N.cm CÓD. TMF-W-4800	 JIG DE ESCANEO MINI PILAR 10 N.cm CÓD. JBMA  JIG DE ESCANEO MINI PILAR 10 N.cm CÓD. JBMAC																		
PROVISIONALIZACIÓN	 CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO 10 N.cm CÓD. PTM-4800-3	 INTERFAZ TITANIO MINI PILAR 10 N.cm <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>ALT. (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>IWAT-04</td><td>4.0</td></tr><tr><td>IWAT-06</td><td>6.0</td></tr></tbody></table>  INTERFAZ CROMO MINI PILAR 10 N.cm <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>ALT. (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>IWAC-04</td><td>4.0</td></tr><tr><td>IWAC-06</td><td>6.0</td></tr></tbody></table>	CÓD.	ALT. (mm)	IWAT-04	4.0	IWAT-06	6.0	CÓD.	ALT. (mm)	IWAC-04	4.0	IWAC-06	6.0						
CÓD.	ALT. (mm)																			
IWAT-04	4.0																			
IWAT-06	6.0																			
CÓD.	ALT. (mm)																			
IWAC-04	4.0																			
IWAC-06	6.0																			
CONFECCIÓN DE MODELO	 ANÁLOGO 10 N.cm CÓD. ANWA-4800	 ANÁLOGO DIGITAL MINI PILAR 10 N.cm CÓD. ADWA																		
PRÓTESIS FINAL	 CILINDRO CALCINABLE CR-CO 10 N.cm CÓD. CPM-4800-3 CLEM-4800-3 Cromo Cobalto	 INTERFAZ TITANIO MINI PILAR 10 N.cm <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>ALT. (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>IWAT-04</td><td>4.0</td></tr><tr><td>IWAT-06</td><td>6.0</td></tr></tbody></table>  INTERFAZ CROMO MINI PILAR 10 N.cm <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>ALT. (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>IWAC-04</td><td>4.0</td></tr><tr><td>IWAC-06</td><td>6.0</td></tr></tbody></table>	CÓD.	ALT. (mm)	IWAT-04	4.0	IWAT-06	6.0	CÓD.	ALT. (mm)	IWAC-04	4.0	IWAC-06	6.0						
CÓD.	ALT. (mm)																			
IWAT-04	4.0																			
IWAT-06	6.0																			
CÓD.	ALT. (mm)																			
IWAC-04	4.0																			
IWAC-06	6.0																			
TORNILLOS	 TORNILLO DE RETENCIÓN 10 N.cm CÓD. PRH-30 ALT. (mm) 3.0																			
LABORATORIALES	 TORNILLO DE LABORATORIO 10 N.cm <table><thead><tr><th>CÓD.</th><th>DIÁM. (mm)</th><th>Corto</th><th>Largo</th></tr></thead><tbody><tr><td>PL1405</td><td>1.4 mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PTWA13-1</td><td>1.4 mm</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>  PROTECTOR DE PULIDO 10 N.cm CÓD. PRM-01	CÓD.	DIÁM. (mm)	Corto	Largo	PL1405	1.4 mm			PTWA13-1	1.4 mm			NO APLICA						
CÓD.	DIÁM. (mm)	Corto	Largo																	
PL1405	1.4 mm																			
PTWA13-1	1.4 mm																			

TIPOS DE PRÓTESIS	PILAR MULTIFUNCIONAL	
	ATORNILLADA	
	Unitaria, múltiple parcial o total	
	ANALÓGICO	DIGITAL
CICATRIZADORES	 PROTECTOR DE PILAR 10 N.cm CÓD. PAW-48	
INTERMEDIARIO PROTÉSICO	 PILAR MULTIFUNCIONAL 20 N.cm CÓD. DIÁM. (mm) ALT. DE TRANSMUCOSO AMCMC-4801 4.8 1.0 AMCMC-4802 4.8 2.0 AMCMC-4803 4.8 3.0 AMCMC-4804 4.8 4.0 AMCMC-4805 4.8 5.0 Utilizar llave hexagonal del kit protésico de 1,6 mm.	
TRANSFER	 TRANSFER DE CUBETA ABIERTA CÓD. TMAAM-00 TMAAM-06 ●	 TRANSFER DE CUBETA CERRADA CÓD. TMFAM-00 TMFAM-06 ●
PROVISIONALIZACIÓN	 INTERFAZ CROMO PILAR MULTIFUNCIONAL 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IAMC-0400 4.0 IAMC-0600 6.0 IAMC-0406 4.0 ● IAMC-0606 6.0 ●	 INTERFAZ TITANIO PILAR MULTIFUNCIONAL 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IAMT-0400 4.0 IAMT-0600 6.0 IAMT-0406 4.0 ● IAMT-0606 6.0 ●
CONFECCIÓN DE MODELO	 ANÁLOGO CÓD. ANAM	 ANÁLOGO DIGITAL PILAR MULTIFUNCIONAL CÓD. ADAM
PRÓTESIS FINAL	 CILINDRO CALCINABLE CR-CO 10 N.cm CÓD. CCAM-00 CCAM-06 CCRAM-00 CCRAM-06 Cromo Cobalto ● Cromo Cobalto ●	 INTERFAZ CROMO PILAR MULTIFUNCIONAL 10 N.cm CÓD. ALT. (mm) IAMC-0400 4.0 IAMC-0600 6.0 IAMC-0406 4.0 ● IAMC-0606 6.0 ●
TORNILLOS	 TORNILLO DE RETENCIÓN 10 N.cm CÓD. COMP. (mm) PRA-01 2.0	
LABORATORIALES	 TORNILLO DE LABORATORIO CÓD. DIÁM. (mm) PTMAL-01 1.4	 PROTECTOR DE PULIDO PPAM-01