

Zygomatic²

PLUS



S.I.N.
Implant System



Zygomatic²

PLUS

- **ROSCAS AGRESIVAS Y COMPRESIVAS**

Rendimiento único y bloqueo más rápido del implante.

- **CONEXIÓN CONO MORSE 16°**

Alta resistencia mecánica y mayor encaje y adaptación de los componentes protésicos con la angulación de 16°.

- **EXTREMIDAD APICAL LISA**

Mejor adaptación y protección de los tejidos blandos y resultados superiores para casos graves de reabsorción maxilar.

- **FABRICADO EN TITANIO GRADO IV COLD WORKED**

Metal muy ligero y muy resistente a la corrosión, al desgaste y a la fractura, con los tratamientos de superficie de Doble Ataque Ácido (DAA).

- **EXCLUSIVA SUPERFICIE HANANO PLUS**

Altamente hidrofílica, la Superficie Plus favorece el proceso de osteogénesis, estimula el crecimiento y la cicatrización precoz del tejido óseo y aumenta la fuerza y el anclaje del implante.

IDEAL PARA CARGA INMEDIATA



Resultados inmediatos y tiempo de tratamiento más corto.

El implante Zygomatic Plus ofrece una solución inmediata al paciente, como alternativa a los procedimientos de injerto óseo. Proporciona estabilidad, previsibilidad y precisión en el tratamiento, cumpliendo con las expectativas de los profesionales mediante su diseño versátil y opciones adaptadas a características anatómicas y relaciones de tejidos.



CODIGOS DE LOS IMPLANTES ZYGOMATIC			
CODIGO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	DIÁMETRO DE LA PLATAFORMA (mm)	ALTURA (mm)
ILMZ 4030N	Ø4,0	Ø4,0	30,0
ILMZ 4032N	Ø4,0	Ø4,0	32,5
ILMZ 4035N	Ø4,0	Ø4,0	35,0
ILMZ 4037N	Ø4,0	Ø4,0	37,5
ILMZ 4040N	Ø4,0	Ø4,0	40,0
ILMZ 4042N	Ø4,0	Ø4,0	42,5
ILMZ 4045N	Ø4,0	Ø4,0	45,0
ILMZ 4047N	Ø4,0	Ø4,0	47,5
ILMZ 4050N	Ø4,0	Ø4,0	50,0
ILMZ 4052N	Ø4,0	Ø4,0	52,5
ILMZ 4055N	Ø4,0	Ø4,0	55,0
ILMZ 4057N	Ø4,0	Ø4,0	57,5
ILMZ 4060N	Ø4,0	Ø4,0	60,0
ILMZ 4062N	Ø4,0	Ø4,0	62,5

COMPONENTES PROTÉSICOS

El Mini Pilar con angulaciones de 17, 30, 45, 52 y 60 grados y alturas de 2,0 mm a 4,0 mm, hecho de aleación de titanio y color dorado anodizado. Su torque de instalación es de 20 Ncm.

Los protectores se atornillan sobre el mini pilar con un torque manual estándar y deben permanecer en su posición hasta la confección de la prótesis provisional o definitiva.




KIT QUIRÚRGICO ZYGOMÁTICO

Sonda de profundidad
para garantizar la
perforación correcta
del lugar del implante.



Brocas exclusivas recubiertas con
DLC (Diamond like Carbon):

Fresas Diamantadas:

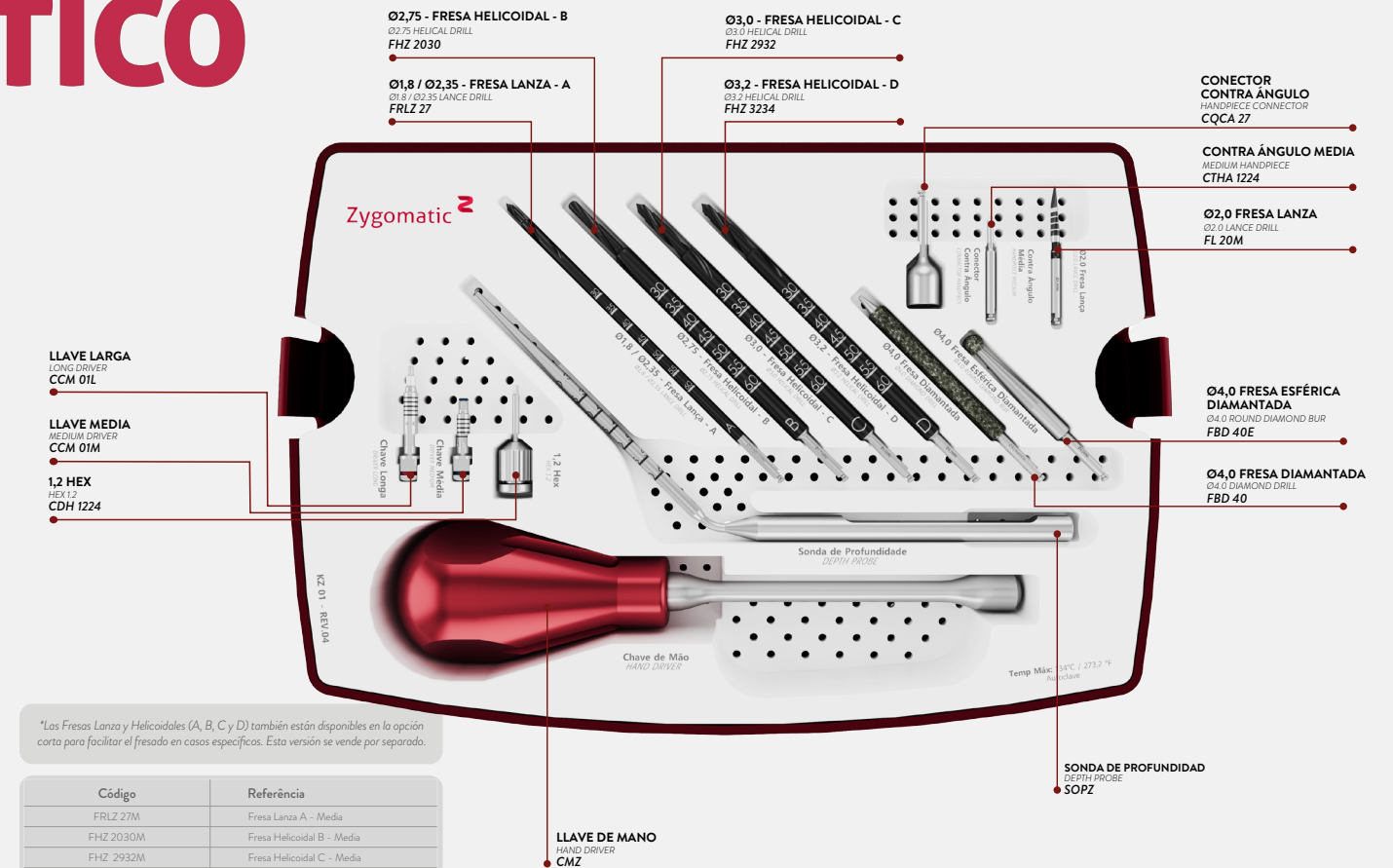

EI0087 - KIT QUIRÚRGICO ZYGOMÁTICO



MINI PILAR ANGULADO



CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

PTM 4800-3	Para mini pilar recto
PTMS 4800-3	Para mini pilar recto - Adecuado para soldadura láser
PTM 4800-2	Para mini pilar angulado



**CILINDRO
CALCINABILE CR-CO**

CPM 4800-3	Para mini pilar recto
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto - Para mini pilar recto
CPM 4800-2	Para mini pilar angulado
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto - Para mini pilar angulado



TORNILLO DE RETENCIÓN



Descubra Implantat, el hábitat educativo de S.I.N. Implant System.

 [implantat.global](https://www.implantat.global)

internacional@sinimplantsystem.com
www.sinimplantsystem.com

Visite nuestras Redes Sociales



[@sinimplantglobal](https://www.instagram.com/sinimplantglobal)



[@sinimplantglobal](https://www.facebook.com/sinimplantglobal)



[S.I.N. Implant System](https://www.youtube.com/S.I.N.ImplantSystem)



[/sin_implant](https://www.tiktok.com/@sin_implant)