

Zygomatic²

PLUS



Zygomatic²

PLUS

- **ROSCAS AGRESIVAS Y COMPRESIVAS**

Rendimiento único y bloqueo más rápido del implante.

- **16° CONO MORSE CONEXIÓN**

Alta resistencia mecánica y mayor encaje y adaptación de los componentes protésicos con la angulación interna de 16°.

- **EXTREMIDAD APICAL LISA**

Mejor adaptación y protección de los tejidos blandos y resultados superiores para casos graves de reabsorción maxilar.

- **FABRICADO EN TITANIO GRADO IV COLD WORKED**

Metal muy ligero y muy resistente a la corrosión, al desgaste y a la fractura, con tratamientos de superficie de Doble Ataque Ácido (DAA).

- **EXCLUSIVA SUPERFICIE HANANO PLUS**

Altamente hidrofílica, la Superficie Plus favorece el proceso de osteogénesis, estimula el crecimiento y la cicatrización precoz del tejido óseo y aumenta la fuerza y el anclaje del implante.



IDEAL PARA CARGA INMEDIATA

Resultados inmediatos y tiempo de tratamiento más corto.

El implante Zygomatic Plus ofrece una solución inmediata al paciente, como alternativa a los procedimientos de injerto óseo. Proporciona estabilidad, previsibilidad y precisión en el tratamiento, cumpliendo con las expectativas de los profesionales mediante su diseño versátil y opciones adaptadas a características anatómicas y relaciones de tejidos.



MEDIDAS TÉCNICAS			
CODIGO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	DIÁMETRO DE LA PLATAFORMA (mm)	ALTURA (mm)
ILMZ 4030N	Ø4,0	Ø4,0	30,0
ILMZ 4032N	Ø4,0	Ø4,0	32,5
ILMZ 4035N	Ø4,0	Ø4,0	35,0
ILMZ 4037N	Ø4,0	Ø4,0	37,5
ILMZ 4040N	Ø4,0	Ø4,0	40,0
ILMZ 4042N	Ø4,0	Ø4,0	42,5
ILMZ 4045N	Ø4,0	Ø4,0	45,0
ILMZ 4047N	Ø4,0	Ø4,0	47,5
ILMZ 4050N	Ø4,0	Ø4,0	50,0
ILMZ 4052N	Ø4,0	Ø4,0	52,5
ILMZ 4055N	Ø4,0	Ø4,0	55,0
ILMZ 4057N	Ø4,0	Ø4,0	57,5
ILMZ 4060N	Ø4,0	Ø4,0	60,0
ILMZ 4062N	Ø4,0	Ø4,0	62,5

COMPONENTES PROTÉSICOS

El Mini Pilar con angulaciones de 17, 30 y 45 grados y alturas de 2,0 mm a 4,0 mm, hecho de aleación de titanio y color dorado anodizado. Su torque de instalación es de 20 Ncm.

Los protectores se atornillan sobre el mini pilar con un torque manual estándar y deben permanecer en su posición hasta la confección de la prótesis provisional o definitiva.




KIT QUIRÚRGICO ZYGOMÁTICO

Consiga resultados superiores con el alto rendimiento a través de un protocolo quirúrgico diseñado para superar los desafíos de los procedimientos clínicos.

Sonda de profundidad para garantizar la perforación correcta del lugar del implante.

Secuencia lineal e intuitiva.

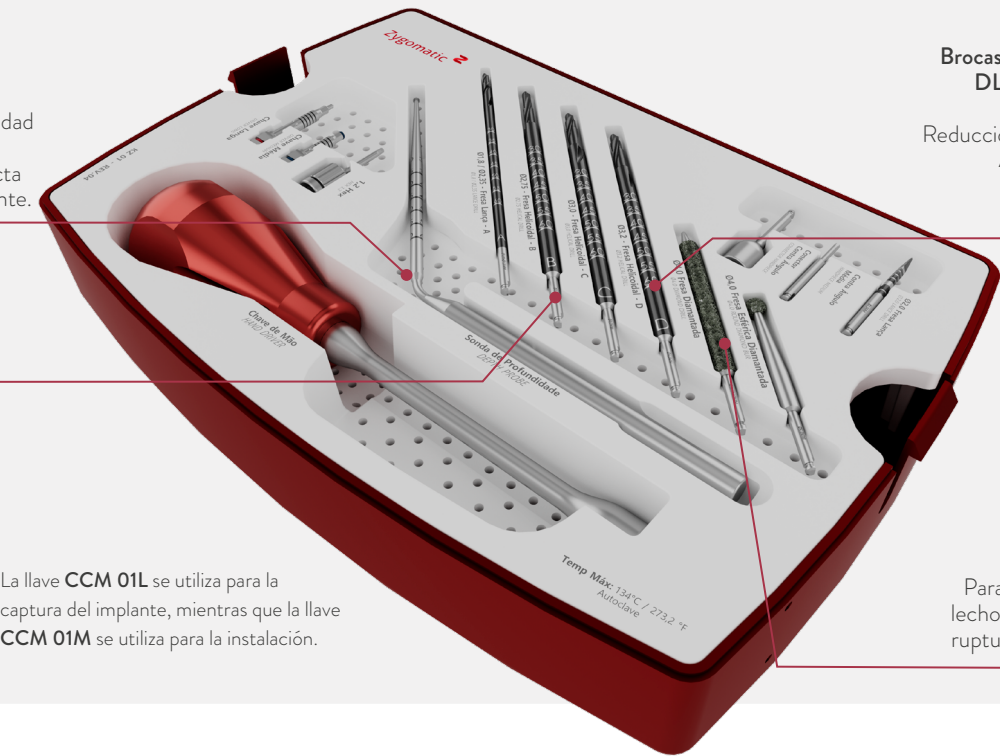


Brocas exclusivas recubiertas con DLC (Diamond like Carbon):

Reducción del calentamiento óseo;
Aumento de la durabilidad;
Alta potencia de corte;
Ángulo más afilado.

Fresas Diamantadas:

Para realizar la preparación del lecho con mínima posibilidad de ruptura de la membrana sinusal.

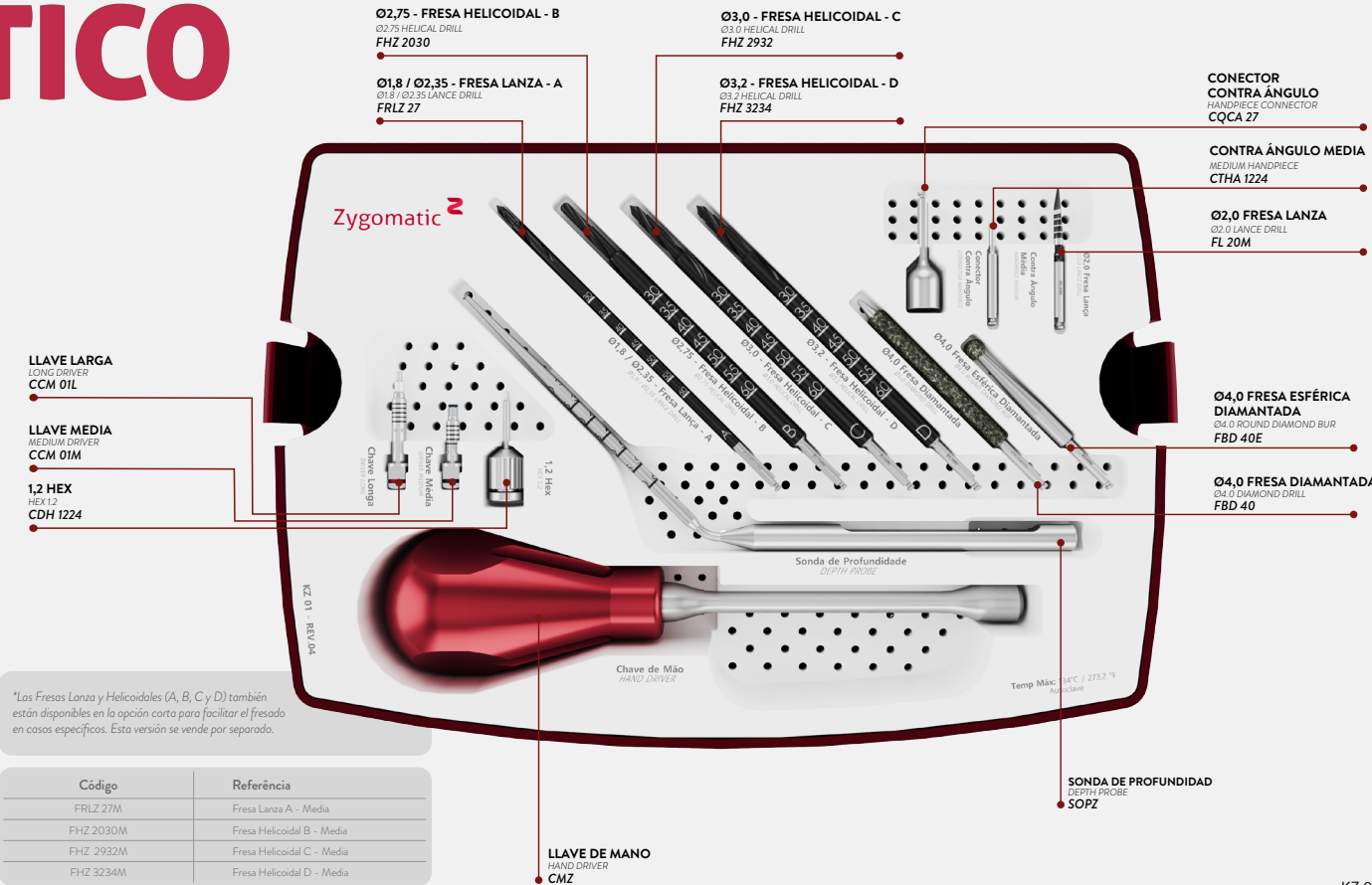

*Las Fresas Lanza y Helicoidales (A, B, C y D) también están disponibles en la opción corta para facilitar el fresado en casos específicos. Esta versión se vende por separado.

Código	Referencia
FRLZ 27M	Fresa Lanza A - Media
FHZ 2030M	Fresa Helicoidal B - Media
FHZ 2932M	Fresa Helicoidal C - Media
FHZ 3234M	Fresa Helicoidal D - Media

KZ 01 - REV.04

2

ANGLED MINI ABUTMENT

CODIGO	DIAM. (mm)	ALT. (mm)	ANG.
MAAM 4802I	4.8	2	17°
MAAM 4803I	4.8	3	17°
MAAM 4804I	4.8	4	17°

2

MINI PILAR ANGULADO

CODIGO	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ÁNG.
MAAM 4832I	4.8	2	30°
MAAM 4833I	4.8	3	30°
MAAM 4834I	4.8	4	30°

2

MINI PILAR ANGULADO

CODIGO	DIÁM. (mm)	ALT. (mm)	ÁNG.	SLIM
MAAM 4842I	4.8	2,0	45°	SLIM
MAAM 4843I	4.8	3,0	45°	SLIM

1

PROTECTOR DE PILAR

CODIGO

PMA 4855

5,0 mm

1

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

CODIGO

TMAM 4800

1

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

CODIGO

TMFM 4800

1

ANÁLOGO

CODIGO

ANMA 4800

1

CILINDRO PROVISIONAL DE TITANIO

CODIGO

PTM 4800-3	Para mini pilar recto
PTMS 4800-3	Para mini pilar recto - Adecuado para soldadura láser
PTM 4800-2	Para mini pilar angulado

1

CILINDRO CALCINABLEY CR-CO

CÓDIGO

CPM 4800-3	Para mini pilar recto
CLEM 4800-3	Cromo Cobalto - Para mini pilar recto
CPM 4800-2	Para mini pilar angulado
CLEM 4800-2	Cromo Cobalto - Para mini pilar angulado

1

PROTECTOR DE PULIDO

CODIGO

PPM 01

1

TORNILLO DE LABORATORIO

CODIGO	DIÁM. (mm)
PL 1405	1.4
PTMA 13-1	1.4

1

TORNILLO DE RETENCIÓN

CODIGO	COMP. (mm)	
PRH 20	2	Para mini pilar angulado
PRH 30	3	Para mini pilar recto

LLAVES

1

Llave Contra Ángulo Hex. 1.2mm Corta (CTH 1220)

1

Llave Contra Ángulo Hex. 1.2mm Mediana (CTH 1224)

1

Llave Contra Ángulo Hex. 1.2mm Larga (CTH 1230)

1

Llave de Carraca Hex. 1.2mm Corta (CDHC 20)

1

Llave de Carraca Hex. 1.2mm Mediana (CDHC 24)

2

Llave Contra Ángulo Hex. 1.2mm Est. Corta (CTHA 1220)

2

Llave de Carraca Hex. 1.2mm Mediana (CHTMA 24)

2

Llave de Carraca Hex. 1.2mm Est. Corta (CHTMA 20)

2

Hex. 1.2mm Mediana (CHTMA 24)

Los indicadores de dirección (52° y 60°) están disponibles para compra por separado.

Codigo	Referencia
IDA 52	Indicador de Dirección Angulado de 52°
IDA 60	Indicador de Dirección Angulado de 60°



internacional@sinimplantsystem.com

[**www.sinimplantsystem.com/es**](http://www.sinimplantsystem.com/es)

Visite nuestras Redes Sociales:



[**/sinimplantsystemlatam**](https://www.facebook.com/sinimplantsystemlatam)



[**@sin.latam**](https://www.instagram.com/@sin.latam)



[**@singlobal**](https://www.youtube.com/@singlobal)